2025年7月（第1版）
*2026年9月（第2版）

製造販売届出番号：28B1X10021000131

一般医療機器

一般医療機器　類別　：　器58　整形用機械器具
一般的名称　：　関節手術用器械　（JMDN ｺｰﾄﾞ：70964001）

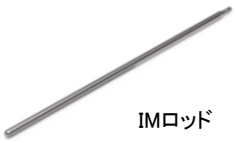
販売名　：　MZCオプション器械

【禁忌・禁止】
1. 化学薬品の使用禁止。
本品を化学薬品に曝すことは避けること。「腐食による損傷の原因となります。
2. 本製品の加工、改造等は絶対に行わないこと。（振動、切削、打刻等により製品を著しく劣化、消耗させ、故障、破損の原因となるため）。
3. 本製品は、未滅菌であるため、使用前には必ず適切な方法で洗浄と滅菌を行うこと。

【形状・構造及び原理等】
1. 原材料名　：　ステンレス鋼、シリコン樹脂

2. 形状、構造
本製品の形状は以下の通り。*サイズには数種類ある。


ﾌﾞﾛｰﾁﾊﾝﾄﾞﾙ


IMロッド


カルカリーマー


オフセットステムインパクター

3. 原理
・本製品は専用の人工股関節に適合した手術器械として使用することにより、ｲﾝﾌﾟﾗﾝﾄを適切に埋植することができる。

【使用目的、効能又は効果】
・本製品は、人工関節置換術の関節手術に用いる手術器械であり、
手動式である。なお本製品は再使用可能である。

【使用方法等】
1. 使用前
本製品は、未滅菌品である。【保守・点検に係る事項】の手順に従い、使用前には必ず点検を行い、洗浄及び滅菌を行うこと。

2. 使用方法
本製品は、人工股関節置換術の関節手術を行うための手術器具であり、
インプラントの埋植を適切に行うために用いる。

【使用方法等に関連する使用上の注意】
・折損、破損、曲り等の原因になり得るので、使用時に必要以上の力を加えないこと。
・臓器、神経、血管の近くで器械・器具を使用する場合は特に注意すること。
・手術に必要な器械・器具がすべて揃っていることを確認すること。
・術中に器械・器具の組合せを再確認すること。

【使用上の注意】
1. 重要な基本的注意
1）本製品を変形したり、加工して使用しないこと。
2）使用前に器械が正常機能するか、キズ・変形等により正常機能を阻害するような形跡がないか確認すること。
3）器械・器具が破損した場合、術後合併症が起こる可能性があるため、破片が体内に残らないようにすること。

2. 不具合・有害事象
本製品の使用により以下のような不具合・有害事象が発生する可能性がある。
1）重大な不具合
・不適切な取り扱い、洗浄、管理による破損、変形、腐食、変色、屈曲。
・金属疲労による器械器具の破損。

2）重大な有害事象
・不適切な取り扱い、使用方法による血管、神経、軟部組織、筋肉、内臓、骨若しくは関節の損傷。
・患者又は手術従事者の負傷。
・破損した器械器具の破片の体内留置。
・感染症。
・神経障害。
・周辺血管、神経及び内臓の損傷。
・手術時間の延長、手技の変更及び再手術。
・金属アレルギー。

【保管方法及び有効期間等】
・本製品は、水漏れ、直射日光、高温、多湿を避けて保管すること。

【保守・点検に係る事項】
1. 洗浄
1）本製品使用後は、直ちに洗浄を行うこと。直ぐに洗浄できない場合は、血液溶解剤に浸漬したり、蛋白凝固防止剤を噴霧するなどして、汚れが固着しないように予備洗浄すること。
2）製品を腐食させる可能性があるため、禁忌の薬品の使用は避けること。
3）医療用中性酵素系洗剤等に浸漬したのち、柔らかい洗浄用ブラシ等で入念に洗浄する。洗浄後は血液塊等の異物がないことを確認する。
4）残留洗剤や組織片等がなくなるまで完全脱イオン水（RO水）で十分にすすぎ、清潔な布で水分を拭き取ること。
5）洗浄後は腐食防止のために直ちに乾燥すること。
6）錆取、熱ヤケ除去作用のある洗浄剤を使用すると、表面光沢が変化する場合がある。
7）金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので使用しないこと。
8）可動部の動きをスムーズにするため、医療機器用の水溶性潤滑剤を使用すること。
9）強アルカリ、強酸性洗剤、消毒剤は器械・器具を腐食させる恐れがあるため使用しないこと。
10）機械洗浄する場合は、各施設での洗浄ガイドラインに従い、洗浄時間、手順等については使用する装置の取扱説明書を遵守すること。洗浄剤の使用は、上記の方法に従うこと。

2. 滅菌
洗浄を行った後、必ず滅菌処理を行うこと。
下記の推奨条件、あるいは滅菌装置の製造元又は施設の定める方法で滅菌を行うこと。
推奨滅菌条件　：　高圧蒸気滅菌の場合（日本薬局方より）

温度	時間
115～118℃	30分間
121～124℃	15分間
126～129℃	10分間

但し、クロイツフェルト・ヤコブ病に罹患している、或いはその疑いがある患者の手術を行った場合は、「クロイツフェルト・ヤコブ病感染予防ガイドライン」で推奨されている洗浄・滅菌方法にて処理すること。

3. 使用者による保守・点検事項
1）使用前及び使用後は、本製品に汚れ、変形、キズ、ひび割れ、破損等がないか、劣化、変色、機能低下等がないか、外観に異常がないか確認すること。
2）鉱物油、石油、シリコンベースの潤滑剤は使用していないこと。
3）必要に応じて点検し、器具が正常に使用できることを確認すること。
その際、破損、機能低下がないか十分点検を行うこと。
4）使用を重ねることにより受ける、反復的な応力により金属疲労に曝されるため、明らかな疲労が見られる場合は、その器具は破棄し、新しい製品と取替える必要がある。

手術手技書を必ずご参照下さい。

4. その他の保守点検事項

1）本製品は、当社以外に修理を依頼しないこと。

2）本文書中で不明な点は、下記の連絡先に問い合わせること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

［製造販売業者、製造業者］

株式会社　木下技研

TEL　：　0790－43－1158

FAX　：　0790－43－1601

［販売代理店］

株式会社　M’z company

手術手技書を必ずご参照下さい。