
機械器具(66)歯科用練成器
一般医療機器　歯科用練成器具　70682000

ミキシングチップ スリム

再使用禁止

【禁忌・禁止】
・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】
オートミックスタイプの専用シリンジに取り付けて使う。シリンジから押し出された材料が、ミキシングチップ スリム内にある羽根により撹拌・練和される。エンドチップは必要に応じて、ミキシングチップ スリムの先端に装着する。

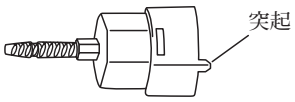

ミキシングチップ スリム


エンドチップ


[材質]

ミキシングチップ スリム	ポリプロピレン樹脂 ポリアセタール樹脂
エンドチップ	ポリプロピレン樹脂


【使用目的又は効果】
歯科材料を練和、注入するのに用いる。


【使用方法等】
併用する材料について
クラレノリタケデンタル株式会社が製造販売する製品の電子添文にて、併用する器材として本品が記載されている製品。


1)キャップの取り外し
①オートミックスタイプの専用シリンジのラベルに印刷されている「OPEN↔LOCK」の表示が見える向きでシリンジを持ちます(図1)。

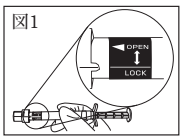

②シリンジのキャップを図2のように持ち、キャップの突起をLOCKからOPENの方向に◀印まで回転させてロックを解除します(図3)。突起と◀印が合う位置でキャップを水平に引っ張って取り外します(図4)。キャップ及びシリンジが破損するおそれがあるため、OPEN位置以上に回転させないでください。

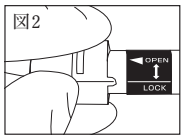

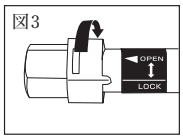


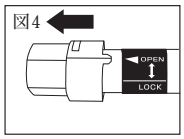



2)ペーストの頭出し
併用する製品を開封後初めて使用する際は、シリンジから練和紙等にゆっくりと少量ペーストを押し出し、2つのペーストが均等に出ることを確認します。


3)ミキシングチップ スリムの装着
①ミキシングチップ スリムを図5のように持ち、ミキシングチップ スリムの突起を図6のようにシリンジラベルの◀印に合わせて奥まで押し込みます。破損のおそれがあるため、押し込む際にミキシングチップ スリムの先端は持たないでください。
②ミキシングチップ スリムをLOCKの方向に手応えを感じるまで回転させてロックします。確実に装着されているとLOCK位置を示す線と突起が合います(図7)。ミキシングチップ スリム及びシリンジが破損するおそれがあるためLOCK位置以上に回転させないでください。


エンドチップを用いる場合
図8のようにエンドチップの根元を持ち、ミキシングチップ スリムにカチッと音がするまで強く押し込んで確実に装着します(図9)。また、エンドチップの先端を曲げないでください。ペースト押し出し時に気泡を巻き込むおそれがあります。

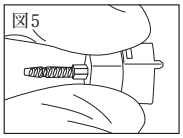

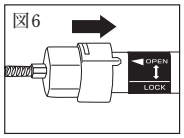

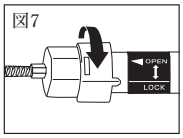


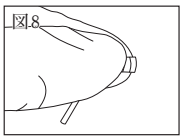


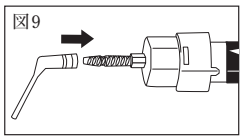

[使用方法に関連する使用上の注意]
①ミキシングチップ スリムまたはキャップを脱着する際、OPEN位置以上に回転させないこと。また、ミキシングチップ スリムまたはキャップを装着する際、必ずLOCK位置まで回転させて確実にロックすること。この時、LOCK位置以上に回転させないこと。破損のおそれがあります。
②エンドチップを用いる場合は、ミキシングチップ スリムにカチッと音がするまで強く押し込んで確実に装着すること。装着不良の場合、使用時にエンドチップが外れ、ペーストが飛び出るおそれがあります。
③エンドチップは、未使用のミキシングチップ スリムに装着してからペーストを押し出すこと。装着不良のおそれがあるため、使用済みのミキシングチップ スリムに後からエンドチップを装着しないでください。
④ミキシングチップ スリムの装着の際、破損のおそれがあるため、チップの先端は持たないこと。
⑤ミキシングチップ スリムを装着する際は、下図のAが(正)の位置にあることを必ず確認してからご使用ください。Aが(誤)のように回転している場合、ミキシングチップ スリムとシリンジは正しく装着できません。なお、シリンジにミキシングチップ スリムを装着する前にエンドチップを装着し、回転させた場合、まれにAが回転することがあります。その場合は、Aを(正)の位置に戻してからご使用ください。

ミキシングチップ スリムをシリンジ装着側から見た図

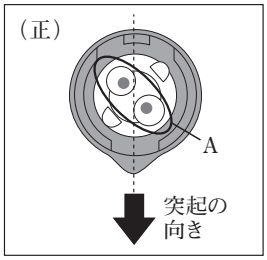

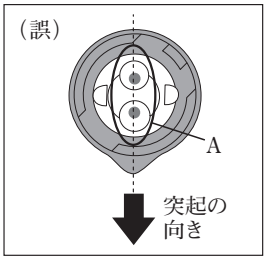

⑥エンドチップの先端を曲げないこと。ペースト押し出し時に気泡を巻き込むおそれがあります。
⑦エンドチップを用いる場合は、無理な力や角度で装着を行わないこと。
⑧エンドチップの先端は尖形であるので、取り扱い時には注意すること。
⑨エンドチップはミキシングチップ スリム以外に装着して使用しないこと。
⑩交差感染を防ぐため、ミキシングチップ スリムとエンドチップの再使用は行わないこと。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
・直射日光や高温多湿を避けて保管すること

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元：
クラレノリタケデンタル株式会社
〒959-2653 新潟県胎内市倉敷町2-28
フリーダイヤル：0120-330922

販売元：
株式会社モリタ
〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18　TEL(06)6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15　TEL(03)3834-6161