*2020 年 2 月　(第 2 版)
2019 年 11 月　(第 1 版)

医療機器届出番号　22B3X00005JJ0043

器 58　整形用機械器具

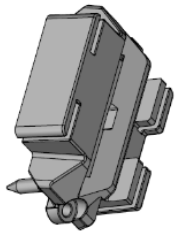
一般医療機器　　関節手術用器械　　70964001

SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック (JJ0043-001)

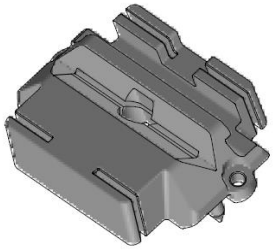
【禁忌・禁止】
本品に曲げ、研磨切削、打刻（刻印）等の二次的加工（改造）は絶対に行わないこと［破損の原因になる恐れがある］。

【形状・構造及び原理等】
(1)形状及び構造
本添付文書に該当する製品の製品名、製品番号、サイズ等については包装表示ラベルまたは本体の刻印を確認すること。

No.	1-1	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ1 1.47MM
		製品番号	APJP1271
		JAN コード	04589852116009
No.	1-2	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ2 1.47MM
		製品番号	APJP1272
		JAN コード	04589852116016
No.	1-3	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ3 1.47MM
		製品番号	APJP1273
		JAN コード	04589852116023
No.	1-4	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ4 1.47MM
		製品番号	APJP1274
		JAN コード	04589852116030
No.	1-5	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ5 1.47MM
		製品番号	APJP1275
		JAN コード	04589852116047
No.	1-6	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ6 1.47MM
		製品番号	APJP1276
		JAN コード	04589852116054
No.	1-7	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ7 1.47MM
		製品番号	APJP1277
		JAN コード	04589852116061
No.	1-8	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ8 1.47MM
		製品番号	APJP1278
		JAN コード	04589852116078

製品外観	材質
	ステンレス鋼

No.	2-1*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ1 1.19MM
		製品番号	APJP1324
		JAN コード	04589852119130
No.	2-2*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ2 1.19MM
		製品番号	APJP1325
		JAN コード	04589852119147
No.	2-3*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ3 1.19MM
		製品番号	APJP1326
		JAN コード	04589852119154
No.	2-4*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ4 1.19MM
		製品番号	APJP1327
		JAN コード	04589852119161
No.	2-5*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ5 1.19MM
		製品番号	APJP1328
		JAN コード	04589852119178
No.	2-6*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ6 1.19MM
		製品番号	APJP1329
		JAN コード	04589852119185
No.	2-7*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ7 1.19MM
		製品番号	APJP1330
		JAN コード	04589852119192
No.	2-8*	製品名	SRI ATTUNE MI スパイク AP ブロック　SZ8 1.19MM
		製品番号	APJP1331
		JAN コード	04589852119208

製品外観	材質
	ステンレス鋼

(2)原理
専用の人工膝関節に適合した手術器械として使用することにより、大腿骨埋め込み部位にインプラントを適切に埋植することができる。

手術手技書を必ず参照願います。

【使用目的又は効果】

本品は、再使用可能な手術器械であり、人工膝関節置換術等の関節手術を行うために用いる。

【使用方法等】

(1)使用方法

本品は、人工膝関節置換術等の関節手術を行うための手術器械であり、インプラントの埋植を適切に行うために用いる。詳細は、使用するインプラントの手技書を参照すること。

(2)使用方法等に関連する使用上の注意

本品は未滅菌の状態で供給される為、使用前に滅菌すること。滅菌は【保守・点検に係る事項】の(2)滅菌により行うこと。

【使用上の注意】

(1)重要な基本的注意

・本品の使用に際し、手術手技を十分に理解すること。
・使用前に、破損・変形・傷・摩耗が無いか、適切に機能するか確認すること。破損等が確認された場合は使用せずに修理を依頼すること。
・機器同士を過度な力で接触させないこと。[機器の破損や摩耗のおそれがある]
・使用後は、ただちに破損・折損がなかったか点検すること。破損等が見つかった場合、破片が体内に遺残していないか調べ、遺残していた場合は適切な処置を行うこと。

(2)相互作用（他の医療機器等との併用に関すること）

[併用禁忌](使用しないこと)

医療機器の名称等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
当社が認めていない他社製品	専用品でないと適合しない恐れがあり、目的の効果が得られない	当社指定の製品以外との併用を検証していない

(3)不具合・有害事象

①重大な不具合

・本品の破損、折損、摩耗、変形
・本品の機能不良

②重大な有害事象

・血管、神経、組織、靭帯、腱、骨、内臓又は関節の損傷及び穿孔、出血、骨折又は神経障害等
・感染症
・破損片の体内遺残
・アレルギー反応
・本品の不具合によって起こる手術時間の延長、手技の変更及び再手術

③その他の有害事象

・患者及び手術従事者の負傷

【保管方法及び有効期間等】

直射日光及び高温多湿を避けて、室温にて保管すること。

【保守・点検に係る事項】

(1) 洗浄

・器械の使用後は付着した組織片の乾燥を防ぐため、使用直後は速やかにすすぎ洗いを行い、血液、組織片及び生理食塩水を除去すること。使用直後に行えない場合は、洗浄するまで器械を浸漬しておくこと。
・洗浄装置（超音波洗浄機等）を用いる場合は、血液・タンパク質に対し優れた溶解特性を持つ洗剤を用いること。洗浄液は使用の都度新たに調整すること。
・汚染物除去に用いる洗剤は、医療用中性洗剤等洗浄方法に適したものを選択し、適正な濃度で使用すること。
・強アルカリ／強酸性洗剤及び消毒剤は器具を腐食させる恐れがあるので使用を避けること。洗浄には柔らかいブラシ等を使用し、金属性タワシ・クレンザー（磨き粉）は器具の表面が損傷するので汚染除去及び洗浄に使用しないこと。
・洗浄後は腐食防止のため、直ちに乾燥すること。

(2) 滅菌

・本品は、医療機関内において 10^{-6}以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行うこと。

高圧蒸気滅菌の場合

サイクル：前真空
温度： 132 度
暴露時間：6 分

・滅菌後の製品における無菌性の保証については各医療機関の責任の下行うこと。

(3)点検

・使用する前に、必ず全ての器械を点検すること。
・本品に傷・割れ・有害なまくれ・さび・ひび割れなどの損傷、摩滅が無いことを外観検査によって確認すること。
・各部品やそれらを固定しているネジやピンの外れや緩みがないこと。
・対応する手術機械やインプラントと正しく組み合わせることが出来ること。
・操作部及び可動部が正しく動作及び機能していること。
・レーザーマーキング等の表示が判読可能であること。
・器械は特定の時点で摩滅し、交換が必要になるので注意すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

株式会社　ＫＳＩ
電話番号　0550-88-3660

【販売業者の氏名又は名称等】

ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
URL ： depuysynthes.jp

手術手技書を必ず参照願います。