

歯科材料(09) 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

Rizen ジルコニア用ミリングバー

【使用目的又は効果】

各種歯科用CAD/CAM材料を切削・研削加工するために用いる回転器具で、専用の加工機に取り付けて使用する。


【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

外国製造業者:Shenzhen Rizen Medical Industrial Co.,Ltd.
外国製造業者国名:中華人民共和国

【形状・構造】

型式	作業部径 (a)	軸径 (b)	全長 (d)	首下長 (c)	対象	コーティング
T5	φ 1.5	6mm	50	13.5	ジルコニア	あり
T11	φ 2.0		50	11.5		
T12	φ 1.0		50	9.5		
T19	φ 1.8		50	17.5		

材質:超硬合金

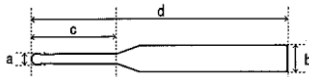

【使用方法】

・組み合わせて使用する医療機器(軸径6mm)
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
「CORiTEC 350シリーズ」医療機器届出番号:13B2X10463000002
「CORiTEC 350i Loader PROプラス」医療機器届出番号:13B2X10463000006

【操作方法】

詳細な使用方法については、機器に付属の取扱説明書等を参照すること。

- (1) 機器の取扱説明書に従い、本材を機器本体に取り付ける
- (2) 適切なプログラミングで研削を行う

【使用上の注意】

- (1) 本材は、専用の加工機以外の機器には使用しないこと
- (2) 変形、破損、腐食等があるものは使用しないこと
- (3) 本材の加工、改造は行わないこと
- (4) 本材の使用中に異常な振動や音を感じた際は、直ちに使用を中止すること
- (5) 本材は刃物である為、取り扱いには注意すること

【保管方法】

水分、腐食性薬剤及びその蒸気の暴露を避けて、外圧(物理的負荷)及び汚染を受けないように保管すること

取扱説明書を必ずご参照ください