＊ 2017 年 10 月 （第 2 版）（新記載要領に基づく改訂）
2008 年 11 月 （第 1 版）

医療機器届出番号:13B1X00009000090

機械器具 06 呼吸補助器
一般医療機器 単回使用人工呼吸器用ウォータトラップ（36276000）

ハイホーウォータトラップ

再使用禁止

＊【警告】

＜使用方法＞

1. 本器を緩みのないよう確実に接続してください。[接続部からガス漏れを生じる恐れがあるため]
2. 本器を回路内で最も低い位置に設置してください。[結露した水が本器に流れ込むようにするため]
3. 本器の貯水カップに溜まった水分量を定期的に確認し、満杯になる前に、貯水カップに溜まった水を適宜排水してください。また、使用前に弁が正しく開放されることを確認してください。[貯留した水が回路内に逆流したり、貯留した水の重さにより本器が回路から脱落したりする恐れがあるため]

＊【禁忌・禁止】

＜使用方法＞

1. 本器は、単一患者のみ使用が可能な製品であり、複数の患者に使用しないこと。[感染防止のため]
2. 本器の使用は、24 時間を限度とすること。[感染防止のため]
3. 再使用禁止。[感染防止のため]

【形状・構造及び原理等】


1. 構成

本器は、ネブライザーの呼吸回路に接続し、回路内に結露した水を貯留するウォータトラップから成る。

2. 寸法

貯水カップ容積：50ml
コネクター形状：22mm

3. 外観図及び各部の名称

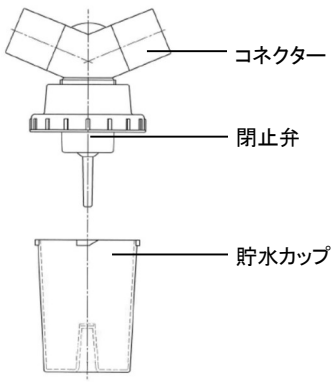

4. 原理

ネブライザーの呼吸回路に接続することにより、回路内に結露した水を貯水カップに貯留する。また、貯水カップにたまった水の排出時には、閉止弁が閉じ、呼吸回路内からのガス漏れを防ぐ。

【使用目的又は効果】

加温加湿時に蓄積する復水を回収するため、人工呼吸器やネブライザーの呼吸回路に用いる。

【使用方法等】

1. 呼吸回路に接続する前に、本器に破損やひび割れが見られないことを確認すると共に弁が正しく動作することを確認してください。
2. 結露した水が本器に流れ込むよう、本器を呼吸回路内の最も低い位置になるように接続してください。
3. 本器を緩みのないように確実に接続し、接続部分からのガス漏れがないことを確認してください。
4. 使用中、本器に貯留した水分量を随時確認し、適宜、貯水カップを外し、排水してください。
5. 排水する際は、コネクターを保持し、貯水カップを左に回して取り外してください。
6. 排水後は、貯水カップを取り付け、各部が適切に密閉され、ガス漏れが発生していないことを確認してください。
7. 貯水カップを取り付ける際は、閉止弁が貯水カップの突起により押し上げられていることを確認してください。弁が開放されていないと、本器は機能しません。

＊【使用上の注意】

1. 本器を 80℃以上の高温にさらさないでください。（変形する恐れがあるため）
2. 本器と併用する医療機器に関しては、その医療機器に附属の添付文書等を参照してください。
3. 他の製品と接続するときは、その互換性、安全性を十分確認した上で使用してください。

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水漏れに注意し、高温、多湿、直射日光のあたる場所を避けて常温で保管すること。

2. 使用期限

製造日から 3 年

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 ： 株式会社小池メディカル
電話 ： 03-5662-6605（代）
製造業者 ： Hsiner Co., Ltd.（台湾）

062_A_01_02