

類別：機械器具 1 手術台及び治療台
 一般医療機器 一般的名称：手術台アクセサリ
上肢台

【警告】

- ・ 間違った患者のポジショニングにより生命機能が害される場合がある。正しく患者の位置を決めて、継続的な観察を維持すること。患者の上肢を固定する際は、締め付けすぎないように十分注意すること。

【禁忌・禁止】

- ・ 本製品は当社が認めた者以外、修理・保守点検できない。
- **・ 本製品にもたれかかったり、座ったりしないこと。[本製品が手術台から脱落することがある。]


【形状・構造及び原理等】

1) 構成

本製品は以下のユニットにより構成される。

- (1) 製品本体
- (2) パッド

2) 各部の名称

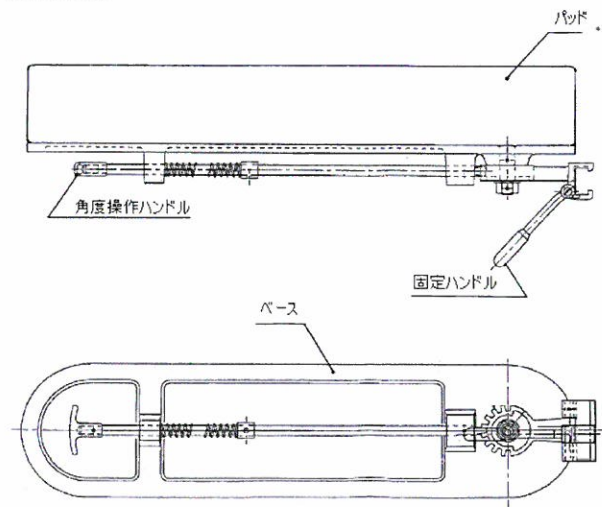

3) 本体寸法及び質量

1001.19

寸法 (mm) 幅:132±10 長さ:550±10
 質量 (Kg) 2.6±0.5

4) 原理

本品を手術台のアクセサリ取り付け用レールに取り付け、レバーにより最適な角度に調節し、患者の上肢をストラップを使用して台上に固定することである。

【使用目的、効能又は効果】

本アクセサリは、手術台上で患者の上肢を固定することを目的とする。

【品目仕様等】

- ・ 耐荷重：25kg
- ・ 調節角度：最大 180°

【操作方法又は使用方法等】

使用環境条件

温度 常温
 湿度 常湿

設置上の注意

手術台等から脱落しないことを確認すること。

操作方法

- 1) 本上肢台 を手術台に取り付ける。
- 2) 患者の上肢を、本品上にのせる。
- 3) 必要であれば患者の上肢を固定する。
- 4) 手術終了後に、本上肢台を取り外す。

** 【使用方法に関連する使用上の注意】

- ・ 手術前に本製品が手術台に確実に固定されていることを確認すること。
- ・ 本製品に横方向から力を加えないこと。

【使用上の注意】

1) 禁忌・禁止

- ・ 摩耗またはダメージがある場合、しっかりと固定できない。完全な状態の製品のみを使用すること。
- ・ ダメージのあるパッドは使用しないこと。

2) その他

- ・ この手術台およびアクセサリを廃棄する場合は、産業廃棄物となり、必ず地方自治体の条例・規則に従い、許可を得た産業廃棄物処分業者に廃棄を依頼すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

貯蔵方法

本製品は、清浄にして保管すること。

使用耐用年数（自主基準）

指定された保守点検を実施した場合に 7 年

交換部品

交換部品：バネ

保守部品の保有年数は、製造終了後 7 年。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 本製品は、定期的なメンテナンスが必要である。定期点検を取扱店に依頼すること。

2) 使用者による保守点検事項

項目	点検 頻度	点検内容（概要）
全体	毎回	キズ、摩耗なきこと
全体	毎回	汚れなきこと

3) 業者による保守点検事項

項目	点検 時期	点検内容
定期点検事項	毎年	定期点検表の各項目

【包装】 1台単位

【製造販売元】

株式会社 コンデックス
 埼玉県越谷市相模町3-229-1
 TEL 048-961-8106