

rapidshape 3D プリンター

【警告】


1. 必ず操作手順に従ってご使用ください。
2. 本機の定格（電圧、周波数）に適合する電源コンセントに接続してください。
3. 燃えやすいものがあるそばに設置しないでください。
4. 緊急時にすばやく電源プラグを抜けるようにしてください。

【禁忌・禁止】

1. 濡れた素手でプラグ及び電源スイッチに触れないでください。感電の恐れがあります。
2. 引火しやすいので作業場には火気を持ち込まないでください。
3. 勝手に分解、修理、改造はしないでください。事故につながる恐れがあります。
4. 屋外、水のかかる場所、湿気の高い場所には設置しないでください。

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造

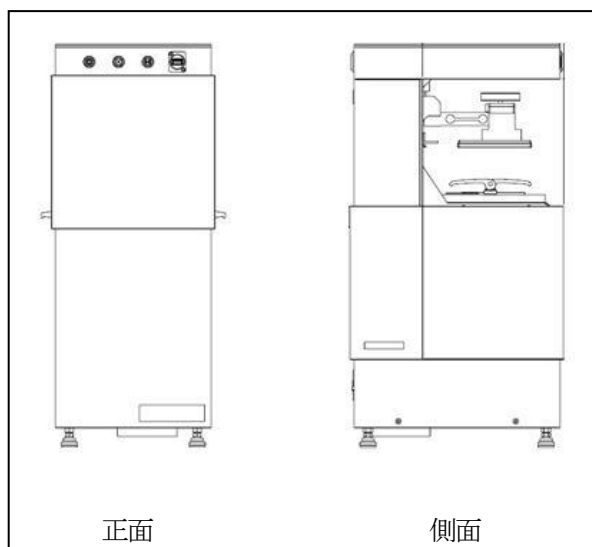

正面

側面

2. 寸法・重量

D30: 617mm (H) x 281mm (W) x 331mm (D) 重量：約 15kg

D40: 677mm (H) x 372mm (W) x 371mm (D) 重量：約 25kg

3. 原理

光で重合する材料に CAD/CAM 設計の通りに光を当て、重合反応を利用して造形する。

【使用目的、効能又は効果】

歯科用パーツを CAD/CAM 連携 3D プリンターで迅速、かつ高精度に

作製できる。

【品目仕様等】

電圧 (V)	100/110/230
最大電力 (W)	[D30/D40] 450/800
環境温度 (°C)	0 ~ 40
環境湿度	最大 60%
精度 (X,Y)	1920 x 1080 px、
精度 (Z)	25 - 50 µm
機械重量(kg)	[D30/D40] 15/25

【使用方法】

1. 本品は歯科用パーツのコンピュータ支援製造に用いるものであります。
2. 具体的使用方法はマニュアルをご参照ください。

【使用上の注意】

1. 担当者以外は触らないこと。
2. 使用しない時は電源コンセントを抜くこと。
3. 使用時アースを接続すること。
4. 作動時はドアを閉めること。
5. 目的用途以外は使用しないこと。
6. 精密機器のため、取扱には十分注意すること。
7. 機器を分解、修理、改造しないこと。
8. 異常発生又は故障したときは、直ちに担当者又は当社指定の業者に連絡すること。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 直射日光を避け、水のかからない室内に保管する。
2. 振動、衝撃を受けない平らで安定した場所に保管する。
3. 化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しない。
4. 関係者以外が触れないように、適切に保管・管理する。

【包装】

1 台／箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者：コアフロント株式会社

〒162-0845

東京都新宿区市谷本村町 2-1-1

TEL 03-5579-8710

製造業者：Rapid Shape GmbH (ドイツ)