

器54 医療用捲綿子
一般医療機器 医科用捲綿子 JMDNコード:10172000

4インチ紙軸弱コート綿棒G

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- 再使用禁止

【形状、構造及び原理等】


軸先端の綿球部に薬剤を塗布し、身体の治療及び検査のための試料を採取することができる器具である。

綿球部の材質:(脱脂綿)

軸の材質:(紙)

接着剤:セロゲン、ポリビニルアルコール

寸法 全長106mm/綿球の長20mm/綿球の径10.5mm/軸の径2.6mm

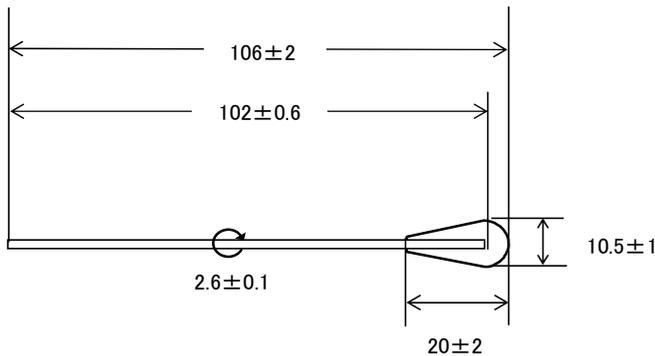

【使用上の注意】

- (1)薬剤等に浸しすぎると軸が柔らかくなるおそれがあるため適度に含浸させて使用する。
- (2)綿球部や軸の変形、変色等があるものは使用しない。

【保管方法及び有効期間等】

高温、直射日光を避けて、湿気のない清潔な場所に保管する。

【取扱い上の注意】

薬剤等、含浸後はできるだけ速やかに使用する。
高圧蒸気滅菌は不可。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

株式会社 山洋

大阪府富田林市中野町東2丁目2番6号

電話番号:0721-24-3376

製造業者

NGAMDEE COTTON CO.,LTD(タイ)

【使用目的 又は効果】

- (1)先端の綿球部に薬剤を含浸させて身体の一部に塗布し消毒又は治療等を行うのに使用する。
- (2)先端の綿球部に体液等を吸収、吸着させて検体を採取するのに使用する。

【使用方法等】

- (1)先端の綿球部に薬剤等を含浸させて身体の一部に塗布する。
- (2)先端の綿球部に体液等を吸収又は吸着させて検査のための試料を採取する。