

ハルトマン耳鏡

一般医療機器

JMDN：７０９６９００１


【禁忌・禁止】

本品は再使用可能ですが乾燥工程で乾燥温度の設定機能の無いオートクレーブでの滅菌は出来ません。

【保守・点検に係る事項】

消毒・清掃は消毒用アルコールの清拭をお願いします。
尚、シンナーなどの有機溶剤は使用しないでください。

【形状・構造及び原理等】

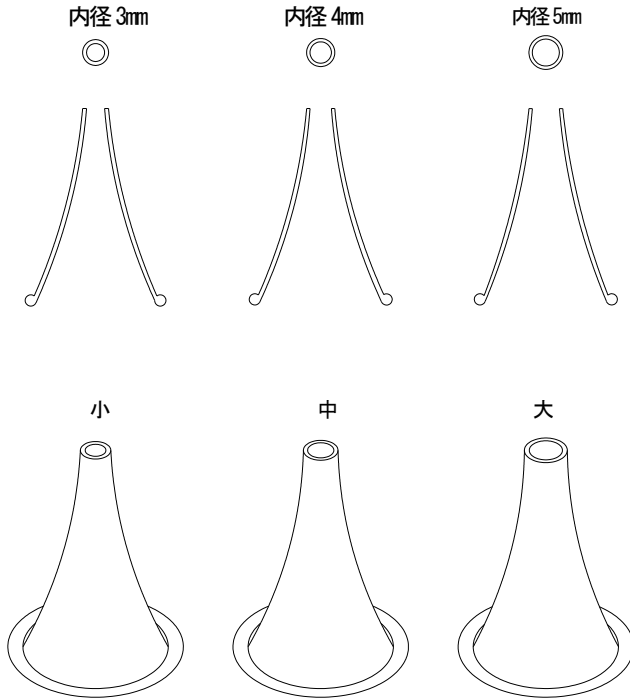

【包装】

包装単位 １個

【製造販売業者】

製造販売業者名 株式会社 三 恵
住 所 千葉県市原市八幡海岸通１９６９－３３，３４
電 話 番 号 ０４３６－４１－１８２０

本体	ポリプロピレン 大、中、小とも全長３５mm 耐熱温度 １３０℃
----	------------------------------------

原理：外耳道を観察する上で外光が入りにくい様にする。

【使用目的又は効果】

拡張するために用いる器具をいう。電動式ものを除く。本品は再使用可能である。

【品目仕様等】

外耳道を拡張し観察を補助する。

【使用方法等】

外耳道に入れても不快感を与えないような耳に合った大きさの耳鏡のうち最も大きなサイズを選んで使用します。

【使用上の注意】

本品は再使用可能です。オートクレーブでの滅菌は耐えられますが、乾燥工程で温度保証のない機器では変形する可能性があります。EOGガス滅菌、消毒用アルコールでの消毒は可能です。

【保管方法及び有効期間等】

常温で保管し直射日光等に当たらない場所で保管してください。
標準的な使用期間の目安：３年（自己認証による）