** 2024 年 06 月　第 5 版
＊ 2023 年 05 月　第 4 版


認証番号：20400BZZ01017000


歯科材料　０２　歯冠材料
管理医療機器　分割型レジン臼歯（70810020）

ジーシー　ツーピースティース

【形状・構造及び原理等】
本品はレジン臼歯であり、形状を以下に示す。

（形態及び寸法表）

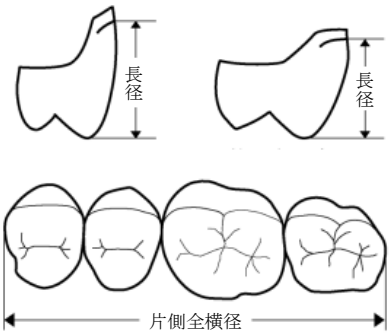

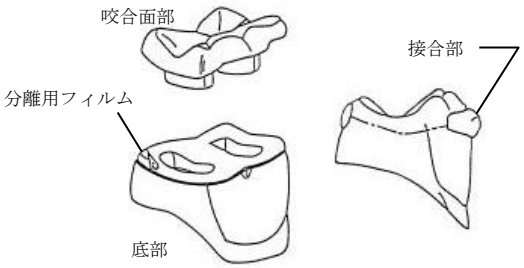

形態番号	片側全横径(㎜)		第１小臼歯長径(㎜)（カラー部を除く）	第１大臼歯長径(㎜)（カラー部を除く）
29	上顎	29.0	8.7	6.9
	下顎	31.0	8.4	7.0
31	上顎	31.0	9.2	7.4
	下顎	33.0	9.0	7.5
G28M	上顎	28.0	9.5	6.9
	下顎	30.0	9.2	6.9
G30M	上顎	30.0	10.2	7.4
	下顎	32.0	9.8	7.4
G32M	上顎	32.0	10.8	7.9
	下顎	34.0	10.5	7.8

上下顎用 16 歯１組

色調１種　　：Ａ３
形態（サイズ）５種　：29、31、G28M、G30M、G32M

主成分：ポリメタクリル酸メチル

原理　：鋳造により咬合面部を歯科用金属に置換することにより、高精度で適合の良い咬合面臼歯を作製する。

【使用目的又は効果】
鋳造により咬合面部を歯科用金属に置換できる義歯用人工歯である。

［使用目的又は効果に関連する使用上の注意］
１）アクリリック樹脂以外の床用樹脂を用いて義歯を作製する場合は、本品に接着しないので、床用樹脂メーカーの指定の方法に従って前処理をすること。また、120 ℃以上の環境に長時間置くと、変形する恐れがあるので注意すること。さらに、成形方法（例えば、200 ℃で 20分係留など）によって強度が低下し、破折することもあるので注意すること。

【使用方法等】
１）通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用します。
２）２週間から１ヶ月間、患者の口腔内で装着し、咀嚼させます。
３）咬合面部がわずかに咬耗して、患者の口腔内で最も安定な咬合状態になったとき、本品の接合部を削除し、分離用フィルムをはがして咬合面部を取り出します。
４）通法に従って、咬合面部を埋没鋳造により歯科用金属に置換し、研磨後、底部に接着します。

［使用方法等に関連する使用上の注意］
１）形態修正を行った場合は、その部分を充分に研磨すること。
２）口腔内において、色素沈着（煙草のヤニなど）により着色した場合は、みがき砂をつけ硬毛ブラシを用いて研磨して除去し、亜鉛華（酸化亜鉛）をつけ、軟毛ブラシを用いて艶出し研磨すること。
３）本品の表面には凸凹が付与されているため、プラークや煙草のヤニが付着することがあるので、義歯用ブラシなどを用いてよく清掃するように、患者に指導すること。
４）シアノアクリレート系の瞬間接着材を用いて本品を仮固定すると、重合後開リン時に本品が割れる事があるので、シアノアクリレート系の瞬間接着材は用いないこと。

【使用上の注意】
１）重要な基本的注意
①メタクリレート系モノマー又はポリマーに対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
④本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
⑤本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
⑥他の製品と混用しないこと。
⑦本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑧本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑨本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）**

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】＊
製造販売元　：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元　　：株式会社ジーシー
住所　　：〒113-0033

1420048
1705410AW

東京都文京区本郷３丁目２番 14 号
電話番号　　：（お客様窓口）0120-416480