**2024 年 06 月　第 5 版
*2023 年 05 月　第 4 版

承認番号：21700BZZ00147000


歯科材料　０３　義歯床材料
管理医療機器　義歯床用レジン関連材料（70827000）

ジーシー　アクロンネームプレート

【禁忌・禁止】
メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】
形状：レジンプレート（構造を図―１、寸法表を表―１に示す）
色調：クリアー、クリアーピンク

［図―１］

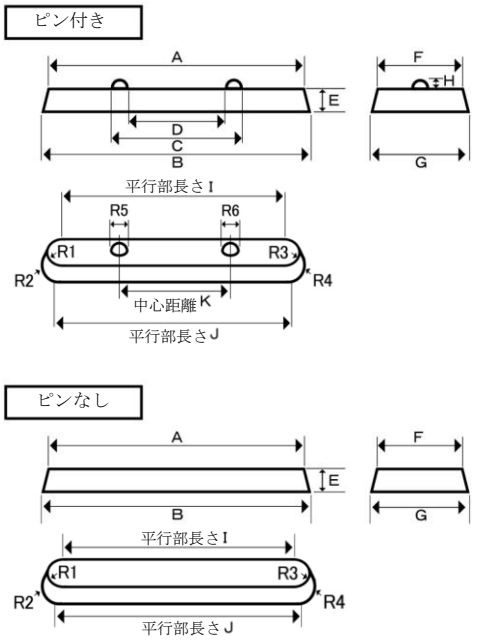

［表―１］

	維持ピン付き			維持ピンなし		
	大	中	小	大	中	小
A	22.5	21.5	17.5	22.5	21.5	17.5
B	23.5	22.5	18.5	23.5	22.5	18.5
C	11.0	11.0	11.0	—	—	—
D	9.0	9.0	9.0	—	—	—
E	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
F	7.5	5.0	4.5	7.5	5.0	4.5
G	8.5	6.0	5.5	8.5	6.0	5.5
H	1.0	1.0	1.0	—	—	—
I	15.0	16.5	13.0	15.0	16.5	13.0
J	15.0	16.5	13.0	15.0	16.5	13.0
K	10.0	10.0	10.0	—	—	—
R1	φ7.5	φ5.0	φ4.5	φ7.5	φ5.0	φ4.5
R2	φ8.5	φ6.0	φ5.5	φ8.5	φ6.0	φ5.5
R3	φ7.5	φ5.0	φ4.5	φ7.5	φ5.0	φ4.5
R4	φ8.5	φ6.0	φ5.5	φ8.5	φ6.0	φ5.5
R5	2.0	2.0	2.0	—	—	—
R6	2.0	2.0	2.0	—	—	—


(mm)

材質：ポリメタクリル酸メチル


【使用目的又は効果】
本品に名前等を刻印して義歯に埋め込むことにより、義歯の持主を識別する。

【使用方法等】
アクロンネームプレートへの文字の転記
（維持ピン付・維持ピンなし 共通）

１）アクロンネームプレートのサイズ・色調を選択します。新義歯作製と同時にネームプレートを埋入する場合は「維持ピン付」を、既製義歯に追加埋入する場合は「維持ピンなし」のアクロンネームプレートを使用します。

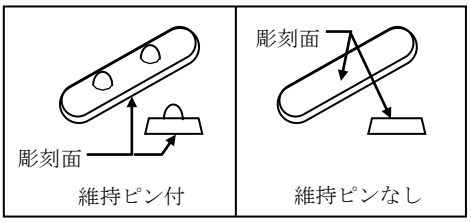

２）透明のシート（ラベルワープロやセロハンテープなど）に転記する文字を記入します。維持ピンなしのネームプレートの場合は、プレートの裏面（横幅の長い側）に直接文字を書きこんでも結構です。
３）透明のシートを裏返し、その上にアクロンネームプレートを乗せます（アクロンネームプレートから透けて見える文字は反転しています）。歯科用研削材などを用いて反転した文字をアクロンネームプレートの裏面（ピン付：維持ピンのない側、ピンなし：横幅の短い面）に彫刻します。

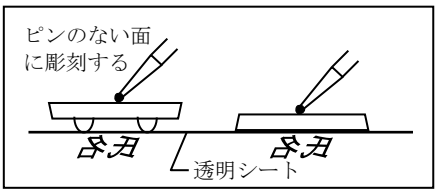

４）文字を彫刻した部分にジーシー　プロシモ　インテンシブカラーなどを用いて色づけをし、歯科重合用光照射機または歯科技工用重合装置を用いて硬化させます。文字から色がはみ出している場合は、研磨を行います。透明のシートをはがす（アクロンネームプレートに直接文字を書き込んだ場合は文字を消す）と、文字が転記されたアクロンネームプレートが完成します。*

新義歯への埋入
１）文字の転記が完了したアクロンネームプレート（維持ピン付）を用意します。
２）通法に従いロウ義歯を作製した後、用意したアクロンネームプレートと同じサイズのダミープレートをロウ義歯に埋入します。ダミープレートは維持ピンが外側に出るように埋入してください。埋入位置は「審美性」「床の厚み」などを考慮して決定します。粘膜面には設定しないでください。
３）

通法に従い埋没・流ロウを行い、埋没材からダミープレートを撤去後、レジン分離材（ジーシー　アクロセップなど）を塗布します。その後、文字が表示されたアクロンネームプレートと置き換えます。この際、義歯床とプレートの接着を確実にする為、アクロンネームプレートにジーシー　レジンプライマーを塗布してください。また、アクロンネームプレートは瞬間接着剤などで埋没材に固定してください。
4）通法に従いアクリリック系床用レジン（ジーシー　アクロンなど）を填入し、重合させます。
5）掘り出し後は維持ピン部分を含めて削合・研磨し、義歯を完成させます。

既製義歯への埋入
1）文字の転記が完了したアクロンネームプレート（維持ピンなし）を用意します。
2）義歯のネームプレート埋入部分を、アクロンネームプレートの大きさに合わせて削合します。埋入位置は「審美性」「床の厚み」などを考慮して決定します。粘膜面には設定しないでください。
3）義歯床とアクロンネームプレートの接着を確実にする為、アクロンネームプレートと義歯削合部にジーシー　レジンプライマーを塗布します。次に義歯削合部にジーシー　ユニファストⅢを盛り、アクロンネームプレートを埋入します。
4）余剰部分の研磨を行い、義歯を完成させます。

[使用方法等に関連する使用上の注意]
1）接着部位からの辺縁漏洩を防ぐため、アクロンネームプレート及び義歯床埋入部にはジーシー　レジンプライマーを必ず塗布すること。
2）ポリカーボネート樹脂、ポリスルフォン樹脂、ポリエーテルスルフォン樹脂製義歯床に対しては、接着力が劣るので使用しないこと。
3）既製義歯へネームプレートを埋入する際には、接着性や耐変色性に優れたジーシー　ユニファストⅢを使用すること。

【使用上の注意】
1）使用注意
①本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
②本品は、【使用目的、効能又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
④本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）**

2）重要な基本的注意
①メタクリレート系ポリマー、メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
②本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
③本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】
[保管方法]
1）直射日光の当たらない場所に保管する。
2）本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*
製造販売元　：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ
主たる設計元：株式会社ジーシー

発売元　　：株式会社ジーシー
住所　　：〒113-0033
　　東京都文京区本郷３丁目２番 14 号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480