＊ 2024 年 06 月　第 3 版
2017 年 03 月　第 2 版（新記載要領に基づく改訂）


認証番号：220AABZX00178000

歯科材料　０２　歯冠材料
管理医療機器　陶歯（38644000）

ジーシー　リブデントポーセレン

【形状・構造及び原理等】
本品は陶歯であり、形状を以下に示す。

［上 顎］

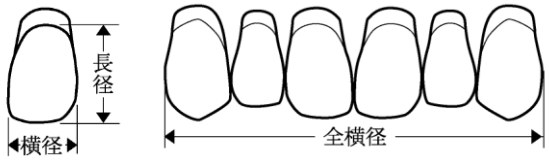

［上 顎］
※中切歯長径（㎜）はカラー部を除く

	形態番号	全横径(㎜)	中切歯横径(㎜)	中切歯長径(㎜)
尖形	Ｔ３	42.0	7.5	9.3
	Ｔ４	44.5	8.0	10.2
	Ｔ５	47.0	8.5	11.0
	Ｔ６	50.5	9.0	12.0
卵円形	Ｏ３	40.0	7.5	9.5
	Ｏ４	43.0	8.0	10.0
	Ｏ５	46.0	8.5	10.8
	Ｏ６	48.0	9.0	11.2
方形	Ｓ３	39.5	7.5	9.2
	Ｓ４	43.5	8.0	10.0
	Ｓ５	47.0	8.5	11.0
	Ｓ６	50.5	9.0	11.5
方尖形	ＴＳ３	40.5	7.5	10.0
	ＴＳ４	43.5	8.0	10.5
	ＴＳ５	46.0	8.5	11.2
尖卵円形	ＴＯ４	43.0	8.0	10.5
	ＴＯ５	46.0	8.5	11.0
	ＴＯ６	48.0	9.0	11.3
方卵円形	ＳＯ４	42.5	8.0	10.0
	ＳＯ５	45.5	8.5	10.8
	ＳＯ６	49.0	9.0	11.8
短方形	ＳＳ３	40.0	7.5	8.0
	ＳＳ４	43.0	8.0	8.5
	ＳＳ５	45.5	8.5	9.0
Ｖ型尖形	ＶＴ５	46.0	8.5	10.8
	ＶＴ６	49.0	9.0	12.0
Ｖ型方尖形	ＶＴＳ５	47.0	8.5	11.5
	ＶＴＳ６	50.0	9.0	12.0

［下 顎］
※中切歯長径（㎜）はカラー部を除く

	形態番号	全横径(㎜)	中切歯横径(㎜)	中切歯長径(㎜)
スタンダード	3	31.0	4.8	8.8
	4	34.0	5.2	9.5
	5	36.0	5.4	10.0
	6	38.0	5.6	10.5
ショート	13	30.5	4.7	7.5
	14	33.0	5.0	8.0
	15	35.0	5.3	8.3

色調（６色）：102、104、106、108、112、114

形態及びサイズ：
＜上顎＞
Ｔ３、Ｔ４、Ｔ５、Ｔ６
Ｏ３、Ｏ４、Ｏ５、Ｏ６
Ｓ３、Ｓ４、Ｓ５、Ｓ６
ＴＳ３、ＴＳ４、ＴＳ５
ＴＯ４、ＴＯ５、ＴＯ６
ＳＯ４、ＳＯ５、ＳＯ６
ＳＳ３、ＳＳ４、ＳＳ５
ＶＴ５、ＶＴ６
ＶＴＳ５、ＶＴＳ６
＜下顎＞
３、４、５、６
１３、１４、１５
６揃＝１個

主成分：長石

原理：
・ポーセレン製の既製人工歯であり、義歯に植立して義歯床を製作し使用する。

【使用目的又は効果】
本品は、義歯に植立するポーセレン（陶材）製の既製の前歯である。

【使用方法等】
１）通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用する。

［使用方法に関連する使用上の注意］
１）形態修正を行った場合は、その部分を充分に研磨すること。
２）本品の表面には凸凹が付与されているため、プラークや煙草のヤニが付着することがあるので、義歯用ブラシなどを用いてよく清掃するように、患者に指導すること。

【使用上の注意】
１）重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
④本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。
⑤他の製品と混用しないこと。
⑥本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑧本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）＊

【保管方法及び有効期間等】
［保管方法］
１）本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元 ：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元　　：株式会社ジーシー
住所　　：〒113-0033
　　東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480

170545AW