＊ 2024 年 06 月 第 3 版
2017 年 03 月 第 2 版（新記載要領に基づく改訂）


認証番号：221AABZX00052000

歯科材料　０２　歯冠材料
管理医療機器　陶歯（38644000）

ジーシー　リブデントＦＢ－３０ポーセレン１００

【形状・構造及び原理等】

本品は咬頭傾斜が約 30°のポーセレン臼歯であり、形状を以下に示す。

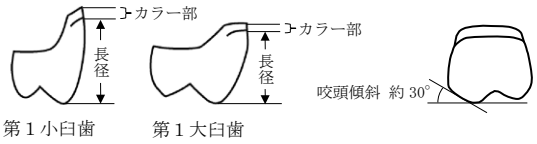

第１小臼歯　　第１大臼歯

(公差：±7%)

形態番号	片側全横径(㎜)		第１小臼歯長径(㎜)（カラー部を除く）	第１大臼歯長径(㎜)（カラー部を除く）
28M／30	上顎	28.0	8.0	6.7
	下顎	30.0	8.0	5.8
30M／32	上顎	30.0	9.0	7.2
	下顎	32.0	8.5	6.3
32M／34	上顎	32.0	9.7	7.8
	下顎	34.0	9.0	6.6

形態番号	片側全横径(㎜)		第１小臼歯長径(㎜)（カラー部を除く）	第１大臼歯長径(㎜)（カラー部を除く）
28Ｓ／30	上顎	28.0	8.0	5.5
	下顎	30.0	7.8	5.4
30Ｓ／32	上顎	30.0	8.6	6.0
	下顎	32.0	8.4	5.8
32Ｓ／34	上顎	32.0	9.3	6.5
	下顎	34.0	8.7	6.2

色調（４色）：104、108、112、114
形態（６種）：28M／30、30M／32、32M／34
28Ｓ／30、30Ｓ／32、32Ｓ／34
臼歯８揃＝１個

主成分：長石

原理
・ポーセレン製の既製人工歯であり、義歯に植立して義歯床を製作し使用する。

【使用目的又は効果】

本品は、義歯に植立するポーセレン（陶材）製の既製の臼歯である。

【使用方法等】

通常の義歯排列法により排列し、義歯床用合成樹脂と結合させて使用する。

［使用方法に関連する使用上の注意］
１）形態修正を行った場合は、その部分を充分に研磨すること。
２）本品の表面には凸凹が付与されているため、プラークや煙草のヤニが付着することがあるので、義歯用ブラシなどを用いてよく清掃するように、患者に指導すること。

【使用上の注意】

１）重要な基本的注意
①本品の使用により発疹などの過敏症状を起こした患者には、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けさせること。
②本品に対して、発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は、本品を使用しないこと。また、使用により過敏症状を起こしたときは、使用を中止し、すぐに医師の診断を受けること。
③本品の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
④本品の切削、研磨の際には、目の損傷を防ぐために保護めがねなどを使用すること。
⑤他の製品と混用しないこと。
⑥本品は、【使用目的又は効果】に記載の用途以外には使用しないこと。
⑦本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
⑧本品については、試験による MR 安全性評価を実施していない。（自己認証による）＊

【保管方法及び有効期間等】

［保管方法］
１）本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理する。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元　：株式会社ジーシーデンタルプロダクツ

発売元　：株式会社ジーシー
住所　：〒113-0033
東京都文京区本郷 3 丁目 2 番 14 号
電話番号　：（お客様窓口）0120-416480

170546AW