

機械器具 2.5 医療用鏡
 一般医療機器 双眼ルーペ 32692000

オラスコープティックルーペ


【禁忌・禁止】

視力障害を負うおそれがあるため、太陽や強力な光源（例えば、ルーペライトの光）を直視しないこと。


【形状・構造及び原理等】

[外観]

(TTL 3.0)

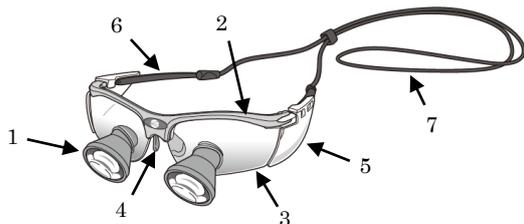

(TTL 2.5)

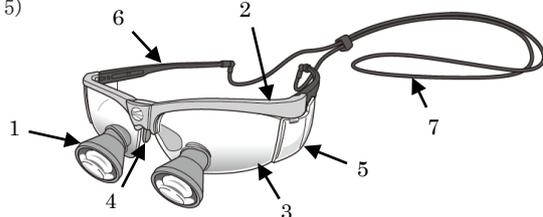

番号	名称
1	鏡筒
2	フレーム
3	キャリアレンズ
4	ノーズパッド
5	サイドシールド
6	テンプル
7	ヘッドストラップ

その他付属品が収納される。

[種類]

1) TTL 3.0

形名	色	瞳間距離	作業距離	
TTL3.0 BK-R-R	ブラック	レギュラー	レギュラー	
TTL3.0 BK-S-R			ショート	
TTL3.0 BK-L-R			ロング	
TTL3.0 BK-R-N		ナロー	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 BK-S-N				ショート
TTL3.0 BK-L-N				ロング
TTL3.0 BK-R-W		ホワイト	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 BK-S-W				ショート
TTL3.0 BK-L-W				ロング
TTL3.0 BL-R-R	ブルー	レギュラー	レギュラー	
TTL3.0 BL-S-R			ショート	
TTL3.0 BL-L-R			ロング	
TTL3.0 BL-R-N		ナロー	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 BL-S-N				ショート
TTL3.0 BL-L-N				ロング

TTL3.0 BL-R-W	ブルー	ホワイト	レギュラー	
TTL3.0 BL-S-W			ショート	
TTL3.0 BL-L-W			ロング	
TTL3.0 CB-R-R	カーボン	レギュラー	レギュラー	
TTL3.0 CB-S-R			ショート	
TTL3.0 CB-L-R			ロング	
TTL3.0 CB-R-N		ナロー	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 CB-S-N				ショート
TTL3.0 CB-L-N				ロング
TTL3.0 CB-R-W		ホワイト	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 CB-S-W				ショート
TTL3.0 CB-L-W				ロング
TTL3.0 ME-R-R	メルロー	レギュラー	レギュラー	
TTL3.0 ME-S-R			ショート	
TTL3.0 ME-L-R			ロング	
TTL3.0 ME-R-N		ナロー	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 ME-S-N				ショート
TTL3.0 ME-L-N				ロング
TTL3.0 ME-R-W		ホワイト	レギュラー	レギュラー
TTL3.0 ME-S-W				ショート
TTL3.0 ME-L-W				ロング

2) TTL 2.5

形名	色	瞳間距離	作業距離	
TTL2.5 BK-R-R	ブラック	レギュラー	レギュラー	
TTL2.5 BK-S-R			ショート	
TTL2.5 BK-L-R			ロング	
TTL2.5 BK-R-N		ナロー	レギュラー	レギュラー
TTL2.5 BK-S-N				ショート
TTL2.5 BK-L-N				ロング
TTL2.5 BK-R-W		ホワイト	レギュラー	レギュラー
TTL2.5 BK-S-W				ショート
TTL2.5 BK-L-W				ロング
TTL2.5 BL-R-R	ブルー	レギュラー	レギュラー	
TTL2.5 BL-S-R			ショート	
TTL2.5 BL-L-R			ロング	
TTL2.5 BL-R-N		ナロー	レギュラー	レギュラー
TTL2.5 BL-S-N				ショート
TTL2.5 BL-L-N				ロング
TTL2.5 BL-R-W		ホワイト	レギュラー	レギュラー
TTL2.5 BL-S-W				ショート
TTL2.5 BL-L-W				ロング
TTL2.5 CB-R-R	カーボン	レギュラー	レギュラー	
TTL2.5 CB-S-R			ショート	
TTL2.5 CB-L-R			ロング	

取扱説明書等を必ずご参照ください。

TTL2.5 CB-R-N	カーボン	ナロー	レキユア	
TTL2.5 CB-S-N			ショート	
TTL2.5 CB-L-N			ロング	
TTL2.5 CB-R-W		ワイド	レキユア	
TTL2.5 CB-S-W			ショート	
TTL2.5 CB-L-W			ロング	
TTL2.5 ME-R-R	メルロー	レキユア	レキユア	
TTL2.5 ME-S-R			ショート	
TTL2.5 ME-L-R			ロング	
TTL2.5 ME-R-N		ナロー	レキユア	
TTL2.5 ME-S-N			ショート	
TTL2.5 ME-L-N			ロング	
TTL2.5 ME-R-W		ワイド	レキユア	
TTL2.5 ME-S-W			ショート	
TTL2.5 ME-L-W			ロング	
TTL2.5 PP-R-R		ハーフ	レキユア	レキユア
TTL2.5 PP-S-R				ショート
TTL2.5 PP-L-R				ロング
TTL2.5 PP-R-N	ナロー		レキユア	
TTL2.5 PP-S-N			ショート	
TTL2.5 PP-L-N			ロング	
TTL2.5 PP-R-W	ワイド		レキユア	
TTL2.5 PP-S-W			ショート	
TTL2.5 PP-L-W			ロング	

	TTL3.0	TTL2.5
倍率	3.0倍	2.5倍
視野径	79mm	102mm
深度	190mm	152mm
質量	62g	53g

※視野径：作業距離によって変動する。

※質量：サイドシールド及びヘッドストラップを除く。

※上記は全て目安値となる。

【原理】

本器は、眼鏡レンズ部に装着したルーペを通して作業野を拡大して観察する。

【使用目的又は効果】

歯科手術、検査、処置及び歯科技工作業時に術者の小型望遠鏡として機能し、作業野の拡大像を得る。観察野に直接光を供給する外部光源と接続することもできる。

【使用方法等】

【使用方法】

詳細な操作方法や調節方法については、取扱説明書等を必ず参照してください。

- 1) ヘッドストラップのビーズを緩めます。
- 2) 本体を装着し、ビーズを適度に締めます。
- 3) 装着感を確認し、違和感がある場合は指でノーズパッドを調節します。

【使用上の注意】

【重要な基本的注意】

- 1) 取扱説明書を必ず参照すること。
- 2) 事前に本器を使用した立体視に充分慣れた上で使用すること。
- 3) 本器を装着後、視野の円が一つになっていることを確認した上で使用すること。
- 4) ルーペライトを使用するときは、推奨のものを使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 1) 直射日光や高温環境下で保管しないこと。
- 2) 歯科の従事者以外が触れないよう適切に保管・管理すること。
- 3) 本器を安全に保管するため、保管する際は専用の収納ケースに入れて保管すること。

【耐用期間】

納入後、正規の保守点検を行った場合に限り、5年とする。

〔自己認証（当社データ）による〕

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の保守・点検の項を必ずお読みください。

- 1) 取扱説明書の「保守点検」の項目を必ず参照すること。
- 2) レンズ表面部は、レンズクロスで清拭すること。

【保守点検上の注意事項】

本器を流水で洗浄しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者 株式会社 松風
住所 〒605-0983
京都市東山区福稲上高松町 11
電話番号 (お客様サポート窓口) 075-778-5482