INS-TH10A-H

**2017 年 8 月改訂（第 8 版（新記載要領に基づく改訂））
*2011 年 1 月改訂（第 7 版）

医療機器届出番号：13B1X00204D00009

機械器具 58.整形用器具器械
一般医療機器　関節手術用器械（JMDN コード：70964001）

デュラロックカップ人工股関節システム用手術器械

【形状・構造及び原理等】

** 1．形状等

本品は、組み合わせにより同梱されない製品がある。同梱されている製品については、別途器械出荷リストを参照すること。

番号	品名	原材料
1	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸｶｯﾌﾟｲﾝﾊﾟｸﾀｰｽﾄﾚｰﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
2	ﾎﾟﾘﾗｲﾅｰ ｲﾝﾊﾟｸﾀｰ(28MM ﾎﾞｰﾙ付き)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
3	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾎﾟﾘﾗｲﾅｰ- ｴｸｽﾄﾗｸﾀｰ-	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
4	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｱﾗｲﾒﾝﾄｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
5	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 38MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
6	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 40MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
7	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 42MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
8	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 44MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
9	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 46MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
10	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 48MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
11	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 50MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
12	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 52MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
13	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 54MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
14	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 56MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
15	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 58MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
16	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 60MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
17	ﾌﾟｯｼｬｰ ﾎﾞｰﾙ 22.225MM	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
18	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 38OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
19	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 40OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
20	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 42OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
21	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 44OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
22	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID46OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
23	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID48OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
24	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID50OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
25	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID52OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
26	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID54OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
27	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID56OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
28	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID58OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
29	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID60OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
30	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 38OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
31	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 40OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
32	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 42OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
33	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ- 22ID 44OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
34	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID46OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
35	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID48OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
36	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID50OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
37	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID52OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
38	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID54OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
39	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID56OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
40	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID58OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
41	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID60OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
42	ﾌﾟｯｼｬｰﾎﾞｰﾙ (白) 28MM	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
43	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 46OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
44	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 48OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
45	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 50OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
46	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 52OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
47	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 54OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
48	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 56OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
49	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 58OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
50	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 60OD 0 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
51	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 46OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
52	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 48OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
53	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 50OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
54	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 52OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
55	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 54OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
56	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 56OD 10 ﾟ	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼

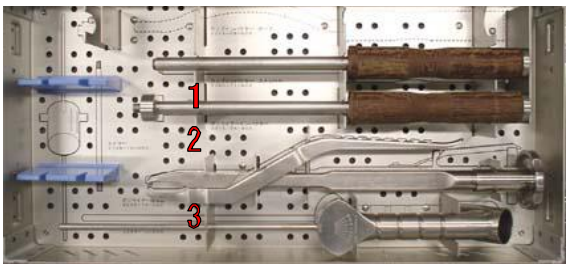
取扱説明書（手術手技書）を必ず参照して下さい

番号	品名	原材料
57	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 58OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
58	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 60OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
59	ﾌﾟｯｼｬｰﾎﾞｰﾙ 26MM	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
60	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 44OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
61	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 46OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
62	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 48OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
63	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 50OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
64	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 52OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
65	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 54OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
66	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 56OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
67	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 58OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
68	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 60OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
69	J-LOC ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 44OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
70	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 46OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ｽﾃﾝﾚｽ鋼
71	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 48OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
72	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 50OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
73	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 52OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
74	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 54OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
75	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 56OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
76	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 58OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
77	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 60OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
78	ｸﾞﾚｰﾀｰｼｬﾌﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
79	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 36MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
80	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 38MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
81	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 40MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
82	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 41MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
83	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 42MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
84	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 43MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
85	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 44MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
86	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 45MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
87	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 46MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
88	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 47MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
89	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 48MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
90	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 49MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
91	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 50MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
92	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 51MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
93	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 52MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
94	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 53MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
95	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 54MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
96	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 55MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
97	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 56MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
98	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 57MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
99	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 58MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼

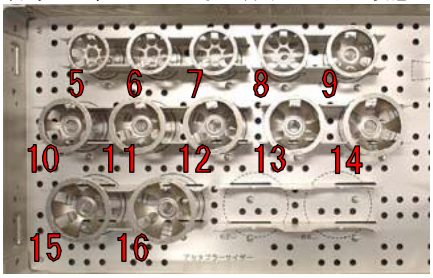
番号	品名	原材料
100	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 59MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
101	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 60MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
102	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
103	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 36MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
104	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 37MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
105	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 38MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
106	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 39MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
107	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 40MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
108	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 41MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
109	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 42MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
110	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 43MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
111	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 44MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
112	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 45MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
113	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 46MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
114	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 47MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
115	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 48MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
116	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 49MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
117	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 50MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
118	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 51MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
119	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 52MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
120	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 53MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
121	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 54MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
122	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 55MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
123	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 56MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
124	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 57MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
125	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 58MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
126	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 59MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
127	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 60MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
128	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 61MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
129	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 62MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
130	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 63MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
131	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 64MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
132	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 65MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
133	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 66MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
134	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 67MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
135	ｸﾞﾚｰﾀｰ ﾍｯﾄﾞ 68MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
136	ﾗﾁｪｯﾄ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
137	ｽｸﾘｭｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ﾌｫｰｾﾌﾟｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
138	T ﾊﾝﾄﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
139	3.8MM ﾄﾞﾘﾙ先(25MM)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
140	3.8MM ﾄﾞﾘﾙ先(40MM)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
141	3.8MM ﾄﾞﾘﾙ先(50MM)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
142	3.8MM ﾄﾞﾘﾙ先(70MM)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
143	3.8MM 用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
144	ﾄﾞﾘﾙｼｬﾌﾄ/ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
145	ﾄﾞﾘﾙｼｬﾌﾄ/ﾘｼﾞｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼

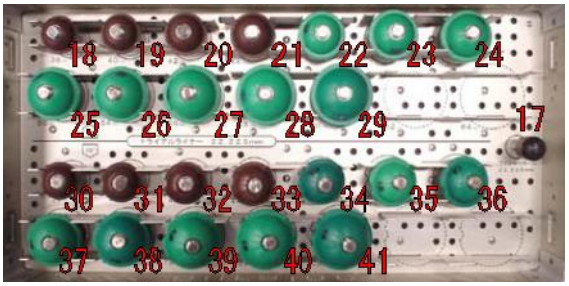
番号	品名	原材料
146	45゜ ｱﾝｸﾞﾙﾄﾞﾘﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
147	ﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞ 4.5MM - 6.5MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
148	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾃﾞﾌﾟｽｹﾞｰｼﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
149	ﾍｯｸｽ ﾍｯﾄﾞ ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/ ﾘｼﾞｯﾄﾞﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
150	ﾍｯｸｽ ﾍｯﾄﾞ ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/ ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
151	ﾍｯｸｽ ﾍｯﾄﾞ ｽｸﾘｭｰﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ/ ｶｰﾀﾞﾝﾀｲﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
152	ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ用ﾊﾝﾄﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
153	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ｶｯﾌﾟ ﾍﾟｸﾞ用ﾄﾞﾘﾙ/ 46-54 OD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
154	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ｶｯﾌﾟ ﾍﾟｸﾞ用ﾄﾞﾘﾙ/ 56-70 OD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
155	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 46MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
156	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 48MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
157	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 50MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
158	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 52MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
159	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 54MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
160	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 56MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
161	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 58MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
162	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 60MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
163	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 62MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
164	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰｶｯﾌﾟ用ﾄﾞﾘﾙｶﾞｲﾄﾞ 64MMOD 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
165	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ｶｯﾌﾟｲﾝﾊﾟｸﾀｰ ｶｰﾌﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
166	ﾍｯﾄﾞ ﾘﾑｰﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
167	ｴｲﾏｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
168	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 62MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
169	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｻﾞｰ 64MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
170	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID62OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
171	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID64OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
172	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID62OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
173	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾁｬﾝﾚｰﾎﾞｱﾄﾗｲｱﾙ ﾗｲﾅｰ 22ID64OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
174	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 62OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
175	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 64OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
176	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 62OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
177	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅｰ 28ID 64OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ/ ｽﾃﾝﾚｽ鋼
178	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 62OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
179	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 64OD 0゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
180	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 62OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

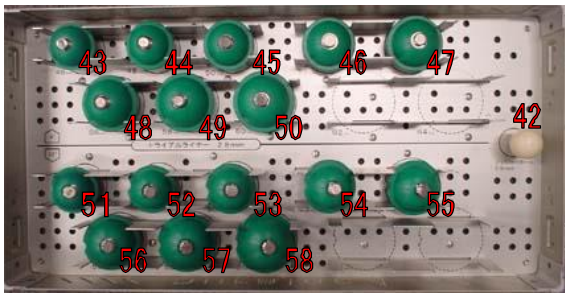
番号	品名	原材料
181	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙﾗｲﾅ- 26ID 64OD 10゜	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
182	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 61MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
183	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 62MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
184	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 63MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
185	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 64MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
186	ｱｾﾀﾌﾞﾗｰ ｸﾞﾚｰﾀｰ 65MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
187	ｼﾞﾝﾏｰﾊﾄﾞｿﾝｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
188	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 47MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
189	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 49MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
190	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 51MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
191	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 53MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
192	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 55MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
193	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 57MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
194	ﾃﾞｭﾗﾛｯｸ ﾄﾗｲｱﾙｻｲｻﾞｰ 59MM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼

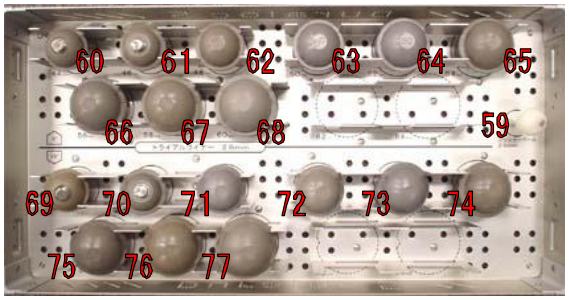


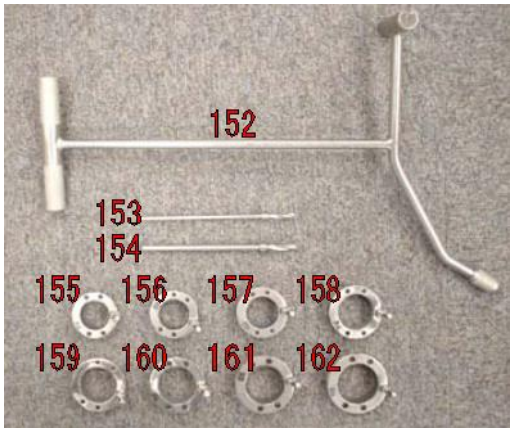
※上記番号 2 は、ボールを取り付けていない状態を示す。

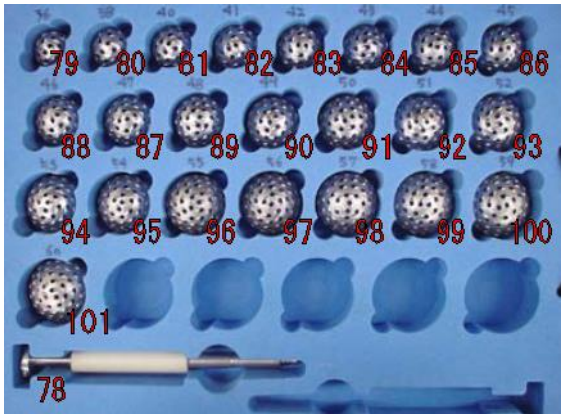







60 61 62 63 64 65
66 67 68 59
69 70 71 72 73 74
75 76 77

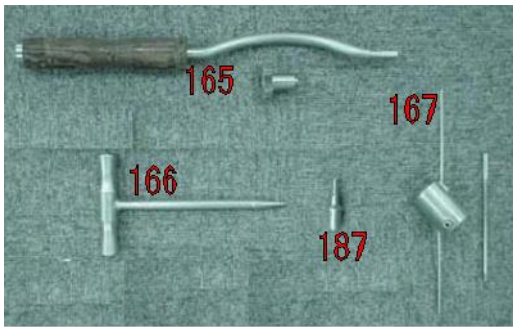

152
153
154
155 156 157 158
159 160 161 162

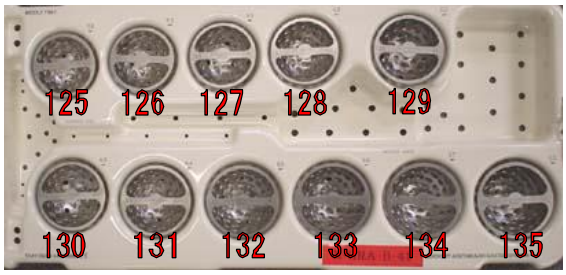

79 80 81 82 83 84 85 86
88 87 89 90 91 92 93
94 95 96 97 98 99 100
101
78

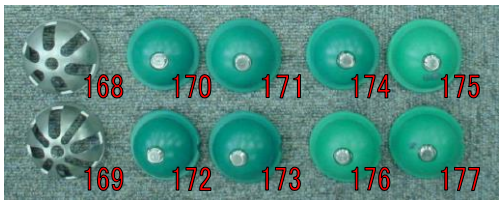

163 164

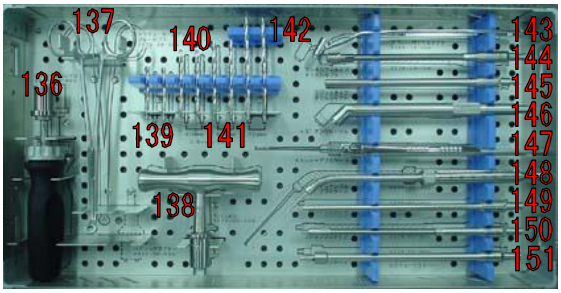

178 179
180 181

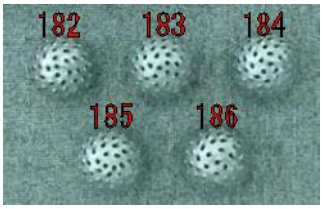

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
115 116
102
113 114
117 118 119 120 121 122 123 124

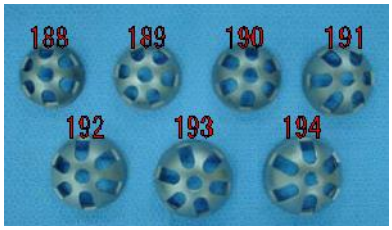

165
167
166
187


125 126 127 128 129
130 131 132 133 134 135


168 170 171 174 175
169 172 173 176 177


137
140
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
136
139 141
138


182 183 184
185 186


188 189 190 191
192 193 194

２．原理
人工股関節に適合した手術器械を使用することにより埋め込み部位の適切なサイズの決定及び適切な寸法の形成を行うことができる。

【使用目的又は効果】

１．使用目的
本品は再使用可能な、手動式の手術器械であり、人工関節置換術等の関節手術を行うために用いる。

２．適応症例
股関節の機能再建を目的として、以下の症状のある患者に人工股関節を埋植するために使用する。
（１）変形性関節症、関節リウマチ、外傷、または先天性股関節形成不全に起因する股関節の重度の疼痛や関節機能障害
（２）大腿骨頭部の阻血性壊死
（３）内固定では適切な整復治療ができない大腿骨頭部または頸部の急性外傷性骨折
（４）関節再建術、内固定術、関節固定術、人工骨頭挿入術、関節表面置換術や人工股関節置換術などの前手術の失敗
（５）関節強直

【使用方法等】

本品は未滅菌であるので、使用前に滅菌する。
１．滅菌方法
本品は医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。（以下、条件の例）
高圧蒸気滅菌の場合
サイクル：前真空
温度：132℃
暴露時間：6 分

２．使用方法
本品は人工関節置換術等の関節手術を行うための手動式の手術器械であり、人工股関節の埋植を適切な位置に行うために本品を用いる。

** ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
（１）滅菌前に、全ての器械に損傷、変形等の異常がないか点検すること。
（２）使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
（３）破損・変形等の原因となるおそれがあるので、使用時に必要以上の力（応力）を加えないこと。
（４）アセタブラーグレーター、グレーターヘッド及びアセタブラーヘッド使用時には他器械（例えばレトラクタ-等）と接触しないように注意すること。
（５）使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、できるだけ早く汚染物を除去し、感染予防のために洗浄・消毒すること。

【使用上の注意】

** １．重要な基本的注意
（１）損傷･変形等がある器械は識別した上で返却すること。
（２）滅菌は、正しく整備、校正及びバリデーションされた滅菌器を使用して、滅菌すること。
（３）塩素系、ヨウ素系及び強アルカリ/強酸性の洗剤・消毒剤は、腐食の原因になるため、できるだけ使用を避けること。
（４）金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
（５）電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、熱傷の危険性があり、また、器械の表面を損傷する可能性があるので、本品とともに電気メスを使用する際は注意すること。
（６）本品がクロイツフェルト･ヤコブ病患者への使用及びその感染が疑われる場合には、弊社にご連絡ください。

２．不具合・有害事象
（１）重大な不具合
破損・変形・摩耗等の不具合が現れた場合は使用を中止し、 適切な処置を行うこと。
（２）重大な有害事象
１） 感染
２） 塞栓（脂肪、血液等）
３） 骨折
４） 体内遺残
５） 過敏症
（３）その他の有害事象
軟部組織（筋・靭帯・腱・血管・神経）の損傷

３．高齢者への適用
高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後にゆるみ等が起きる可能性が高いので、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：室温保存

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞
（１）マイクロサージカル用インストルメントは他のインストルメントと分けて洗浄すること。
（２）使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを点検すること。
（３）洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
（４）汚れた器械は 5 分間洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい個所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
（５）壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないように、ブラシ等で洗浄すること。器械にスライド機構やヒンジがある場合は、その部分を動かして残った血液や異物等を取り除くこと。また、管状形状の器械は、柔らかいナイロンブラシまたはパイプクリーナーを使用し、その後異物等を取り除くこと。ブラシが届かない管内部は洗浄器を使って酵素洗浄液をかけて洗浄すること。
（６）汚れを落とした後、超音波洗浄により中性洗剤を用い、10 分間洗浄すること。また、その際、刃先等の鋭利部同士が接触して損傷しないようにすること。また、ラチェット部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
（７）器械は温精製水（ろ過、蒸留、脱イオン化等）で表面の汚れを完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら汚れを洗い流すこと。
（８）最終洗浄後は、直ちに乾燥すること。できるだけフィルターを通した圧縮空気で内部を乾燥すること。
（９）できるだけ可動部に水溶性潤滑剤を使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
URL：depuysynthes.jp

製造業者:
・デピュー・インターナショナル社
（DePuy International Ltd）英国
・デピュー・オーソペディックス社
（DePuy Orthopaedics, Inc）米国

©J&J KK