INS-TK01C-F

**2017 年 8 月改訂（第 6 版（新記載要領に基づく改訂））
*2011 年 5 月改訂（第 5 版）

医療機器届出番号：13B1X00204D00022

機械器具 58. 整形用器具器械
一般医療機器　関節手術用器械（JMDN ｺｰﾄﾞ：70964001）

P.F.C.シグマ人工膝関節システム用手術器械(オプション)

【形状・構造及び原理等】

** 1．形状等

本品は、組み合わせにより同梱されない製品がある。同梱されている製品については、別途器械出荷リストを参照すること。

番号	品名	原材料
1	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ 4mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
2	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ 8mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
3	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ 12mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
4	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ ｽﾍﾟｰｻｰ 16mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
5	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
6	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
7	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
8	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
9	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
10	SP2 ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 0mm ｵﾌｾｯﾄ 5 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
11	SP2 ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ +2/-2mm ｵﾌｾｯﾄ 5 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
12	SP2 ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 0mm ｵﾌｾｯﾄ 7 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
13	SP2 ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ +2/-2mm ｵﾌｾｯﾄ 7 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
14	SP2 ﾃﾞｨｽﾀﾙ ﾌｪﾓﾗﾙ ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
15	ｽﾀｲﾏﾝﾋﾟﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
16	SP2 ｽﾀｲﾗｽ 0-10mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
17	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ﾘﾑｰﾊﾞﾌﾞﾙ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
18	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
19	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｹｰﾃｨﾝｸﾞ ﾃﾞﾊﾞｲｽ ｱｳﾄﾘｶﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
20	SP2 IM ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 5 度 +2L/2R	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
21	SP2 IM ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 5 度 0 ｵﾌｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
22	SP2 IM ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 5 度 +2R/2L	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
23	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13mm 5 度 +2L/2R	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
24	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13mm 5 度 0 ｵﾌｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
25	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13mm 5 度 +2R/2L	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
26	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 15mm 5 度 +2L/2R	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
27	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 15mm 5 度 0 ｵﾌｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
28	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 15mm 5 度 +2R/2L	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
29	SP2 IM ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 7 度 +2L/2R	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
30	SP2 IM ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 7 度 0 ｵﾌｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
31	SP2 IM ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 7 度 +2R/2L	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
32	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13mm 7 度 +2L/2R	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
33	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13mm 7 度 0 ｵﾌｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
34	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 13mm 7 度 +2R/2L	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
35	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 15mm 7 度 +2L/2R	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
36	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 15mm 7 度 0 ｵﾌｾｯﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
37	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ 15mm 7 度 +2R/2L	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
38	PFC ｼｸﾞﾏ C/S(PS) ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
39	PFC ｼｸﾞﾏ C/S(PS) ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
40	PFC ｼｸﾞﾏ C/S(PS) ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
41	PFC ｼｸﾞﾏ C/S(PS) ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
42	PFC ｼｸﾞﾏ C/S(PS) ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
43	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
44	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
45	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
46	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
47	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
48	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
49	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
50	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
51	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
52	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

取扱説明書（手術手技書）を必ず参照して下さい

番号	品名	原材料
53	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽ ﾄﾗｲｱﾙ ｽｸﾘｭｰ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
54	ﾌｪﾓﾗﾙ ｵｰｸﾞﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｸﾞ ﾌﾟｰﾗｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
55	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
56	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
57	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
58	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 12mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
59	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
60	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
61	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
62	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
63	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 12mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
64	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 16mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
65	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
66	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
67	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
68	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
69	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 12mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
70	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 16mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
71	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
72	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
73	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
74	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
75	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 12mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
76	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 16mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
77	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
78	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
79	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
80	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱｰ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
81	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 12mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
82	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 16mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ

番号	品名	原材料
83	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾄﾙｸ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
84	SP2 ﾄﾙｸ ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ ﾊﾝﾄﾞﾙ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
85	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
86	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 20 度 ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
87	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 10mm ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
88	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 15mm ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
89	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
90	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 15 度 ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
91	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾄﾗｲｱﾙ ﾍﾐ 10 度 ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
92	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾄﾗｲｱﾙ ﾍﾐ 20 度 ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
93	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 10mm ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
94	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 15mm ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
95	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
96	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 15 度 ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
97	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
98	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 20 度 ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
99	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 10mm ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
100	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 15mm ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
101	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
102	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 15 度 ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
103	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
104	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 20 度 ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
105	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 10mm ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
106	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 15mm ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
107	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
108	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 15 度 ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
109	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
110	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 20 度 ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
111	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 10mm ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
112	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 15mm ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

番号	品名	原材料
113	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ フル トライアル 10度 ｻｲｽﾞ4	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
114	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ フル トライアル 15度 ｻｲｽﾞ4	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
115	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰ ﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｳｪｯｼﾞ トライアル スクリュードライバー	ステンレス鋼
116	SP2 IM ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｱﾗｲﾒﾝﾄ ﾃﾞﾊﾞｲｽ	ステンレス鋼 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
117	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル ｻｲｽﾞ 1.5	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
118	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル ｻｲｽﾞ 2	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
119	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル ｻｲｽﾞ 2.5	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
120	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル ｻｲｽﾞ 3	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
121	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル ｻｲｽﾞ 4	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
122	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾞｯｸｽﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ5	ステンレス鋼
123	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル W/ｽﾃﾑ ｱﾝﾁﾛｰﾃｰｼｮﾝ ﾌｨﾝ	ステンレス鋼
124	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル W/ｽﾃﾑ ｻｲｽﾞ 1.5	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
125	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル W/ｽﾃﾑ ｻｲｽﾞ 2	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
126	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル W/ｽﾃﾑ ｻｲｽﾞ 2.5	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
127	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル W/ｽﾃﾑ ｻｲｽﾞ 3	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
128	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル W/ｽﾃﾑ ｻｲｽﾞ 4	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
129	SP2 フル ウェッジ カッティング ブロック 10度 LL/RM	ステンレス鋼
130	SP2 フル ウェッジ カッティング ブロック 15度 LL/RM	ステンレス鋼
131	SP2 フル ウェッジ カッティング ブロック 10度 LM/RL	ステンレス鋼
132	SP2 フル ウェッジ カッティング ブロック 15度 LM/RL	ステンレス鋼
133	SP2 ヘミ ウェッジ カッティング ブロック	ステンレス鋼
134	SP2 ｽﾃｯﾌﾟ ｳｪｯｼﾞ ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｸ	ステンレス鋼
135	SP2 ｽﾛｯﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｸ 3°	ステンレス鋼
136	SP2 ｽﾛｯﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｶｯﾃｨﾝｸﾞ ﾌﾞﾛｯｸ 5°	ステンレス鋼
137	SP2 トレー トライアル ウェッジカット アタッチメント	ステンレス鋼
138	SP2 フェモラル アライメント タワー	ステンレス鋼
139	SP2 脛骨ﾄﾚｰ トライアル アライメント ハンドル	ステンレス鋼
140	SP IM ﾛｯﾄﾞ 400mm	ステンレス鋼
141	SP2 IM ﾛｯﾄﾞ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ステンレス鋼
142	SP2 リーマー T-ハンドル	ステンレス鋼 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
143	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 10mm	ステンレス鋼
144	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 11mm	ステンレス鋼
145	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 12mm	ステンレス鋼
146	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 13mm	ステンレス鋼
147	SP ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ 12mm	ステンレス鋼

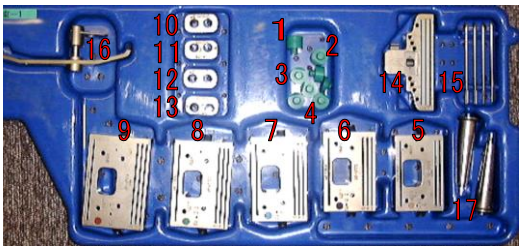
番号	品名	原材料
148	SP ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ 14mm	ステンレス鋼
149	SP IM ﾛｯﾄﾞ 200mm	ステンレス鋼
150	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 14mm	ステンレス鋼
151	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 15mm	ステンレス鋼
152	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 16mm	ステンレス鋼
153	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 17mm	ステンレス鋼
154	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ｽﾃﾑ ﾘｰﾏｰ 18mm	ステンレス鋼
155	SP ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ 16mm	ステンレス鋼
156	SP ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ 18mm	ステンレス鋼
157	SP ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ 15mm	ステンレス鋼
158	SP ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ 17mm	ステンレス鋼
159	ﾌｪﾓﾗﾙ ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ	ステンレス鋼
160	脛骨ﾄﾚｰ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ	ステンレス鋼
161	ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾓｼﾞｭﾗｰ ｽﾃﾑ ﾚﾝﾁ	ステンレス鋼
162	PFC ﾌｪﾓﾗﾙ ﾄﾗｲｱﾙ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ ﾚﾝﾁ	ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙｲﾐﾄﾞ
163	ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2/3 30mm	ステンレス鋼
164	ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2/3 60mm	ステンレス鋼
165	ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4/5/6 30mm	ステンレス鋼
166	ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4/5/6 60mm	ステンレス鋼
167	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ 13 X 90	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
168	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ 15 X 90	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
169	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ 13 X 130	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
170	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ 15 X 130	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
171	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 5度	ステンレス鋼
172	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ ｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ ｱｯｾﾝﾌﾞﾘｰ 7度	ステンレス鋼
173	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾎﾞﾙﾄ ﾄﾗｲｱﾙ	ステンレス鋼
174	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ (+1-)2mm ｵﾌｾｯﾄ BTR	ステンレス鋼
175	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾞﾘﾙ 13mm	ステンレス鋼
176	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ｽﾃﾑ ﾄﾞﾘﾙ 15mm	ステンレス鋼
177	SP2 ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ﾊﾟﾝﾁ 1.5-3 ｻｲｽﾞ 1 3X30	ステンレス鋼
178	SP2 ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ﾊﾟﾝﾁ 1.5-3 ｻｲｽﾞ 1 3X60	ステンレス鋼
179	SP2 ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ﾊﾟﾝﾁ ｻｲｽﾞ 4-6 15X30	ステンレス鋼
180	SP2 ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ｽﾃﾑ ﾊﾟﾝﾁ ｻｲｽﾞ 4-6 15X60	ステンレス鋼
181	P.F.C. ﾌﾟﾚｽﾌｨｯﾄ ﾛｯﾄﾞ ﾚﾝﾁ	ステンレス鋼
182	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 125 X 10	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
183	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 125 X 12	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
184	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 125 X 14	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
185	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 125 X 16	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
186	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 125 X 18	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

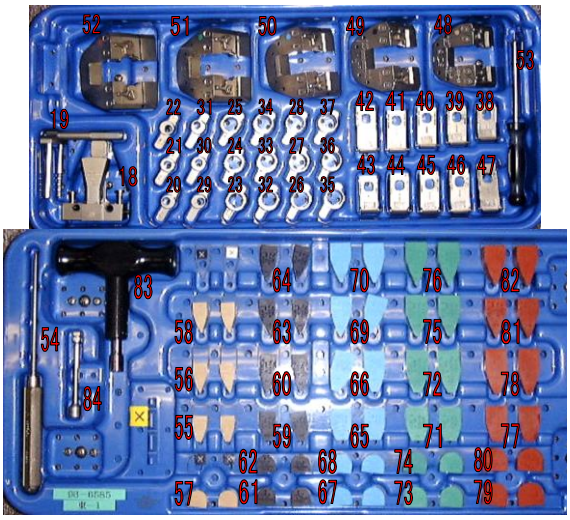
番号	品名	原材料
187	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 175 X 10	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
188	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 175 X 12	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
189	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 175 X 14	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
190	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 175 X 16	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
191	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 175 X 18	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
192	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 75 X 10	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
193	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 75 X 12	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
194	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 75 X 14	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
195	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 75 X 16	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
196	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 75 X 18	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
197	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 115 X 10	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
198	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 115 X 12	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
199	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 115 X 14	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
200	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 115 X 16	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
201	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 115 X 18	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
202	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 150 X 10	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
203	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 150 X 12	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
204	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 150 X 14	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
205	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 150 X 16	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
206	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾛｯﾄﾞ ﾄﾗｲｱﾙ 150 X 18	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
207	SP2 ｵﾌｾｯﾄ 脛骨ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｻｲｽﾞ 1.5-3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
208	SP2 ｵﾌｾｯﾄ 脛骨ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｻｲｽﾞ 4-5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
209	ｵﾌｾｯﾄ 脛骨ﾊﾟﾝﾁ ｶﾞｲﾄﾞ 1.5-3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
210	ｵﾌｾｯﾄ 脛骨ﾊﾟﾝﾁ ｶﾞｲﾄﾞ 4-5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
211	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ 脛骨ﾄﾞﾘﾙ ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ｻｲｽﾞ 1.5-3 13M	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
212	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ 脛骨ﾄﾞﾘﾙ ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ｻｲｽﾞ 4-6 15M	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
213	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ 脛骨ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ｻｲｽﾞ 1.5-3 13M	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
214	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ 脛骨ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ｻｲｽﾞ 4-6 15M	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
215	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ 脛骨 ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ﾊﾟﾝﾁ ｻｲｽﾞ 1.5-3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
216	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ 脛骨 ｾﾒﾝﾃｯﾄﾞ ﾊﾟﾝﾁ ｻｲｽﾞ 4-5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼

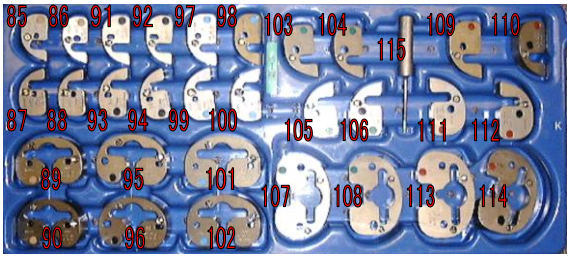
番号	品名	原材料
217	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄｰﾙ ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｻｲｽﾞ 1.5-3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
218	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄｰﾙ ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｻｲｽﾞ 4-5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
219	ｵﾌｾｯﾄ脛骨 ﾊﾟﾝﾁ ｶﾞｲﾄﾞ (ﾃﾞｭｱﾙ) ｻｲｽﾞ 1.5-3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
220	ｵﾌｾｯﾄ脛骨 ﾊﾟﾝﾁ ｶﾞｲﾄﾞ (ﾃﾞｭｱﾙ) ｻｲｽﾞ 4-5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
221	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ脛骨ﾄﾞﾘﾙ ｻｲｽﾞ 1.5-3 13mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
222	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ脛骨ﾄﾞﾘﾙ ｻｲｽﾞ 4-5 15mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
223	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ脛骨ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｻｲｽﾞ 1.5-3 13mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
224	SP2 ﾓｼﾞｭﾗｰ脛骨ﾄﾞﾘﾙ ﾌﾞｯｼﾝｸﾞ ｻｲｽﾞ 4-5 15mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
225	ﾓｼﾞｭﾗｰ脛骨ﾊﾟﾝﾁ ｻｲｽﾞ 1.5-3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
226	ﾓｼﾞｭﾗｰ脛骨ﾊﾟﾝﾁ ｻｲｽﾞ 4-5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
227	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 1.5 左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
228	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 2 左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
229	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 2.5 左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
230	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 3 左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
231	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 4 左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
232	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 1.5 右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
233	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 2 右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
234	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 2.5 右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
235	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 3 右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
236	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ付き ｻｲｽﾞ 4 右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
237	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ (ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ) ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
238	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ (ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ) ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
239	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ (ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ) ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
240	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ (ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ) ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
241	ｵﾌｾｯﾄ脛骨ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ (ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ) ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
242	ｵﾌｾｯﾄ ｽﾃﾑ ﾄﾗｲｱﾙ ﾘﾑｰﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
243	SP2 ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ ﾊﾝﾄﾞﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
244	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 脛骨ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 1.5 /10mm、12.5mm、15mm、17.5mm、20mm、22.5mm、25mm、30mm	ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ

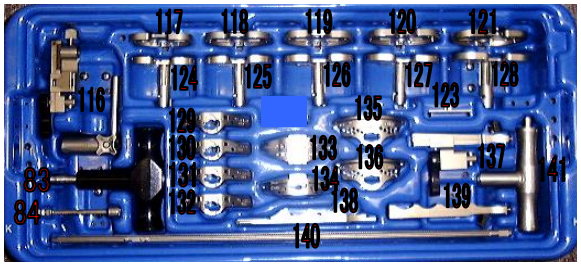
番号	品名	原材料
245	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 脛骨ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2 /10mm、12.5mm、15mm、17.5mm、 20mm、22.5mm、25mm、30mm	ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
246	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 脛骨ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 2.5 /10mm、12.5mm、15mm、17.5mm、 20mm、22.5mm、25mm、30mm	ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
247	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 脛骨ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 3 /10mm、12.5mm、15mm、17.5mm、 20mm、22.5mm、25mm、30mm	ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
248	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 脛骨ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 4 /10mm、12.5mm、15mm、17.5mm、 20mm、22.5mm、25mm、30mm	ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
249	SP2 左脛骨ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 0 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
250	SP2 左脛骨ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 3 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
251	SP2 左脛骨ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 5 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
252	SP2 右脛骨ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 0 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
253	SP2 右脛骨ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 3 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
254	SP2 右脛骨ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 5 度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
255	ﾁｬﾝﾌｧｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｻｲｽﾞ 1.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
256	ﾁｬﾝﾌｧｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
257	ﾁｬﾝﾌｧｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｻｲｽﾞ 2.5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
258	ﾁｬﾝﾌｧｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
259	ﾁｬﾝﾌｧｰｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
260	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
261	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙｳｪｯｼﾞ ﾍﾐ ﾄﾗｲｱﾙ 20 度 ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
262	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 10mm ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
263	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙｳｪｯｼﾞ ｽﾃｯﾌﾟ ﾄﾗｲｱﾙ 15mm ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
264	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 10 度 ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
265	PFC ﾓｼﾞｭﾗｰﾌﾟﾗｽ ﾃｨﾋﾞｱﾙｳｪｯｼﾞ ﾌﾙ ﾄﾗｲｱﾙ 15 度 ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
266	SP2 ﾃｨﾋﾞｱﾙ ﾄﾚｲ ﾄﾗｲｱﾙ W/ｽﾃﾑ ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
267	ｵﾌｾｯﾄ 脛骨 ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ 付き 左 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
268	ｵﾌｾｯﾄ 脛骨 ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ ｽﾃﾑ 付き 右 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
269	ｵﾌｾｯﾄ 脛骨 ﾄﾚｰ ﾄﾗｲｱﾙ (ｾﾒﾝﾄ ﾌﾟﾗｲﾏﾘｰ) 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
270	PFC ｼｸﾞﾏ TC3 脛骨 ｲﾝｻｰﾄ ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5 /10mm、12.5mm、15mm、17.5mm、20mm、 22.5mm、25mm、30mm	ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
271	SP2 ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ・ｽﾃﾑ・ﾘｰﾏｰ /19mm、20mm、21mm、22mm、23mm、 24mm、25mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
272	SPEC ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ ｽﾘｰﾌﾞ /20mm、22mm、24mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
273	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞﾌｪﾓﾗﾙﾛｯﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ /20X125mm、22X125mm、 20X175mm、 22X175mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
274	PFC ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞﾃｨﾋﾞｱﾙﾛｯﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ /20X75mm 、 22X75mm 、 24X75mm 、 20X115mm、 22X115mm、 24X115mm、 20X150mm、22X150mm、24X150mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
275	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ /4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5、 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
276	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 12mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ

番号	品名	原材料
277	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌﾙｰﾃｯﾄﾞ ﾛｯﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ /24X125mm、24X175mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
278	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ A/P & ﾁｬﾝﾌｧｰ ｶｯﾃｨﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
279	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙｽﾃﾑﾄﾞﾘﾙ ﾊﾄﾞｿﾝ /13mm、15mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
280	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾎﾟｽﾃﾘｱ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ /4mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5、 8mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
281	大腿骨 ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ ｸﾗﾝﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
282	PFC ｼｸﾞﾏ ﾌｪﾓﾗﾙ ﾃﾞｨｽﾀﾙ ｵｰｷﾞｭﾒﾝﾄ 16mm ﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 5	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
283	SP2 ﾌｪﾓﾗﾙ ﾘﾋﾞｼﾞｮﾝ AP ﾁｬﾝﾌｧｰ ｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ ｻｲｽﾞ 6	ｽﾃﾝﾚｽ鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ



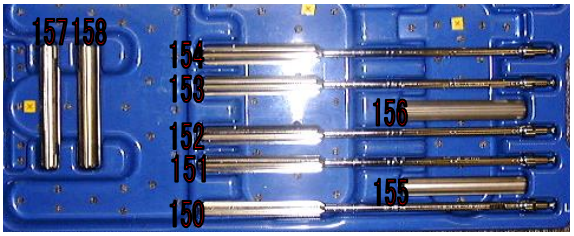


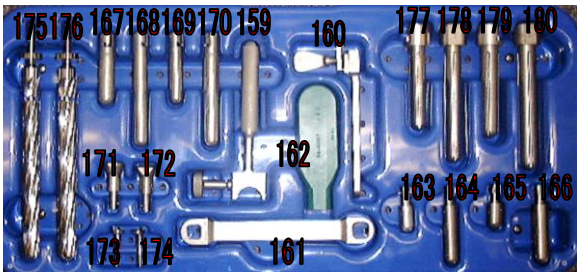


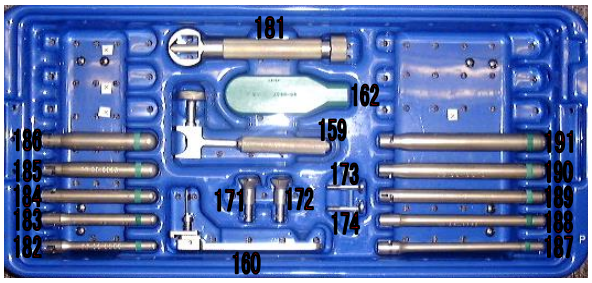

117 118 119 120 121
116 124 125 126 127 123 128
129 135
130 133 136 137
131 134 139
132 138
83 84 140 41

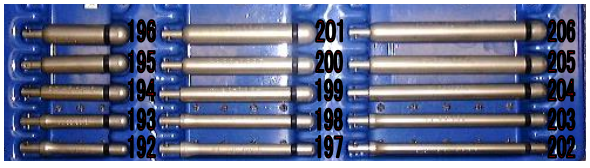

122

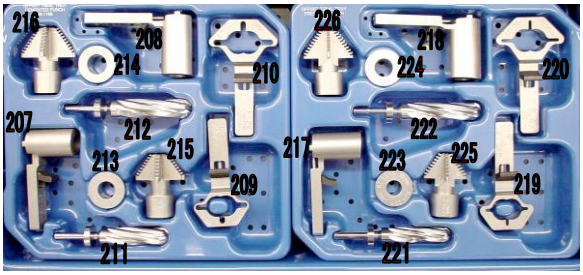

142
146 148
145
144 147
143
149
140

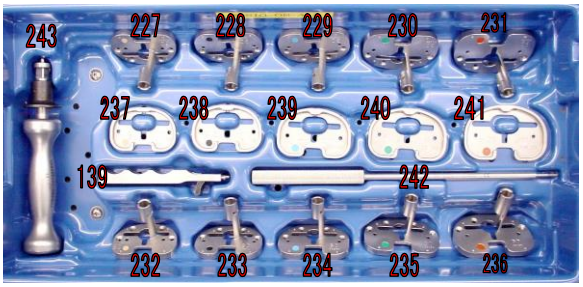

157 158
154
153
156
152
151
155
150


175 176 167 168 169 170 159
160
177 178 179 180
171 172
162
163 164 165 166
173 174
161

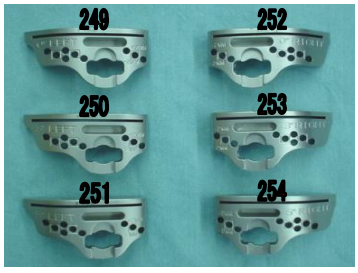

181
162
159
186 185 184 183 182
173
171 172
174
191 190 189 188 187
160

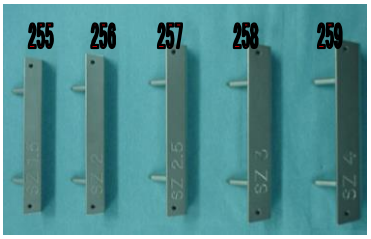

196 195 194 193 192
201 200 199 198 197
206 205 204 203 202


216 208 214 210
207 212 213 215 209
211
226 218 224 220
222 217 223 225 219
221


243
227 228 229 230 231
237 238 239 240 241
139 242
232 233 234 235 236


244 245 246 247 248


249 252
250 253
251 254


255 256 257 258 259


260 261 262 263


264 265


266


267 268


269


270


271



２．原理
本品の使用により、埋め込み部位の適切なサイズの決定及び適切な寸法の形成を行うことができる。

【使用目的又は効果】
本品は再使用可能な、手動式の手術器械であり、人工膝関節置換術等の関節手術を行うために用いる。

【使用方法等】
本品は未滅菌であるので、使用前に滅菌すること。
１．滅菌方法
本品は医療機関内において 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。（以下、条件の例）
高圧蒸気滅菌の場合
サイクル：前真空
温度、暴露時間：115～118℃、30 分
121～124℃、15 分
126～129℃、10 分
２．使用方法
本品は人工膝関節置換術等の関節手術を行うための手動式の手術器械であり、人工膝関節の埋植を適切な位置に行うために本品を用いる。

** ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
（１）滅菌前に、全ての器械に損傷、変形等の異常がないか点検すること。
（２）使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
（３）折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に、必要以上の力（応力）を加えないこと。
（４）使用後は、付着した血液、体液、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、できるだけ早く汚染物を除去し、感染予防のために洗浄・消毒すること。

【使用上の注意】
** １．重要な基本的注意
（１）損傷・変形等がある器械は識別した上で返却すること。
（２）滅菌は、正しく整備、校正及びバリデーションされた滅菌器を使用して、滅菌すること。
（３）塩素系、ヨウ素系及び強アルカリ/強酸性の洗剤・消毒剤は、腐食の原因になるため、できるだけ使用を避けること。
（４）強アルカリ/強酸性洗剤・消毒剤は器械を腐食させるおそれがあるので、原則として使用を避けること。
金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
（５）電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、熱傷の危険性があり、また、器械の表面を損傷する可能性があるので、本品とともに電気メスを使用する際は注意すること。
（６）本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、弊社にご連絡ください。

** ２．不具合・有害事象
＊ （１）重大な不具合
破損・変形・摩耗等の不具合が現れた場合は使用を中止し、 適切な処置を行うこと。
（２）重大な有害事象
１）感染
２）塞栓（脂肪、血液等）
３）骨折
４）体内遺残
５）過敏症
（３）その他の有害事象
軟部組織（筋・靭帯・腱・血管・神経）の損傷

３．高齢者への適用
高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後にゆるみ等が起きる可能性が高いので、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】
保管方法：室温保存

【保守・点検に係る事項】
〈使用者による保守点検事項〉
（１）マイクロサージカル用インストルメントは他のインストルメントと分けて洗浄すること。
（２）使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを点検すること。
（３）洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
（４）汚れた器械は 5 分間洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい個所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
（５）壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないように、ブラシ等で洗浄すること。器械にスライド機構やヒンジがある場合は、その部分を動かして残った血液や異物等を取り除くこと。また、管状形状の器械は、柔らかいナイロンブラシまたはパイプクリーナーを使用し、その後異物等を取り除くこと。ブラシが届かない管内部は洗浄器を使って酵素洗浄液をかけて洗浄すること。
（６）汚れを落とした後、超音波洗浄により中性洗剤を用い、10 分間洗浄すること。また、その際、刃先等の鋭利部同士が接触して損傷しないようにすること。また、ラチェット部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。
（７）器械は温精製水（ろ過、蒸留、脱イオン化等）で表面の汚れを完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら洗い流すこと。
（８）最終洗浄後は、直ちに乾燥すること。できるだけフィルターを通した圧縮空気で内部を乾燥すること。
（９）できるだけ可動部に水溶性潤滑剤を使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
URL：depuysynthes.jp

製造業者:
・デピュー・オーソペディックス社
（DePuy Orthopaedics, Inc）米国

©J&J KK