INS-TK02B-E

**2017 年 8 月改訂（第 5 版（新記載要領に基づく改訂））
*2011 年 2 月改訂（第 4 版）

医療機器届出番号：13B1X00204D00025

機械器具 58.整形用器具器械
一般医療機器　関節手術用器械（JMDN コード：70964001）

LCS＜セラミックタイプ＞人工膝関節システム用手術器械

【形状・構造及び原理等】

** 1．形状等
本品は組み合わせにより同梱されない製品がある。同梱されている製品については別途器械出荷リストを参照すること。

番号	品名	原材料
1	LCS 脛骨用ﾘｰﾏｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 1	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
2	LCS 脛骨用ﾘｰﾏｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
3	LCS 脛骨用ﾘｰﾏｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 3	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
4	LCS 脛骨用ﾘｰﾏｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
5	LCS 脛骨用ﾘｰﾏｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 5	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
6	LCS ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾌﾟ 脛骨骨切りﾌﾞﾛｯｸ 7 度　左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
7	LCS ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾌﾟ 脛骨骨切りﾌﾞﾛｯｸ 10 度　左	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
8	LCS ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾌﾟ 脛骨骨切りﾌﾞﾛｯｸ 7 度　右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
9	LCS ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾌﾟ 脛骨骨切りﾌﾞﾛｯｸ 10 度　右	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
10	LCS ｾﾗﾐｯｸﾀｲﾌﾟ 脛骨骨切りﾌﾞﾛｯｸ 内反/外反ﾌﾞﾛｯｸ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
11	ﾋﾟﾝﾎﾙﾀﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
12	LCS ｱﾗｲﾒﾝﾄﾀﾜｰ及びﾛｯﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
13	LCS ｴｸｽﾀｰﾅﾙ ｱﾗｲﾒﾝﾄﾛｯﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
14	LCS ｾﾗﾐｯｸ ｿｰｷｬﾌﾟﾁｬｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
15	LCS 脛骨ﾎｰﾙｾﾝﾀｰﾊﾟﾝﾁ SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
16	LCS 脛骨ﾎｰﾙｾﾝﾀｰﾊﾟﾝﾁ STD/STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
17	LCS 脛骨ﾎｰﾙｾﾝﾀｰﾊﾟﾝﾁ LG/LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
18	LCS 脛骨ﾎｰﾙﾊﾟｲﾛｯﾄ ﾊﾟﾝﾁ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
19	ﾋﾟﾝ抜去器	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
20	LCS ｾﾗﾐｯｸｽﾀｲﾗｽ 0/6mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
21	LCS ｾﾗﾐｯｸｽﾀｲﾗｽ 2/6mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
22	LCS 脛骨骨切りｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
23	LCS 脛骨ﾎｰﾙ形成用ﾊﾟﾝﾁ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
24	固定用ﾋﾟﾝ 3.2mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
25	3.2mm ﾄﾞﾘﾙ先	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
26	LCS 大腿骨用ﾌﾗｯﾄﾈｽｹﾞｰｼﾞ	ﾎﾟﾘｻﾙﾌｫﾝ
27	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG 脛骨ﾄﾚｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 1-2	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
28	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG 脛骨ﾄﾚｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 3-4	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
29	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG 脛骨ﾄﾚｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ ｻｲｽﾞ 5-6	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
30	ｸﾗﾌﾞｸﾛｰ型ｳﾞｨｼﾞｭｱﾘｾﾞｰｼｮﾝｳｲﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
31	LCS 脛骨用ﾘｰﾏｰ(ﾊﾄﾞｿﾝｴﾝﾄﾞ)	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
32	LCS ﾘｰﾏｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄﾊﾞｰﾚﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
33	LCS ｱﾗｲﾒﾝﾄ ｱﾝｸﾙｸﾗﾝﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
34	LCS ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
35	LCS ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ STD/STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
36	LCS ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ LG/LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
37	LCS 大腿骨 IM ｱﾗｲﾒﾝﾄﾛｯﾄﾞ 9mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
38	脛骨用 IM ｲﾆｼｴｰﾀｰﾄﾞﾘﾙ 9mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
39	LCS 6.4mm ｽﾄｯﾊﾟｰ付き 大腿骨ﾍﾟｸﾞﾄﾞﾘﾙ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
40	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ SM/SM+12.5mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
41	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ SM/SM+15.0mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
42	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ SM/SM+17.5mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
43	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ SM/SM+20.0mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
44	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ STD～LG+12.5mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
45	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ STD～LG+15.0mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
46	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ STD～LG+17.5mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
47	LCS 脛骨用ｽﾍﾟｰｻｰ STD～LG+20.0mm	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
48	LCS ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
49	LCS ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ STD/STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
50	LCS ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸｱﾀﾞﾌﾟﾀｰ LG/LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｱﾙﾐﾆｳﾑ
51	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨骨切りｶﾞｲﾄﾞ用 ﾖｰｸﾗｰｼﾞﾙｰﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
52	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨骨切りｶﾞｲﾄﾞ用 ﾖｰｸｽﾓｰﾙﾙｰﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
53	LCS 大腿骨 IM ｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
54	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨骨切りｶﾞｲﾄﾞ用 ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
55	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨骨切りｶﾞｲﾄﾞ用 ﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ STD～LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
56	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨 A/P 面骨切りｶﾞｲﾄﾞ SM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
57	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨 A/P 面骨切りｶﾞｲﾄﾞ SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
58	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨 A/P 面骨切りｶﾞｲﾄﾞ STD	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
59	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨 A/P 面骨切りｶﾞｲﾄﾞ STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ

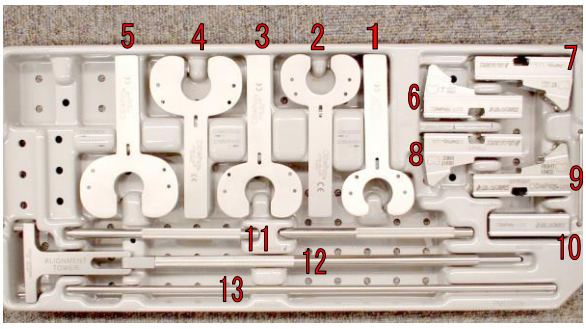
取扱説明書（手術手技書）を必ず参照して下さい

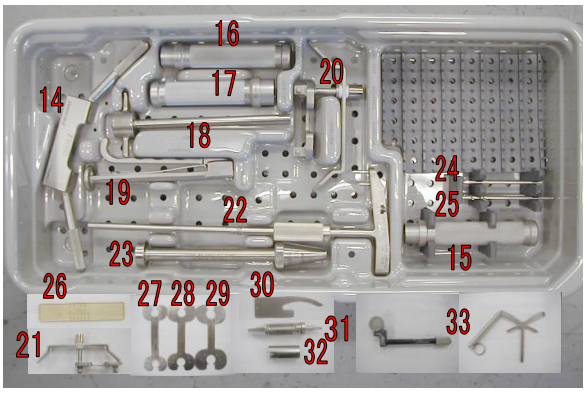
番号	品名	原材料
60	LCS セラミック大腿骨 A/P 面骨切りガイド LG	ステンレス鋼/ セラミック
61	LCS ソーキャプチャー	ステンレス鋼
62	スラップハンマー式抜去器	ステンレス鋼
63	LCS 大腿骨遠位端 骨切りブロック 2 度矯正	ステンレス鋼
64	LCS セラミック 大腿骨遠位端 骨切りブロック 4 度	ステンレス鋼/ セラミック
65	LCS セラミック 大腿骨遠位端 骨切りブロック 5 度	ステンレス鋼/ セラミック
66	LCS セラミック 大腿骨遠位端 骨切りブロック 6 度	ステンレス鋼/ セラミック
67	LCS セラミック 大腿骨遠位端 骨切りブロック 8 度	ステンレス鋼/ セラミック
68	LCS T 字型 IM アライメントロッド 8mm	ステンレス鋼
69	LCS チゼルハンドル	ステンレス鋼
70	LCS サイジングカリパス	ステンレス鋼
71	LCS ボックスオステオトームチゼル SM	ステンレス鋼
72	LCS ボックスオステオトームチゼル SM+	ステンレス鋼
73	LCS ボックスオステオトームチゼル STD	ステンレス鋼
74	LCS ボックスオステオトームチゼル STD+	ステンレス鋼
75	LCS ボックスオステオトームチゼル LG	ステンレス鋼
76	LCS 大腿骨用テンプレート SM/SM+	ステンレス鋼
77	LCS 大腿骨用テンプレート STD/LG	ステンレス鋼
78	LCS 大腿骨用テンプレート STD+/LG+	ステンレス鋼
79	LCS 大腿骨フィニッシングガイド SM	ステンレススチール/ セラミック
80	LCS 大腿骨フィニッシングガイド SM+	ステンレス鋼/ セラミック
81	LCS 大腿骨フィニッシングガイド STD	ステンレス鋼/ セラミック
82	LCS 大腿骨フィニッシングガイド STD+	ステンレス鋼/ セラミック
83	LCS 大腿骨フィニッシングガイド LG	ステンレス鋼/ セラミック
84	LCS セラミックフィニッシングガイドハンドル	ステンレス鋼/ セラミック
85	LCS トライアル大腿骨コンポーネント SM 右	コバルトクロム合金
86	LCS トライアル大腿骨コンポーネント SM+ 右	コバルトクロム合金
87	LCS トライアル大腿骨コンポーネント SM 左	コバルトクロム合金
88	LCS トライアル大腿骨コンポーネント SM+ 左	コバルトクロム合金
89	大腿骨コンポーネント(トライアル)抜去器	ステンレス鋼
90	LCS 大腿骨コンポーネント(トライアル) 打ち込み器	ポリアセタール/ アルミニウム
91	LCS トライアル大腿骨コンポーネント STD 右	コバルトクロム合金
92	LCS トライアル大腿骨コンポーネント STD+右	コバルトクロム合金
93	LCS トライアル大腿骨コンポーネント LG 右	コバルトクロム合金
94	LCS トライアル大腿骨コンポーネント STD 左	コバルトクロム合金
95	LCS トライアル大腿骨コンポーネント STD+左	コバルトクロム合金
96	LCS トライアル大腿骨コンポーネント LG 左	コバルトクロム合金
97	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル SM10.0mm	ポリアセタール
98	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル SM12.5mm	ポリアセタール

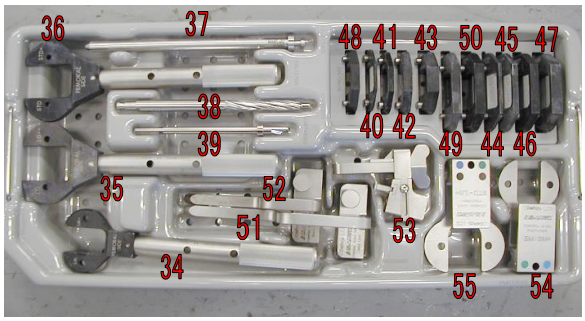
番号	品名	原材料
99	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル SM15.0mm	ポリアセタール
100	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル SM+10.0mm	ポリアセタール
101	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル SM+12.5mm	ポリアセタール
102	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル SM+15.0mm	ポリアセタール
103	LCS ユニバーサルガイドアームトライアル サイズ 1-7 モジュラー	ステンレス鋼/ ポリアセタール
104	LCS ユニバーサルガイドアームトライアル サイズ 1-2	ステンレス鋼/ ポリアセタール
105	LCS ユニバーサルガイドアームトライアル サイズ 3-4	ステンレス鋼/ ポリアセタール
106	LCS ユニバーサルガイドアームトライアル サイズ 5-7	ステンレス鋼/ ポリアセタール
107	LCS ユニバーサル 脛骨トレートライアル サイズ 1	コバルトクロム合金
108	LCS ユニバーサル 脛骨トレートライアル サイズ 2	コバルトクロム合金
109	LCS ユニバーサル 脛骨トレートライアル サイズ 3	コバルトクロム合金
110	LCS ユニバーサル 脛骨トレートライアル サイズ 4	コバルトクロム合金
111	LCS ユニバーサル 脛骨トレートライアル サイズ 5	コバルトクロム合金
112	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル STD10.0mm	ポリアセタール
113	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル STD12.5mm	ポリアセタール
114	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル STD15.0mm	ポリアセタール
115	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル STD+10.0mm	ポリアセタール
116	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル STD+12.5mm	ポリアセタール
117	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル STD+15.0mm	ポリアセタール
118	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル LG10.0mm	ポリアセタール
119	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル LG12.5mm	ポリアセタール
120	LCS ユニバーサル APG ベアリングトライアル LG15.0mm	ポリアセタール
121	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル SM17.5mm	ポリアセタール
122	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル SM20.0mm	ポリアセタール
123	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル SM+17.5mm	ポリアセタール
124	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル SM+20.0mm	ポリアセタール
125	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル STD17.5mm	ポリアセタール
126	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル STD20.0mm	ポリアセタール
127	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル STD+17.5mm	ポリアセタール
128	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル STD+20.0mm	ポリアセタール
129	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル LG17.5mm	ポリアセタール
130	LCS ユニバーサル 回旋型ベアリングトライアル LG20.0mm	ポリアセタール
131	LCS セラミック大腿骨 A/P 面骨切りガイド LG+	ステンレス鋼/ セラミック

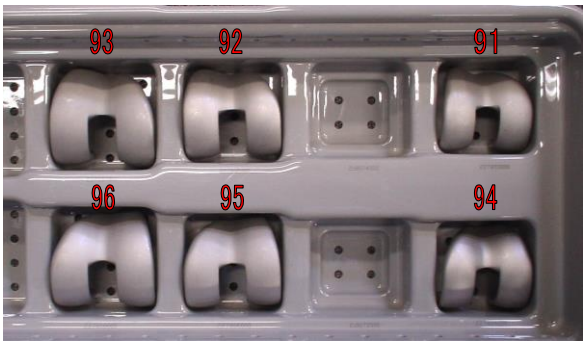
番号	品名	原材料
132	LCS 大腿骨ﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
133	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 脛骨ﾄﾚｰﾄﾗｲｱﾙ ｻｲｽﾞ 6	ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金
134	LCS ﾎﾞｯｸｽｵｽﾃｵﾄｰﾑﾁｾﾞﾙ LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
135	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ LG+10.0mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
136	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ LG+12.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
137	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ LG+15.0mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
138	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 回旋型ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ LG+17.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
139	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ 回旋型ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ LG+20.0mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
140	LCS 脛骨用ﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄｻｲｽﾞ 6	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
141	SP2 ﾋﾟﾝﾘﾑｰﾊﾞｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
142	AMK ｽﾄﾚｰﾄ ﾗｽﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
143	ｽﾀｲﾏﾝﾋﾟﾝ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
144	LCS ﾄﾗｲｱﾙ大腿骨ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ LG+ 右	ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金
145	LCS ﾄﾗｲｱﾙ大腿骨ｺﾝﾎﾟｰﾈﾝﾄ LG+ 左	ｺﾊﾞﾙﾄｸﾛﾑ合金
146	脛骨近位部骨切りｶﾞｲﾄﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
147	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ SM17.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
148	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ SM+17.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
149	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ STD17.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
150	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ STD+17.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
151	LCS ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙ APG ﾍﾞｱﾘﾝｸﾞﾄﾗｲｱﾙ LG17.5mm	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
152	LCS ｾﾗﾐｯｸ大腿骨遠位骨切りﾌﾞﾛｯｸ 7度	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ｾﾗﾐｯｸ
153	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 内側ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 SM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
154	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 内側ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
155	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 内側ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 STD	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
156	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 内側ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
157	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 内側ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 LG	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
158	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ SM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
159	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
160	LCS 3ﾍﾟｸﾞ ﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ STD	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
161	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
162	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ LG	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
163	LCS ｵｰﾙﾎﾟﾘ3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ SM	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
164	LCS ｵｰﾙﾎﾟﾘ3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
165	LCS ｵｰﾙﾎﾟﾘ3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ STD	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ

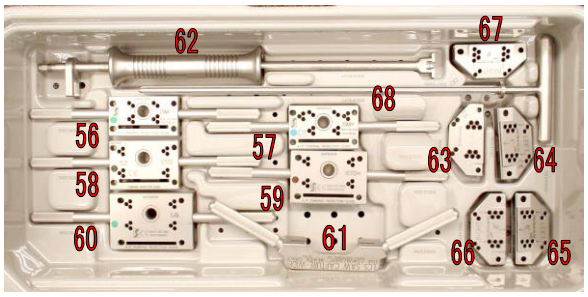
番号	品名	原材料
166	LCS ｵｰﾙﾎﾟﾘ3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
167	LCS ｵｰﾙﾎﾟﾘ3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ LG	ｽﾃﾝﾚｽ鋼/ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
168	LCS ﾊﾟﾃﾗ ﾌｪｰｽﾌﾟﾚｰﾄ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
169	LCS ﾊﾟﾃﾗ ｸﾗﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
170	LCS ﾊﾟﾃﾗ ｸﾗﾝﾌﾟﾍｯﾄﾞ STD～LG+MEDIAL 用	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
171	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾌﾗｯﾄﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
172	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾌﾗｯﾄﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ STD/STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
173	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾌﾗｯﾄﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ LG/LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
174	LCS ﾊﾟﾃﾗｸﾗﾝﾌﾟ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
175	ﾊﾟﾃﾗ用ｶﾘﾊﾟｽ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
176	LCS ﾊﾟﾃﾗﾌﾟﾚｰﾅｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
177	LCS ﾊﾟﾃﾗﾌﾟﾚｰﾅｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ STD/STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
178	LCS ﾊﾟﾃﾗﾌﾟﾚｰﾅｰﾌﾞｯｼﾝｸﾞ LG/LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
179	LCS ﾃﾞﾌﾟｽ ｽﾄｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
180	LCS ﾃﾞﾌﾟｽ ｽﾄｯﾌﾟﾀﾜｰ	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
181	LCS ﾊﾟﾃﾗﾌﾟﾚｰﾅｰ SM/SM+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
182	LCS ﾊﾟﾃﾗﾌﾟﾚｰﾅｰ STD/STD+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
183	LCS ﾊﾟﾃﾗﾌﾟﾚｰﾅｰ LG/LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼
184	LCS ｵｰﾙﾎﾟﾘ3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ LG+	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
185	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾄﾗｲｱﾙ LG+	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
186	LCS 3ﾍﾟｸﾞﾊﾟﾃﾗ ﾓｼﾞｭﾗｰﾃﾝﾌﾟﾚｰﾄ 内側ｱﾌﾟﾛｰﾁ用 LG+	ｽﾃﾝﾚｽ鋼

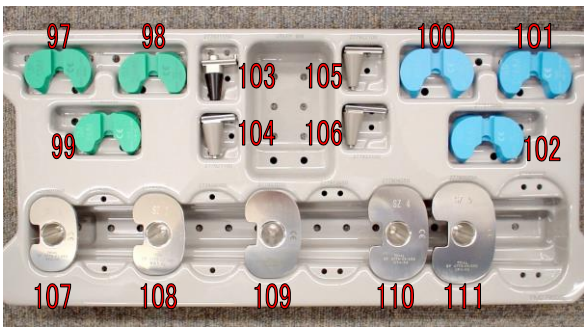


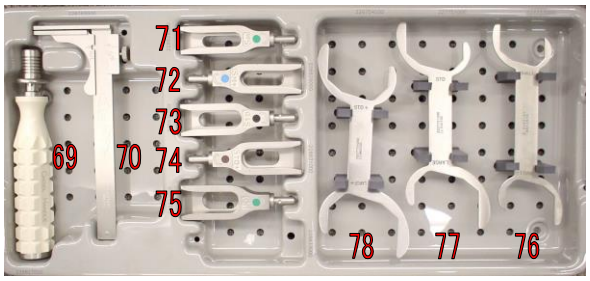


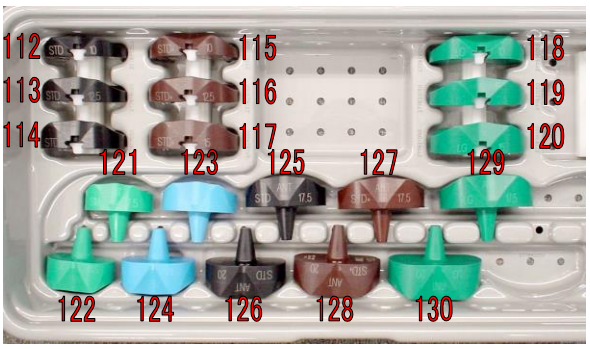

36
37
48 41 43 50 45 47
38
40 42
39
49 44 46
35
52
51
53
34
55
54

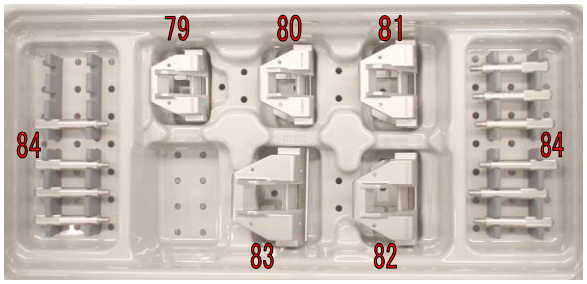

93
92
91
96
95
94

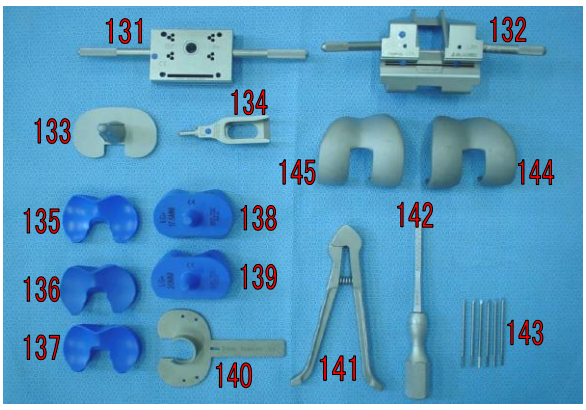

62
67
68
56
57
63
64
58
59
60
61
66
65


97
98
100
101
103
105
99
104
106
102
107
108
109
110
111

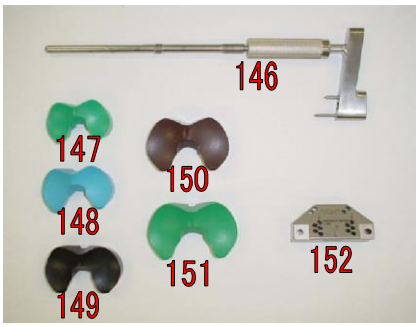

71
72
73
69
70
74
75
78
77
76

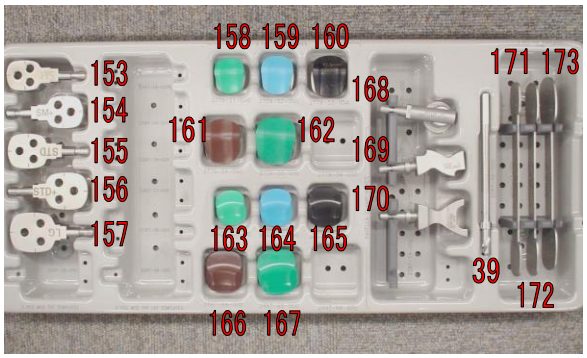

112
115
118
113
116
119
114
117
120
121
123
125
127
129
122
124
126
128
130

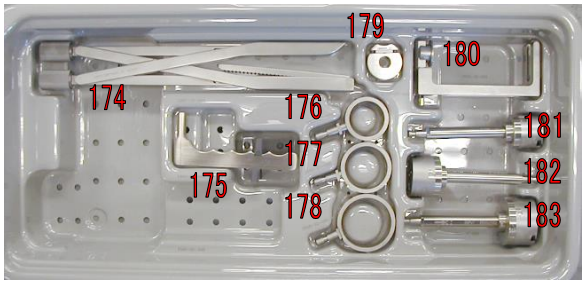

79
80
81
84
84
83
82

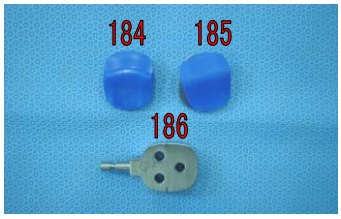

131
132
134
133
145
144
135
138
142
136
139
137
140
141
143


86
85
89
90
88
87


146
147
150
148
151
152
149







2．原理
人工膝関節に適合した手術器械を使用することにより埋め込み部位の適切なサイズの決定及び適切な寸法の形成を行うことができる。

【使用目的又は効果】

1．使用目的
本品は再使用可能な、手術器械であり、人工関節置換術等の関節手術を行うために用いる。

2．適応症例
膝関節の機能再建を目的として、以下の症状のある患者に人工膝関節を埋植するために使用する。
1）関節リウマチ
2）変形性関節症
3）変性疾患に起因する関節症
4）外傷

【使用方法等】

本品は未滅菌であるので、使用前に滅菌する。

1．滅菌方法
本品は医療機関内において、10^{-6}以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。（以下、条件の例）
高圧蒸気滅菌の場合
サイクル：前真空
温度、暴露時間：132-134℃、8 分　又は
134-137℃、5 分

2．使用方法
本品は人工関節置換術等の関節手術を行うための手動式の手術器械であり、人工膝関節の埋植を適切な位置に行うために本品を用いる。

** ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
（1） 滅菌前に、全ての器械に損傷、変形等の異常がないか点検すること。
（2） 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
（3） 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に、必要以上の力（応力）を加えないこと。
（4） 使用後は、付着した血液、退役、組織及び薬品等が乾燥しないように、直ちに洗浄液等に浸漬すること。また、できるだけ早く汚染物を除去し、感染予防のために洗浄・消毒すること。

【使用上の注意】

** 1．重要な基本的注意
（1）損傷・変形等がある器械は識別した上で返却すること。
（2） 滅菌は、正しく整備、校正及びバリデーションされた滅菌器を使用して、滅菌すること。
（3） 塩素系、ヨウ素系及び強アルカリ/強酸性の洗剤・消毒剤は、腐食の原因になるため、できるだけ使用を避けること。
（4） 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
（5） 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、熱傷の危険性があり、また、器械の表面を損傷する可能性があるので、本品とともに電気メスを使用する際は注意すること。
＊ （6）本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、弊社にご連絡ください。

** 2．不具合・有害事象
＊ （1） 重大な不具合
破損・変形・摩耗等の不具合が現れた場合は使用を中止し、適切な処置を行うこと。
（2） 重大な有害事象
1）感染
2）塞栓（脂肪、血液等）
3）骨折
4）体内遺残
5）過敏症
（3） その他の有害事象
軟部組織（筋・靭帯・腱・血管・神経）の損傷

3．高齢者への適用
高齢者は、骨が粗鬆化している場合があり、術中に過度の力を加えることにより骨折したり、インプラント埋植後にゆるみ等が起きる可能性が高いので、慎重に使用すること。

【保管方法及び有効期間等】

保管方法：室温保存

【保守・点検に係る事項】

＜使用者による保守点検事項＞
（1） マイクロサージカル用インストルメントは他のインストルメントと分けて洗浄すること。
（2） 使用後は、分解が可能な器械は分解し、損傷がないかどうかを点検すること。
（3） 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。
（4） 汚れた器械は 5 分間洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい個所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
（5） 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないように、ブラシ等で洗浄すること。

器械にスライド機構やヒンジがある場合は、その部分を動かして残った血液や異物等を取り除くこと。また、管状形状の器械は、柔らかいナイロンブラシまたはパイプクリーナーを使用し、その後異物等を取り除くこと。ブラシが届かない管内部は洗浄器を使って酵素洗浄液をかけて洗浄すること。

（6） 汚れを落とした後、超音波洗浄により中性洗剤を用い、10 分間洗浄すること。また、その際、刃先等の鋭利部同士が接触して損傷しないようにすること。また、ラチェット部等の可動部分は開放して、汚れが落ちやすいようにバスケット等に収納すること。

（7） 器械は温精製水（ろ過、蒸留、脱イオン化等）で表面の汚れを完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら洗い流すこと。

（8） 最終洗浄後は、直ちに乾燥すること。できるだけフィルターを通した圧縮空気で内部を乾燥すること。

（9） できるだけ可動部に水溶性潤滑剤を使用すること。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
URL：depuysynthes.jp

製造業者:
・デピュー・インターナショナル社
（DePuy International Ltd）英国
・デピュー・オーソペディックス社
（DePuy Orthopaedics, Inc）米国

©J&J KK