**2023 年 5 月改訂（第 9 版）
*2017 年 8 月改訂（第 8 版（新記載要領に基づく改訂））
医療機器届出番号 13B1X00204D00055

機械器具 58. 整形用器具器械
一般医療機器　関節手術用器械（JMDN ｺｰﾄﾞ：70964001）

ハイパフォーマンス手術器械

【形状・構造及び原理等】

** 1．形状等

本品は、組み合わせにより同梱されない製品がある。同梱されている製品については、別途器械出荷リストを参照すること。

番号	品名	原材料
1	ｼｸﾞﾏ HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ LT 0 度※B	ステンレス鋼
2	ｼｸﾞﾏ HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ RT 0 度※B	ステンレス鋼
3	ｼｸﾞﾏ HP ﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙｱﾗｲﾒﾝﾄｶﾞｲﾄﾞ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
4	ｼｸﾞﾏ HP ﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙﾘｾｸｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ※B	ステンレス鋼
5	ｼｸﾞﾏ HP ﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ※B	ステンレス鋼
6	ｼｸﾞﾏ HP ﾃﾞｨｽﾀﾙﾌｪﾓﾗﾙｺﾈｸﾀｰ※B	ステンレス鋼
7	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE2※C	ステンレス鋼
8	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE2.5※C	ステンレス鋼
9	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE3※C	ステンレス鋼
10	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE4※C	ステンレス鋼
11	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE5※C	ステンレス鋼
12	HP MBT ｽﾊﾟｲｸｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝﾌﾟﾚｯﾄ SIZE1-3※C	ステンレス鋼
13	HP MBT ｷｰﾙﾊﾟﾝﾁｲﾝﾊﾟｸﾀｰ※C	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝ
14	HP MBT ｾﾒﾝﾄｾﾝﾄﾗﾙﾄﾞﾘﾙ※C	ステンレス鋼
15	HP MBT ﾄﾞﾘﾙﾀﾜｰ※C	ステンレス鋼
16	HP ﾃｨﾋﾞｱﾙﾄﾚｲﾊﾝﾄﾞﾙ※C	ステンレス鋼 ｼﾘｺｰﾝ
17	HP ﾋﾟﾝｲﾝﾊﾟｸﾀｰ/ｴｸｽﾄﾗｸﾀｰ※C	ステンレス鋼
18	HP ﾋﾟﾝﾄﾞﾗｲﾊﾞｰ※A	ステンレス鋼 ｴﾁﾚﾝﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
19	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 8MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
20	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 10MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
21	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 12.5MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
22	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 15MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
23	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 17.5MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
24	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 10MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
25	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 12.5MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
26	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 15MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
27	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 17.5MM※C	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
28	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｲﾝﾊﾟｸﾀｰ※B	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
29	HP ﾌｪﾓﾗﾙｲﾝﾊﾟｸﾀｰ/ｴｸｽﾄﾗｸﾀｰ※C	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ又 はﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
30	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽﾌｪﾓﾗﾙｻｲｻﾞｰ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
31	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽｱﾝﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 0 度※B	ステンレス鋼
32	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽｱﾝﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 3 度※B	ステンレス鋼
33	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽｱﾝﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 5 度※B	ステンレス鋼
34	MBT ﾃｨﾋﾞｱﾙｲﾝﾊﾟｸﾀｰ※C	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ
35	HP MBT ｾﾒﾝﾄｷｰﾙﾊﾟﾝﾁ SIZE2-3※C	ステンレス鋼
36	HP MBT ｾﾒﾝﾄｷｰﾙﾊﾟﾝﾁ SIZE4-7※C	ステンレス鋼
37	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE5※C	ステンレス鋼
38	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽ IM ﾛｯﾄﾞ 5 度※C	ステンレス鋼
39	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽ IM ﾛｯﾄﾞ 3 度※C	ステンレス鋼
40	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽ ﾌｪﾓﾗﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ※C	ステンレス鋼
41	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪﾓﾗﾙﾎﾟｽﾃﾘｱｼﾑ 10MM※C	ステンレス鋼
42	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪﾓﾗﾙﾎﾟｽﾃﾘｱｼﾑ 12.5MM※C	ステンレス鋼
43	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪﾓﾗﾙﾎﾟｽﾃﾘｱｼﾑ 15MM※C	ステンレス鋼
44	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾌｪﾓﾗﾙﾎﾟｽﾃﾘｱｼﾑ 17.5MM※C	ステンレス鋼
45	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2※C	ステンレス鋼
46	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2.5※C	ステンレス鋼
47	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE3※C	ステンレス鋼
48	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE4※C	ステンレス鋼
49	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE5※C	ステンレス鋼
50	HP EM ﾃｨﾋﾞｱﾙｼﾞｸﾞｱｯﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ※B	ステンレス鋼
51	HP EM ﾃｨﾋﾞｱﾙｼﾞｸﾞｱﾝｸﾙｸﾗﾝﾌﾟ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
52	ｼｸﾞﾏ RPF HP ﾌﾚｸｼｮﾝｼﾑ SIZE2※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
53	ｼｸﾞﾏ RPF HP ﾌﾚｸｼｮﾝｼﾑ SIZE2.5-5※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
54	ｼｸﾞﾏ HP ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾃｨﾋﾞｱﾙｽﾀｲﾗｽ※B	ステンレス鋼
55	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽｱﾝﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 7 度※B	ステンレス鋼
56	HP ｱﾗｲﾒﾝﾄﾀﾜｰ※B	ステンレス鋼
57	HP ｽﾃｯﾌﾟ IM ﾘｰﾏｰ※A	ステンレス鋼
58	HP EM ﾃｨﾋﾞｱﾙｼﾞｸﾞｽﾊﾟｲｸｱｯﾊﾟｰﾛｯﾄﾞ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
59	ｼｸﾞﾏ HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 0 度※B	ステンレス鋼
60	ｼｸﾞﾏ HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 3 度※B	ステンレス鋼
61	ｼｸﾞﾏ HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ LT 3 度※B	ステンレス鋼
62	ｼｸﾞﾏ HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ RT 3 度※B	ステンレス鋼
63	HP ﾊﾟﾃﾗｳｪﾌｧｰ SM※B	ステンレス鋼
64	HP MBT ｽﾊﾟｲｸｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝﾌﾟﾚｯﾄ SIZE4-7※C	ステンレス鋼
65	MBT ﾄﾚｰ ｲﾝﾊﾟｸﾀｰ※C	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
66	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE1※C	ステンレス鋼
67	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE1.5※C	ステンレス鋼
68	HP MBT ｾﾒﾝﾄｷｰﾙﾊﾟﾝﾁ SIZE1-1.5※C	ステンレス鋼

取扱説明書（手術手技書）を必ず参照してください

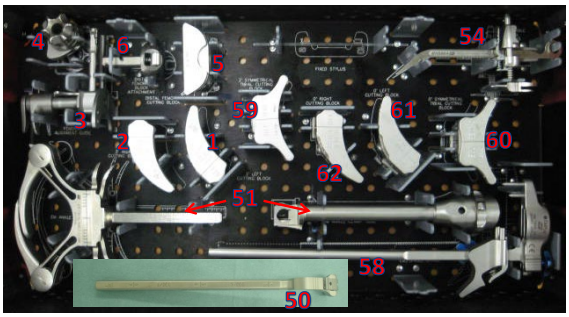
番号	品名	原材料
69	SP2 MBT 脛骨 ﾄﾚｰﾄﾗｲｱﾙ 用固定 ﾋﾟﾝ※C	ステンレス鋼
70	HP ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾊﾝﾄﾞﾙ※B	ステンレス鋼 シリコーン
71	SP2 IM ﾛｯﾄﾞﾊﾝﾄﾞﾙ※C	ステンレス鋼
72	SP2 IM ﾛｯﾄﾞ 300MM※C	ステンレス鋼
73	SP2 ﾘﾌｧﾚﾝｽ ｶﾞｲﾄﾞ※C	ステンレス鋼
74	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1※C	ステンレス鋼
75	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1.5※C	ステンレス鋼
76	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE1※C	ステンレス鋼
77	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE1.5※C	ステンレス鋼
78	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE2※C	ステンレス鋼
79	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE2.5※C	ステンレス鋼
80	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE3※C	ステンレス鋼
81	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE4※C	ステンレス鋼
82	HP ﾊﾟﾃﾗｳｪﾌｧｰ LG※B	ステンレス鋼
83	ｼｸﾞﾏ RPF HP ﾌﾚｸｼｮﾝｼﾑ SIZE1.5※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
84	HP ｳﾞｨｼﾞｭｱﾘｾﾞｰｼｮﾝｳｨﾝｸﾞ 1.47MM※C	ステンレス鋼
85	HP ｽﾗｯﾌﾟﾊﾝﾏｰ※B	ステンレス鋼
86	ｼｸﾞﾏ ﾊﾟｽｳｪｲ ﾊﾟﾃﾗ 骨切り ｶﾞｲﾄﾞ※B	ステンレス鋼
87	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾟﾃﾗﾘｾｸｼｮﾝｽﾀｲﾗｽ 32-38MM※B	ステンレス鋼
88	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾟﾃﾗﾘｾｸｼｮﾝｽﾀｲﾗｽ 41MM※B	ステンレス鋼
89	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾟﾃﾗﾘｾｸｼｮﾝｽﾀｲﾗｽ ﾚﾑﾅﾝﾄ 12MM※B	ステンレス鋼
90	HP ｱﾗｲﾒﾝﾄﾛｯﾄﾞ※A	ステンレス鋼
91	HP IM ﾃｨﾋﾞｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ※B	ステンレス鋼
92	HP IM ﾃｨﾋﾞｱｼﾞｸﾞ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
93	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1.5※C	ステンレス鋼
94	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2※C	ステンレス鋼
95	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2.5※C	ステンレス鋼
96	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE3※C	ステンレス鋼
97	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE4※C	ステンレス鋼
98	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE5※C	ステンレス鋼
99	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽﾎﾟｽﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 0 度※B	ステンレス鋼
100	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽﾎﾟｽﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 3 度※B	ステンレス鋼
101	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽﾎﾟｽﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 5 度※B	ステンレス鋼
102	HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽﾎﾟｽﾃﾘｱﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 7 度※B	ステンレス鋼
103	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙﾁｬﾝﾌｧｰﾌﾞﾛｯｸ SIZE1.5※B	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ステンレス鋼
104	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙﾁｬﾝﾌｧｰﾌﾞﾛｯｸ SIZE2※B	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ステンレス鋼
105	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙﾁｬﾝﾌｧｰﾌﾞﾛｯｸ SIZE2.5※B	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ステンレス鋼
106	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙﾁｬﾝﾌｧｰﾌﾞﾛｯｸ SIZE3※B	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ステンレス鋼
107	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙﾁｬﾝﾌｧｰﾌﾞﾛｯｸ SIZE4※B	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ステンレス鋼
108	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙﾁｬﾝﾌｧｰﾌﾞﾛｯｸ SIZE5※B	ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ ステンレス鋼
109	HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 0 度※B	ステンレス鋼
110	HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 3 度※B	ステンレス鋼

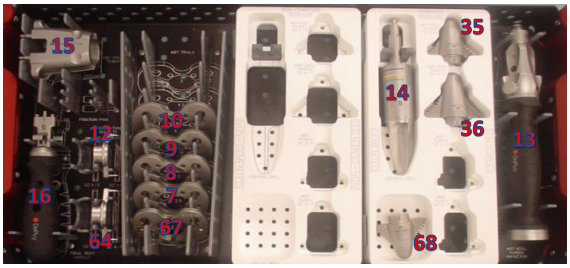
番号	品名	原材料
111	HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 5 度※B	ステンレス鋼
112	HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽﾛｰﾃｰｼｮﾝｶﾞｲﾄﾞ 7 度※B	ステンレス鋼
113	HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽﾎﾟｽﾃﾘｱｱｯﾌﾟﾌｪﾓﾗﾙｻｲｻﾞｰ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
114	HP ｱﾝﾃﾘｱﾀﾞｳﾝｺﾝﾊﾞｰﾀｰ※B	ステンレス鋼
115	HP ﾎﾟｽﾃﾘｱｱｯﾌﾟｺﾝﾊﾞｰﾀｰ※B	ステンレス鋼
116	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1※C	ステンレス鋼
117	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1.5※C	ステンレス鋼
118	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2※C	ステンレス鋼
119	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2.5※C	ステンレス鋼
120	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE3※C	ステンレス鋼
121	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE4※C	ステンレス鋼
122	RPF HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE5※C	ステンレス鋼
123	HP ｸﾗｼｯｸﾘﾌｧﾚﾝｽｱﾝﾃﾘｱﾀﾞｳﾝﾌｪﾓﾗﾙｻｲｻﾞｰ※B	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
124	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1.5※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
125	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
126	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2.5※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
127	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE3※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
128	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE4※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
129	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE5※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
130	ｼｸﾞﾏ HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸｽﾀｲﾗｽ※C	ステンレス鋼
131	LCS HP ｱｼﾞｬｽﾀﾌﾞﾙﾃｨﾋﾞｱﾙｽﾀｲﾗｽ※B	ステンレス鋼
132	ｼｸﾞﾏHP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ FB ﾌｪﾓﾗﾙﾎﾟｼﾞｼｮﾅｰ※C	ステンレス鋼
133	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
134	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE1.5※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
135	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
136	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE2.5※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
137	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE3※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
138	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE4※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
139	RPF HP ﾊﾞﾗﾝｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE5※C	ステンレス鋼 ﾁﾀﾝ合金
140	MBT ｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝﾌﾟﾚｯﾄ SIZE1-3※C	ステンレス鋼
141	MBT ｴﾊﾞﾘｭｴｰｼｮﾝﾌﾟﾚｯﾄ SIZE4-7※C	ステンレス鋼
142	LCS HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 7 度※B	ステンレス鋼
143	LCS HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ LM/RL7 度※B	ステンレス鋼
144	LCS HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ RM/LL7 度※B	ステンレス鋼
145	LCS HP ﾃｨﾋﾞｱﾙｶｯﾃｨﾝｸﾞﾌﾞﾛｯｸ 内外反 7 度※B	ステンレス鋼
146	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｲﾝﾊﾟｸﾀｰ※B	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘﾌｪﾆﾙｻﾙﾎﾝ
147	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ ﾃﾞｨｽﾀﾙﾌﾞﾛｯｸ 2.5MM 2ND※B	ステンレス鋼
148	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ A/P ﾛｯｸﾊﾝﾄﾞﾙ※B	ステンレス鋼
149	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 3 度左※C	ステンレス鋼
150	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 4 度左※C	ステンレス鋼

番号	品名	原材料
151	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 5 度左※C	ステンレス鋼
152	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 6 度左※C	ステンレス鋼
153	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 7 度左※C	ステンレス鋼
154	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 8 度左※C	ステンレス鋼
155	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 0 度※C	ステンレス鋼
156	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 3 度右※C	ステンレス鋼
157	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 4 度右※C	ステンレス鋼
158	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 5 度右※C	ステンレス鋼
159	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 6 度右※C	ステンレス鋼
160	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 7 度右※C	ステンレス鋼
161	LCS ﾊﾟｽｳｪｲ 髄内 ﾌﾟﾚｰﾄ 8 度右※C	ステンレス鋼
162	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌﾞﾛｯｸ SM※B	ステンレス鋼
163	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌﾞﾛｯｸ SM+※B	ステンレス鋼
164	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ MED※B	ステンレス鋼
165	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ STD※B	ステンレス鋼
166	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ STD+※B	ステンレス鋼
167	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ LG※B	ステンレス鋼
168	HP MBT ﾉﾝｾﾒﾝﾄﾊﾟﾝﾁ SIZE1-1.5※C	ステンレス鋼
169	HP MBT ﾉﾝｾﾒﾝﾄﾊﾟﾝﾁ SIZE2-3※C	ステンレス鋼
170	HP MBT ﾉﾝｾﾒﾝﾄﾊﾟﾝﾁ SIZE4-7※C	ステンレス鋼
171	HP MBT ｾﾒﾝﾄﾊﾟﾝﾁ SIZE1-1.5※C	ステンレス鋼
172	HP MBT ｾﾒﾝﾄﾊﾟﾝﾁ SIZE2-3※C	ステンレス鋼
173	HP MBT ｾﾒﾝﾄﾊﾟﾝﾁ SIZE4-7※C	ステンレス鋼
174	HP MBT ﾉﾝｾﾒﾝﾄｾﾝﾄﾗﾙﾄﾞﾘﾙ※C	ステンレス鋼
175	MBT ﾓｼﾞｭﾗｰﾄﾞﾘﾙｽﾄｯﾌﾟ※C	ステンレス鋼
176	LCS HP ﾌｪﾓﾗﾙﾌｨﾆｯｼﾝｸﾞｶﾞｲﾄﾞ LG+※B	ステンレス鋼
177	HP MBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE6※C	ステンレス鋼
178	RPF HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE6※C	ステンレス鋼
179	RPF HP ﾌｪﾓﾗﾙﾉｯﾁｶﾞｲﾄﾞ SIZE6※B	ステンレス鋼
180	ｼｸﾞﾏ HP ﾌｨｯｸｽﾄﾞﾘﾌｧﾚﾝｽ AP ﾌﾞﾛｯｸ SIZE6※C	ステンレス鋼
181	SP2 MI ﾌｪﾓﾗﾙ ﾉｯﾁ ｶﾞｲﾄﾞ ｻｲｽﾞ 6※C	ステンレス鋼 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
182	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 20MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
183	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 22.5MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
184	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 25MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
185	ｼｸﾞﾏ HP FBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 30MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
186	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 20MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
187	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 22.5MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
188	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 25MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
189	HP MBT ｽﾍﾟｰｻｰﾌﾞﾌﾞﾛｯｸ 30MM※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金 ﾎﾟﾘｱｾﾀｰﾙ
190	SP2 ｸｲｯｸｺﾈｸﾄ ﾊﾟﾃﾗﾄﾞﾘﾙ※C	ステンレス鋼
191	ｼｸﾞﾏ HP FBT ﾄﾚｲﾄﾗｲｱﾙ SIZE6※C	ステンレス鋼
192	HP FBT ｾﾒﾝﾄｷｰﾙﾊﾟﾝﾁ SIZE6※C	ステンレス鋼

番号	品名	原材料
193	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ脛骨 ﾊﾟﾝﾁｶﾞｲﾄﾞｻｲｽﾞ 1.5-4※C	ステンレス鋼
194	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ脛骨 ﾊﾟﾝﾁｶﾞｲﾄﾞｻｲｽﾞ 5-6※C	ステンレス鋼
195	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ脛骨 ﾊﾟﾝﾁｻｲｽﾞ 1.5-2※C	ステンレス鋼
196	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ脛骨 ﾊﾟﾝﾁｻｲｽﾞ 2.5-4※C	ステンレス鋼
197	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ脛骨 ﾊﾟﾝﾁｻｲｽﾞ 5-6※C	ステンレス鋼
198	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾﾒﾝﾄ 脛骨ﾊﾟﾝﾁｻｲｽﾞ 1.5-2※C	ステンレス鋼
199	HPFBT ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｾﾒﾝﾄ 脛骨ﾊﾟﾝﾁｻｲｽﾞ 2.5-6※C	ステンレス鋼
200	ｼｸﾞﾏ HP 屈曲/伸展ｷｬｯﾌﾟ ｻｲｽﾞ 6※C	ｱﾙﾐﾆｳﾑ合金
201	HP FBT ﾉﾝｾﾒﾝﾄｷｰﾙﾊﾟﾝﾁ SIZE6※C	ステンレス鋼

※以降の記載について、各製品に付された A から C の記号に対応する記載が該当する。

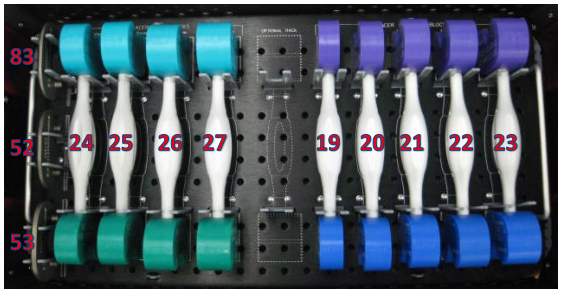


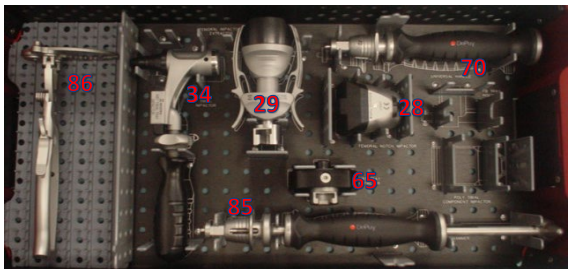






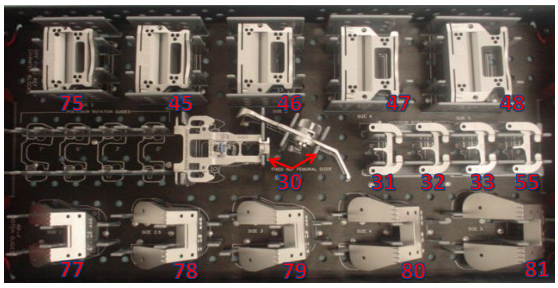


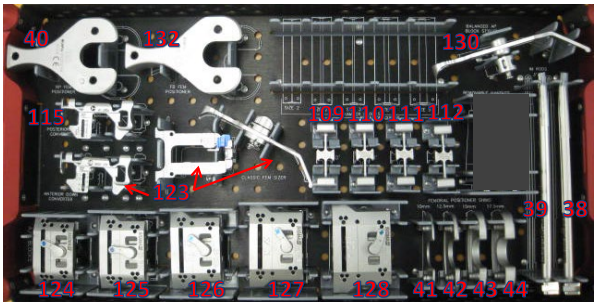



86
34
29
70
28
65
85


117
118
119
120
121


113
114
129
131

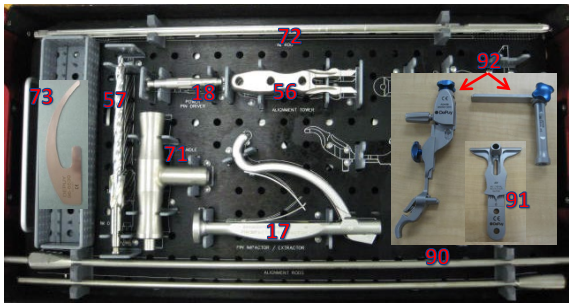

75
45
46
47
48
30
31
32
33
55
77
78
79
80
81

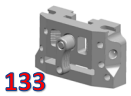

40
122
130
115
109
110
111
112
123
39
38
124
125
126
127
128
41
42
43
44


74
76

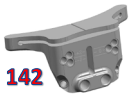

49
37


134
135
136
137
138


72
73
57
18
56
92
71
91
17
90


133

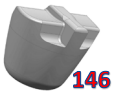

139

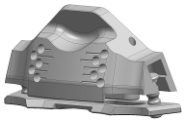

142


143


144


145

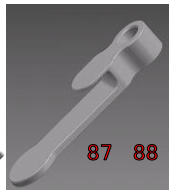

146


147


148

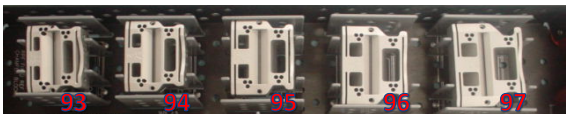

63
82


84


87
88


89


149 150 151 152 153 154
155 156 157 158 159 160 161


93
94
95
96
97


162 163 164 165 166 167 176


168 169 170


103
104
105
106


107
108


98


175

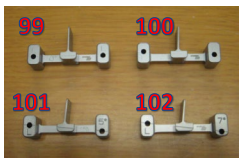

174


171 172 173


177


116


122


99
100
101
102


178
179


180
181


182 183 184 185


186 187 188 189


190


191


192 201


193 194


195 196 197


198 199


200

２．原理

本品の使用により、埋め込み部位の適切なサイズの決定及び適切な寸法の形成を行うことができる。

【使用目的又は効果】

本品は再使用可能な手動式の手術器械であり、人工膝関節置換術等の関節手術を行うために用いる。

****【使用方法等】**

本品は未滅菌であるので、使用前に滅菌する。

１．滅菌方法

本品は、医療機関内で 10^{-6} 以下の無菌性保証水準が得られる条件で滅菌を行う。

（滅菌条件の例）

滅菌方法：高圧蒸気滅菌

サイクル：前真空

温度、暴露時間：121℃、15 分

134℃、3 分

乾燥時間：30 分

※滅菌の際は製造業者の指示書に従い、適切な滅菌包装材（例：滅菌ラップ、滅菌パック、滅菌容器）を使用する。

２．使用方法

本品は人工膝関節置換術等の関節手術を行うための手動式の手術器械であり、人工膝関節の埋植を適切に行うために本品を用いる。

以下に使用例を示す。

膝蓋骨の骨切除



脛骨の準備

・脛骨のアライメント（髄内）



・脛骨のアライメント（髄外）



・脛骨の切除



・トレイトライアルの設置

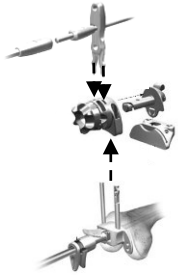


・脛骨の仕上げ

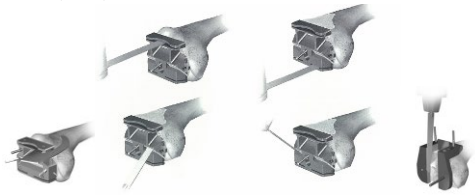


大腿骨の準備

・遠位骨切りブロックの設置



・大腿骨の骨切除



・大腿骨トライアル



脛骨・大腿骨の補正



** ＜使用方法等に関連する使用上の注意＞
（1） 滅菌前及び使用前に、全ての器械に損傷、変形等の異常がないか点検すること。
（2） 使用前に必ず洗浄・滅菌すること。
（3） 折損、曲がり等の原因になり得るので使用時に、必要以上の力（応力）を加えないこと。
（4） MBT ティビアルインパクターは、インプラントが把持できていることを確認してから使用すること。また、使用前後にインプラントとの接触部（コーン部、プレート部）に破損が無いことを確認すること。
（5） 付着した破片、組織、骨片は除去し、洗浄・消毒すること。
（6） 外科医と手術室のスタッフは、器具および関連するインプラントについての適切な外科技術を十分に熟知していること。

**【使用上の注意】
1．重要な基本的注意
（1） 損傷・変形等がある器械は識別した上で返却すること。
（2） 滅菌は、正しく整備、校正及びバリデーションされた滅菌器を使用して、滅菌すること。
（3） 製造業者の指示に従って調した中性洗浄液（ pH7 ～ 9）を用いて、 10 分間超音波洗浄を行うこと。強アルカリの洗剤・消毒剤は、腐食の原因になるため、できるだけ使用を避けること。
（4） 金属たわし、クレンザー（磨き粉）等は、器具の表面が損傷するので、汚染物除去及び洗浄時に使用しないこと。
（5） 電気メスを用いた接触凝固は、術者が感電、熱傷の危険性があり、また、器械の表面を損傷する可能性があるので、 本品とともに電気メスを使用する際は注意すること。
（6） 本品がクロイツフェルト・ヤコブ病患者への使用及びその汚染が疑われる場合は、弊社にご連絡ください。

2．不具合・有害事象
（1）重大な不具合
破損・変形・摩耗等の不具合が現れた場合は使用を中止し、 適切な処置を行うこと。
（2）重大な有害事象
1）感染
2）塞栓（脂肪、血液等）
3）骨折
4）体内遺残
5）過敏症
（3）その他の有害事象
軟部組織（筋・靭帯・腱・血管・神経）の損傷

【保管方法及び有効期間等】
保管方法：室温保存

**【保守・点検に係る事項】
＜使用者による保守点検事項＞
（1） マイクロサージカル用インストルメントは他のインストルメントと分けて洗浄すること。
（2） 使用後は、分解が可能な器械は分解手順書を参照して分解し、損傷がないかどうかを点検すること。
（3） 洗浄に用いる洗剤は適切な酵素洗浄剤を使用すること。浸漬、洗浄、そそぎの際は、温かい（または室温の）精製水を使用すること。
※A※B:汚れた器械は 10 分間洗浄液に浸漬すること。
※C:汚れた器械は 10 分間洗浄液に浸漬すること。洗浄は、柔らかいブラシを使用しスレッド部、隙間や継ぎ目などの洗浄しにくい個所に注意を払い血液や異物等を落とすこと。
（4） 壊れやすい部分に気を付けて、曲げたり、器械の機能を損なわないように、柔らかいブラシ等で洗浄すること。器械にスライド機構やヒンジがある場合は、その部分を動かして残った血液や異物等を取り除くこと。また、管状形状の器械は、柔らかいナイロンブラシまたはパイプクリーナーを使用し、その後異物等を取り除くこと。
※B: 汚れを取り除いた後、中性洗剤で洗浄し、10 分間洗浄します。 また、刃先などの鋭利な部分が互いに触れないようにし、洗浄中に損傷しないようにしてください。
※C: 汚れを取り除いた後、中性洗剤で超音波洗浄し、10 分間洗浄します。 また、刃先などの鋭利な部分が互いに触れないようにし、洗浄中に損傷しないようにしてください。
（5） 器械は温精製水（ろ過、蒸留、脱イオン化等）で表面の汚れを完全に洗い流すこと。全てのルーメン、内部、スライド機構、ヒンジは動かしながら洗い流すこと。
（6） 最終洗浄後は、直ちに乾燥すること。できるだけフィルターを通した圧縮空気で内部を乾燥すること。
（7） できるだけ可動部に水溶性潤滑剤を使用すること。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者:
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
URL：depuysynthes.jp

製造業者:
・デピュー・インターナショナル社
（DePuy International Ltd）英国
・デピュー・オーソペディックス社
（DePuy Orthopaedics, Inc）米国

©J&J KK