器 40　医療用のこぎり

ライン電源式解剖用のこぎり

（ 販売名 ）　クリーンカット

警告

本器に接続される「ノコ」部分は刃物形状の為接触しないようにして下さい。


「電動ノコ」使用中は「ノコ」の部分に、切断目的物以外は絶対接触しないようにして下さい。

禁忌・禁止

本器において特に併用等における禁忌事項はありません。

＜本機器を使用する前に必ず付属の取扱説明書をお読みください＞

形状・構造

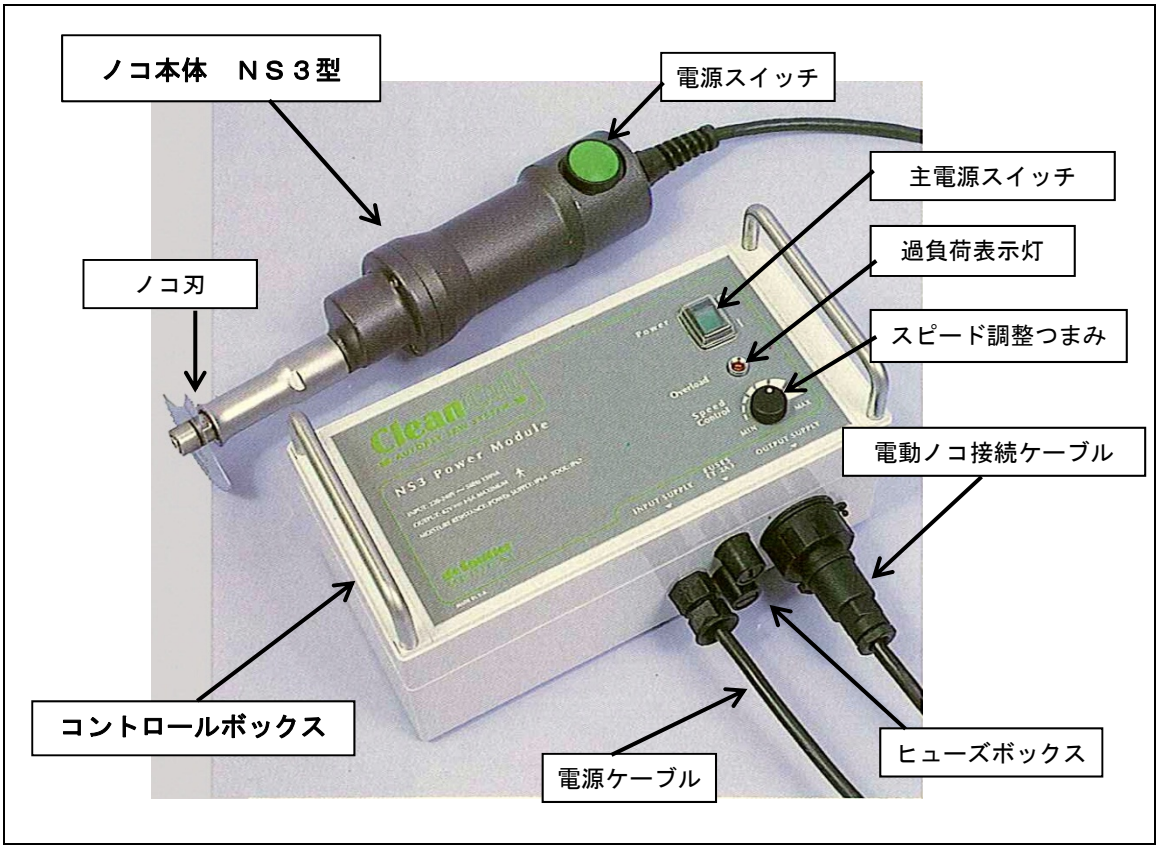

使用目的

本器は円形の回転刃をもつライン電源式の手持型器具であり。

本器は通常頭蓋上部の切除等、解剖時に用いる。

使用方法

組立、機器の準備

1. 機器の準備（組立）

解剖ノコのプラグをコントロールモジュールのソケットに差し込み、手でロックキャップを回して固定します。

用途に応じた刃を選択し、メインシャフトにある溝付きの先端にはめ込み固定ボルトを取り付け六角キーレンチで右回りに締めて固定します。

電源プラグを部屋の電源ソケットに差込み、コントロールモジュールの電源スイッチをＯＮに入れると電動ノコが使用可能になります。

2.使用

緑色スイッチを押すと刃が回転作動し、もう一度押すと止まります。

刃の振動スピードはコントロールモジュールの上にあるスピード調整つまみを回すと変えられます。

ノコを少しだけ持ち上げ横に動かしまっすぐ下に向けながら目的部位を切断します。

下方に切り込むだけでなく、何度か持ち上げたり横方向に動かしたりして作業を進めて下さい。

モーターの過負荷はコントロールモジュールの上にあるオレンジ色のライトの点滅によってモーターの負荷状況が表示されます。

負荷がかかりすぎると過負荷防止回路が作動し、装置は自動的にスイッチが切れますので２～３分後にノコを再始動させて作業を続けて下さい。

使用上の注意

- ◆ 替刃をつけたまま無造作に放置しないでください。
- ◆ 使用しない時はケース等に入れ、不用意に手が触れないように注意してください。
- ◆ 替刃は横方向に動かして拭き取らないで、手前から先端の方向に向けて拭いて下さい。
- ◆ 使用済みの替刃は汚染している恐れがあり注意して下さい。
- ◆ 使用済みの替刃を一般ごみと一緒にゴミ箱に絶対に捨てないでください。

動作原理

本器はコントローラユニットと電動のこぎり本体との構成からなり、コントロールユニットから専用プラグにより電気が本体に供給され、のこぎり内部のモーターが回転する。

コントロールユニットは、電気量を調節する機能が装備されており、この機能を利用することで、電動のこぎり本体の回転スピードを調節することが可能である。のこぎりの先端に接続された「刃：ノコ（切断状況に応じて交換)」が回転し目的物を切断、破断する。

保管方法

使用後はコントロール部など各構成機器を清拭、消毒し、電動ノコ本体を消毒し本体表面の屑、汚れを除去して保管してください。

ノコ刃が容易に触れないように遮蔽管理してください。

直射日光が当たる場所、高温多湿の場所を避けて保管してください。

使用期間（対応年数）

通常使用対応年数は５年です。　（弊社自己認証：定期点検実施、適正利用及び保管にて利用）

保守・点検

専門業者による機器の定期検査を１年に一回は実施してください。

使用後は電動ノコ本体を消毒し、本体表面の屑、汚れを除去してください。

(薬液に浸す場合は金属、樹脂に強腐食性の薬剤の使用は避けてください)

ノコ刃を消毒、洗浄し屑を除去してください。

包装（本体構成）

電動解剖ノコ NS3 型×１台	工具：六角キーレンチ・スパナ各１個
コントロールモジュール NS3-T×１台	ノコ刃標準替刃：各１枚５種類

資料請求先

白井松器械株式会社　貿易室

製造販売業者

販売元：白井松器械株式会社　大阪(本社)　東京、九州、つくば、湘南

〒540-0003　大阪府大阪市中央区森ノ宮中央 1-19-16

Tel:06-6942-4522　Fax:06-6942-4105

製造元：DE SOUTTER MEDICAL LTD.　（英国）

Halton Brook Business Park, Weston Road, Aston Clinton, Bucks HP 22 5WF,United Kingdom