
2016 年 8 月 4 日(第 4 版)(新記載要領に基づく改訂)　　医療機器届出番号　13B1X00049CC2000
＊2013 年 9 月 6 日作成(第 3 版)

機械器具 22　検眼用器具
一般医療機器　シノプトフォア（JMDN コード 36058000）

シノプトフォア

【形状・構造及び原理等】

＜形状・構造等＞

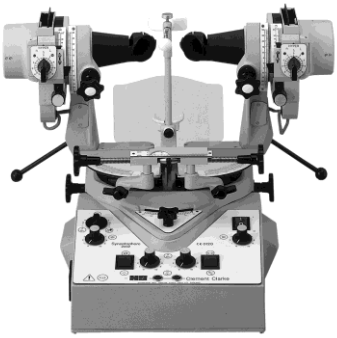

＜寸法＞

275×295×417mm

＜仕様＞

自動点滅装置　　:約 20～150 回/分
ﾊｲﾃﾞｨﾝｶﾞｰﾌﾞﾗｼ回転数:約 20～150 回転/分
自動点滅装置比:約 1/4 点灯～3/4 点灯まで可変器械部
スライド回転範囲:垂直に対し±20 度
スライド上下移動:正常位置に対し±10 度
鏡筒回転範囲
　a)仰角回転角度　　:30 度
　b)伏角回転角度　　:30 度
　c)輻輳角度　　:50 度
　d)開散角度　　:40 度
瞳孔距離調整幅　　:45～75mm
アゴ台調整幅　　:60mm

＜電気的定格等＞

・ 定格電圧／電源入力: 100V AC 50/60Hz ／ 50VA
・ 電撃に対する保護の形式･程度: クラスⅠ･B 型装着部
・ スライド照明用電球　　: 6.3V 3W
・ 残像用電球　　: 12V 24W

【使用目的又は効果】

＊ ＜使用目的＞

(1) 両眼視機能の検査、訓練
(2) 斜視の検査並びに測定
(3) 麻痺性斜視の測定

【使用方法等】

取扱説明書Ⅴ．各部操作の方法、Ⅵ.準備及び終了、Ⅶ.測定及び検査を参照。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞

(1) 定期的にキャリブレーションチェックをすること。[チェック方法は取扱説明書参照]
(2) 本製品で使用しているランプ及びヒューズは同規格の製品を使用すること。[取扱説明書Ⅰ.注意事項参照]

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

(1) 本品の使用者は、医師及び医師の指示を受けた人だけに限定すること。本器の使用は、如何なる場合も医師の指示に基づいて行うこと。
(2) 被検者は幼少児が対象となることが多いため、検査の説明を被検者に十分行なうこと。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管条件＞

常温に保管すること。但し、40℃以上の高温、5℃以下の低温及び 70%以上の湿度は避けること。

【保守・点検に係る事項】

本器の保守点検は取扱説明書Ⅷ.保守点検を参照。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

ジャパン フォーカス株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷 4-37-18
TEL (03)3815-2611　FAX (03)3815-7284

外国製造業者　Haag-Streit UK Ltd.　イギリス

緊急連絡先

ジャパンフォーカス株式会社　TEL (03)3815-2611
株式会社 JFC セールスプラン　TEL (03)5684-8531

取扱説明書を必ずご参照ください。