2016 年 5 月 1 日 （第 1 版）
届出番号 13B1X00049IG0001

医療用品 06　視力表及び色盲検査表
一般医療機器　色覚検査表（JMDN コード：35898000）

SPP 標準色覚検査表


【形状・構造及び原理等】

＜構成＞


(1)本品はアルバム型になっている。
(2)取扱説明「表の使い方」、検査表（第 1 部 先天異常用：19 枚、第 2 部 後天異常用：12 枚、第 3 部 検診用：10 枚）、記録用紙（判定指針つき）により構成されている。

＜外観図＞


第 1 部 先天異常用

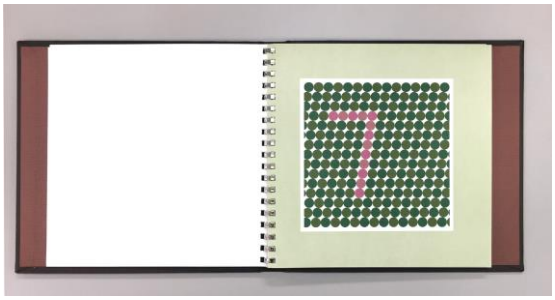

第 2 部 後天異常用

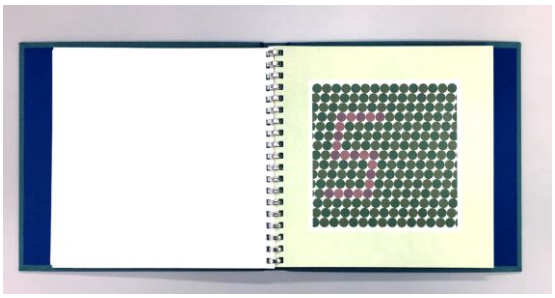

第 3 部 検診用

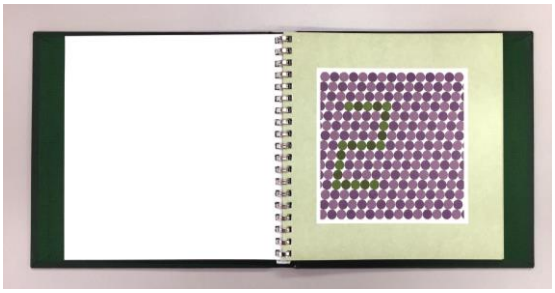

＜寸法・重量＞

検査表　120㎜ × 120㎜
外形寸法　200㎜ × 200㎜

＜原理＞

1 型色覚、2 型色覚、3 型色覚それぞれに特有の混同色をベースに、同色の濃淡、正常色覚で見て色度差の少ない色を適宜配して仮性同色表とし、色識別困難の検出精度を上げた〔主要文献 1）、2)参照〕。

【使用目的又は効果】

(1) 第 1 部先天異常用：主たる目的は、1 型・2 型色覚の検出、1 型・2 型色覚の判別。
(2) 第 2 部後天異常用：後天色覚異常（青黄、赤緑）、3 型色覚（先天性）の検出。
(3) 第 3 部検診用：色覚に表れる視機能障害の検出。

【使用方法等】

本品の「表の使い方」の欄を参照

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

(1)本品は、使用する前に必ず使い方の欄の内容を理解した上で取り扱うこと。
(2)本品の使用者は、医師及び医師の指示を受けた人，視能訓練士だけに限定すること。
(3)検査表の着色部分に指などで触れないこと。
(4)照明は、本品の「表の使い方」の欄の照明条件の項の記載に従うこと。白熱灯、直射日光は使用しないこと。
(5) 検査表に傷、汚れ、変色、及び色むらがある場合は、使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(1)常温に保管すること。
(2)退色や汚れを防ぐため、検査時以外は閉じておくこと。

【保守・点検に係る事項】

(1)検査表には手を触れないこと。
(2)よごれた場合は、柔らかい布で軽くはらうこと。
洗浄用の液体や溶剤は決して使用しないこと。

【主要文献及び文献請求先】

(1)田辺詔子，市川宏，深見嘉一郎，川上元郎：新しい色覚検査表の試作．臨眼 32:479-487，1978
http://medicalfinder.jp/doi/abs/10.11477/mf.1410207621
(2)田邊詔子，深見嘉一郎，市川宏：後天色覚異常用仮性同色表の製作に関する研究．臨眼 37:1197-1202，1983
http://medicalfinder.jp/doi/abs/10.11477/mf.1410209022
(3)田辺詔子，深見嘉一郎，市川一夫，石黒進，福田ゆみ：眼科的検診のための仮性同色表．臨眼 47:971-974，1993
http://medicalfinder.jp/doi/abs/10.11477/mf.1410908623

株式会社 医学書院
〒113-8719 東京都文京区本郷 1-28-3
TEL (03)3817-5600
※文献請求については、上記 URL からの無料ダウンロードをご利用ください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
ジャパンフォーカス株式会社

緊急連絡先
ジャパンフォーカス株式会社
TEL (03)3815-2611

株式会社 医学書院
TEL (03)3817-5600

「表の使い方」を必ずご参照下さい。