2019年2月(第1版)
届出番号:11B1X00014000002

機械器具51 医療用嘴管及び体液誘導管
一般医療機器 ガイドワイヤ挿入コネクタ 70286000

ダイモンインサーター

再使用禁止


【禁忌・禁止】

1) 再使用禁止

2) 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

1) 形状

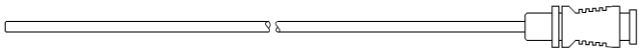

2) 原材料

針管:ステンレス

3) 寸法(針管)

外径:0.89㎜

内径:0.66㎜

全長:60㎜、110㎜

【使用目的又は効果】

ガイドワイヤを体内に挿入する手技において、カテーテル等のコネクタ部に接続してガイドワイヤの挿入を補助する。また、ガイドワイヤの先端の形状付けにも使用される。

【使用方法等】

使用方法1. ガイドワイヤ挿入コネクタとして使用する場合

1) 本品を包装から取り出す。
2) カテーテルのコネクタ部に本品を接続する。
3) 十分に湿潤させたガイドワイヤを、本品を介して挿入する。
4) ガイドワイヤがカテーテルの先端から血管内に挿入されたことを確認したら、本品をガイドワイヤの後端から抜去する。

使用方法2. ガイドワイヤの形状付けに使用する場合

1) 本品を包装から取り出す。
2) ガイドワイヤの先端に本品を添わせて、慎重にガイドワイヤを扱い任意の形状にする。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

1) ガイドワイヤを針基から挿入する際に、先端が入らなかったり、抵抗が認められた場合は、無理に挿入しないこと。[ガイドワイヤが破損、切断するおそれがある。]

【使用上の注意】

1. 不具合・有害事象

本品の使用に伴い、以下のような不具合が発生する場合がある。

1) 不具合
- 接続不良
- 併用機器の不通過
- 抵抗
- 破損
- キンク

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管方法

水濡れに注意し、直射日光および高温多湿を避けて保管すること。

2. 有効期間

製造後３年[自己認証(当社データ)による]

(使用期限は製品ラベルに記載)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

シルックス株式会社
〒333-0816 埼玉県川口市差間3-32-14
TEL:048-290-5278