

一般医療機器

機械器具29 電気手術器
単回使用電極クリーナー

コード 70654000

チップ クリーナー

再使用禁止

JTRF0013


【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

【形状・構造及び原理等】

1. 構造

[各部の名称]

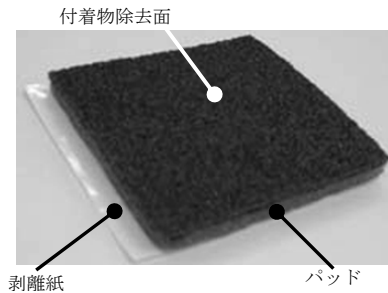

2. 原理

本品は、アクティブ電極の使用時、切開・凝固により、電極に付着した凝固血液や凝固組織等を除去する。

【使用目的又は効果】

本品は、アクティブ電極の使用時、電極に付着した炭化物等を除去するために用いる、単回使用のクリーナーである。

【使用方法等】

1. 剥離紙を剥がし、術野付近を避けてドレープ上に確実に貼り付ける。
2. 電気メスのメス先に付着した凝固血液や凝固組織等を、付着物除去面で取り除く。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ※※・アクティブ電極に樹脂コーティングが施されている場合は、その損傷を避けるために、付着異物だけを取り除くこと。

【保管方法及び有効期間等】

[保管の条件]

- ・水濡れに注意し、直射日光及び高温多湿を避けて室温で保存すること。

[有効期間]

- ・包装の使用期限欄を参照 [自己認証による]。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

■製造販売業者

株式会社ジェイエスエス

※大阪府中央区道修町1-6-7 TEL: 06-6222-3751

■外国製造業者

ファーマセプト社

(Pharma-Sep Ltd.)

イスラエル

株式会社ジェイエスエス