

*2022 年 3 月 1 日作成（新様式第 2 版）
2019 年 7 月 22 日作成（新様式第 1 版）

製造販売届出番号 40B1X10003GE0120

整形用機械器具（58） 歯科用技工用機器
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

※単回使用


イージークラウンアナログ

【禁忌・禁止】

①再使用禁止。

【形状・構造及び原理等】

アナログ

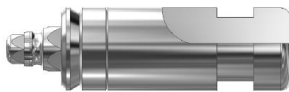

《原材料》

ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

本品は歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 印象用コーピングのついた印象に嵌め、石膏を注入し、顎模型を作製する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

他社製品と組み合わせて使用しないこと。
形状が異なるため適切な組み合わせが得られず、不具合および事故の原因となる恐れがある。

【使用上の注意】

- ① 術者は、手技等を熟知したうえで使用すること。
- ② 素材のステンレス鋼は鉄に比べて錆びにくい金属であるが、使用方法及び環境によって錆びることがあるので十分に注意すること。
- ③ 本製品を治療の目的以外に使用しないこと。
- ④ 本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

*【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

*製造販売業者：株式会社ジオメディ
福岡県福岡市博多区吉塚一丁目 38-28 ジオビル

TEL：092-409-4050

FAX：092-409-4051

外国製造業者：Samwon D.M.P
(サムウォン ディーエムピー)

外国製造所国：大韓民国