

2025 年 3 月 12 日作成(新様式第1版)


製造販売届出番号 40B1X10003GE0196

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科インプラント技工用器材 70757000

DENTIS UCLA システム

【形状・構造及び原理等】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科
技工用の器具である。

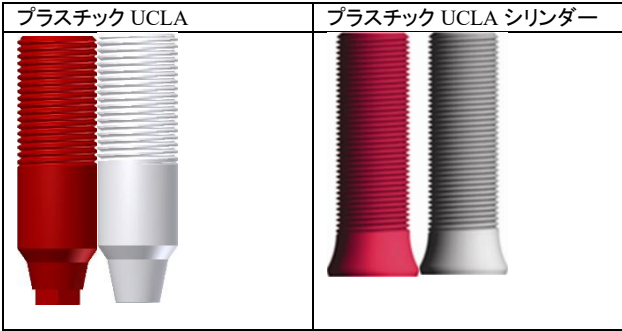

原材料:ポリアセタール

原理

専用アバットメントとの嵌合部及びアクセスホールを持ち、ワックス焼
却時に焼却されることにより、専用アバットメントに締結する補綴物を
作成する。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造材を作成するために用いる歯
科技工用の器具である。

【使用方法等】

1. 通法に従い、ワックスアップを行う。
2. 歯科鑄造により補綴物を作成する。

【使用上の注意】

- 1.本品は再使用禁止である。
- 2.梱包を取り外す前に、製品の外観に欠陥がある場合は、返品をする
こと。
- 3.製品の破損や変形を防止するため、取り扱いに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

室温にて保存する。

製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

選任製造販売業者：株式会社ジオメディ
連絡先：092-409-4050
外国製造業者：Dentis Co., Ltd. (デンティス)
外国製造業者国名：大韓民国

取扱説明書を必ずご参照ください。