

機械器具（58）整形用機械器具
一般医療機器 歯科用インプラント技工用器材 70757000

DENTIS ラボアナログ

【禁忌・禁止】

- 1. 併用する医療機器がある場合は、併用する医療機器の添付文書を必ず合わせて参照すること。
- 2.適切な術前診断、治療計画を行った上で、メーカー指定の器具等を使用すること。

【使用上の注意】

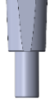
- 1.梱包を取り外す前に、製品の外観に欠陥がある場合は、返品する必要がある。
- 2.製品の破損や変形を防止するため、取り扱いに注意すること。

【保管方法及び有効期間等】

室温にて保存する。

【形状・構造及び原理等】

本品は、以下のものから構成される。

オクタアバットメント ラボアナログ	フィクスチャラボア ナログ	ソールアバットメント ラボアナログ
		
O-リングアバットメ ントラボアナログ	Mini ソールアバット メントラボアナログ	Mini フィクスチャラ ボアナログ
		
MU ストレートアバ ットメントデジタルラ ボアナログ	MU Angled アバット メントデジタルラボ アナログ	MU アバットメントデ ジタルラボアナログ
		
デジタルラボアナロ グスクリュ	デジタルラボアナロ グ	
		

原材料:ステンレス鋼、チタン合金

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用インプラントの上部構造を作製するために用いる歯科
技工用の器具・材料である。

【使用方法等】

使用前に、本品をオートクレーブで滅菌する。

(滅菌条件:132℃4 分間滅菌、30 分乾燥)

- 1. 使用前に製品に異常がないかを確認する。
- 2. 通法に従い適切に使用する。

取扱説明書を必ずご参照ください。