**2021 年 6 月改訂（第 03 版）
*2020 年 12 月発行（第 02 版）
届出番号：15B1X10003000063

医療用品（03）手術用手袋及び指サック
一般医療機器 単回使用指保護具 JMDN コード 35073000

Uni-Cot（ユニコット）

再使用禁止

**【警告】
1. 本品の使用の際は、血液や体液の取り扱いに関する一般的な注意事項や感染対策事項を遵守すること。
2. 本品による止血は 90 分以内とすること。［長時間使用すると後遺症を残す恐れがある。］
3. 使用後は本品が完全に取り外されていることを確認すること。

**【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止［再使用すると感染症や疾病を引き起こす恐れがある。］
2. 再滅菌禁止
3. 本来の使用目的と異なる用途での使用はしないこと。
4. 本品の加工および改造等は絶対に行わないこと。
5. 重度の怪我をしている患者に本品を使用する際は、更なる怪我を引き起こさないように、医学的判断のもとに行うこと。

【形状、構造および原理等】

1. 材料
シリコン
2. 形状、構造




3. 原理
本品が患部に適合することを確認した上で、本品を患部よりも中枢側に装着する事により、均一かつ適度な圧迫が患部に加えられ、止血が可能となる。


【使用目的】

手もしくは足の指の止血のために用いる。


*【使用方法】

1. 本品が患部に適合するか確認する。
2. 片手もしくは両手で本品を引き伸ばしながら、患部よりも中枢側にスライドさせ、止血する。

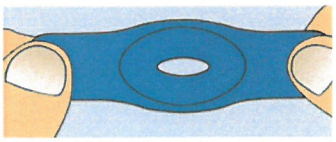


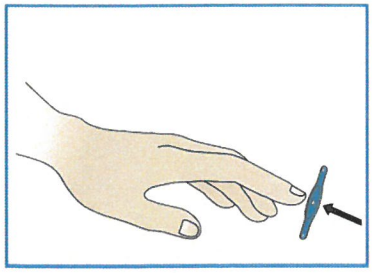

3. 止血時間が 90 分を越えないように注意する。

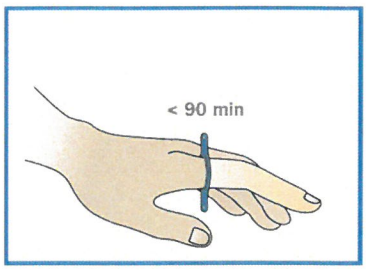

**4. リング部をハサミ等で切断し取り外す。
その際、端を部分的に切り取るのではなく、完全に切断して指から外す。

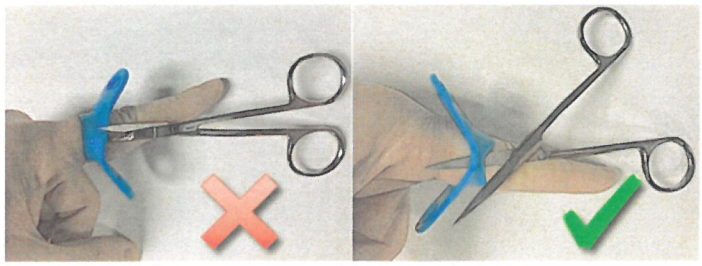

**【使用上の注意】

- 本品は滅菌済み単回使用製品であり、1回限りの使用で使い捨て、再使用しないこと。
- 包装の破損したもの、開封済みのもの又は水濡れしたものは使用しないこと。
- 包装を開封したら、速やかに使用すること。
- 本品を使用する前に各部に異常がないか確認し、異常が認められたものは使用しないこと。
- 使用時に組織を傷つけないように注意する。
- 患部のサイズに合わない場合は使用しないこと。［過剰な圧力をかけると組織を傷つける恐れがある。］

〈安全な廃棄方法〉
本品は生分解性ではないため、使用後には汚染されていることを考慮する必要がある。地域のガイドラインに従って慎重に廃棄すること。

【保管方法】

1. 本品を保管する場合は、高温・多湿を避け、塵や埃の無い清潔な場所に保管すること。
2. 室温下で、水濡れに注意し、直射日光を避けて保管すること。

【滅菌期限】

包装に滅菌期限を記載している。滅菌期限を過ぎたものは使用しないこと。

【包装】

20 個/箱

【製造販売業者および外国製造業者】

製造販売業者：JMR 株式会社
〒959-0511 新潟県新潟市西蒲区大原 3061
Tel: 0256-77-8808、 Fax: 0256-77-8809
E-mail: info@jmr-lab.com

外国製造業者：MAR-MED