【別紙 9】

2023年11月（第1版）　　製造届出番号：13B2X10479302033

医療用品(16)　体温計

一般医療機器　液体金属毛細管体温計　　JMDN コード：71091001

体温計(水銀フリー)　ME099

【警告】
●乳幼児/子供だけで使わせないでください。
{噛んで割ったり飲み込んだり、けがをする可能性があります。}
●落としたり、強いショックを与えないでください。
{本器はガラス製であり、計測不良・破損の原因となる恐れがあります。}

【禁忌・禁止】

・検温結果の自己診断、治療は危険ですので医師の指導に従ってください。

（自己診断は、病気が悪化する原因になります。）

・人の検温以外に使用しないでください。


・本製品は脇の下用の体温計です。

脇の下以外（耳など）で検温は、しないでください。

・乳幼児の手の届かないところに保管してください。

【形状・構造及び原理等】

・形状・構造

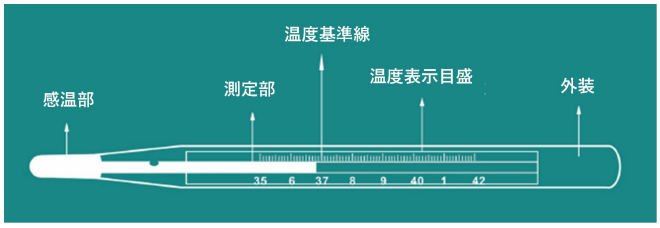

・構成

付属品

収納ケース

取扱説明書

・寸法/重量

サイズ	高さ(cm)	長さ(cm)	厚み(cm)
フリー	0.9	11.8	0.7

・原理

本製品は、上部と下部が密閉されたガラス製の細い中空管にガリウム合金等の液体金属が充填された構造で、毛細管原理に基づいて機能し、熱によって目盛付きカラムに充填された媒体が比例的に膨張します。

・仕様

⑴　測温範囲：35.6℃～42.0℃

⑵　保証された精度：＋0.1/－0.1℃

⑶　環境にやさしいガリウム合金等の液体金属を採用しています。

⑷　簡単な洗浄と硝子体の安全な消毒により衛生的な状態に保つことが可能です。

⑸　収納ケース付き

【使用目的又は効果】

感温部を脇の下に接触させて、人の体温を測定し、一定時間後に最高温度を表示します。

【使用方法等】

⑴ ガリンスタン液柱が36℃未満に下がっていることを確認し、下がっていない場合には体温計を振って液柱を下げます。

⑵ 体温計の感温部を脇の下に挿入し密着させます。そのまま5分以上検温します。温度上昇には個人差がありますので、より正しく体温を検温するには、約10分間温度変化がなくなるまで測り続けてください。また、測定中は口を開けず、鼻で呼吸してください。（会話も避けてください。）

⑶ 所定時間経過後、液柱の最上部を目盛りで確認し、測定温度を読み取ります。

⑷ 使用後は液柱を36℃未満に下げておきます。

【保管方法及び有効期間等】

1．保管方法

⑴ 次のようなところに保管しないでください。

・水のかかるところ。

・高温多湿のところ、直射日光があたるところ、暖房器具のそば、ほこりが多いところ、塩分などを含んだ空気の影響を受けるところ。

・振動、重圧、衝撃（運搬時を含む）のあるところ。

・化学薬品の保管場所や腐食性ガスの発生するところ。

⑵ 保管環境条件：－15℃～39℃

2．耐用期間

標準的な使用期間：無期限（ガラスの破損が無い場合）

【使用上の注意】

⑴ 周囲温度が－15℃～39℃の範囲で使用してください。

⑵ 検温中、感温部を検温する部位に密着させるように固定し、空隙はつくらないようにしてください。また、大幅に動かさないでください。

⑶ 起床直後、床の中で検温してください。

⑷ 本体を噛まないでください。

⑸ 本体や収納ケースに強い衝撃を与えたり、落としたり、踏んだりしないでください。

【保守・点検に係る事項】

⑴故障（破損）した場合は勝手に修理、分解せず、製品サポート窓口にご連絡ください。

⑵ 本体と収納ケースを洗う際には、水で洗ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、水で洗った後、洗剤をよく拭き取ってください。

⑶ 消毒する場合は、本体を消毒用アルコール綿で清拭して自然乾燥させてください。

⑷ 消毒液等に浸さないでください。

⑸ 超音波洗浄はしないでください。

⑹ 熱湯消毒はしないでください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

〈製造販売業者〉

JUST MATCH株式会社

東京都新宿区矢来町１１１

TEL. 03-5358-9209

〈製造業者〉

Shenzhen Zhiyi Technology Co., LTD (中国)