2019 年 1 月 18 日　（第 1 版）　　認証番号：　231ADBZX00007000

機械器具 51　医療用嘴管及び体液誘導管

管理医療機器　血管造影用活栓（JMDN コード：32172002）

シーマン耐圧活栓

再使用禁止

【禁忌・禁止】


使用方法

・再使用禁止
・本品はポリカーボネートを使用しているため、脂肪乳剤及び脂肪乳剤を含有する製剤の投与時に使用しないこと。［本品が破損する可能性がある。］

【形状・構造及び原理等】

形状

＜三方活栓＞
耐圧性能：1050psi (7239kPa)

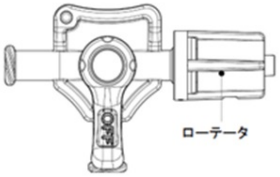

【使用目的又は効果】

特定の器官系又は体部の血管のＸ線撮影における可視化のため、造影剤を脈管系に注入する際に用いる。輸液ラインの流路を切り替えるための器具である。

【使用方法等】

使用方法

1.無菌的に本品を取り出す。
2.カテーテル又はチューブ等に接続し、確実に固定する。
3.必要に応じてハンドルを操作し、造影剤の流出を調節する。

使用方法等に関連する使用上の注意

1.併用する医療機器との接続は確実に行うこと。ただし、過度の締め付けは破損の原因となるので注意すること。
2.使用前にハンドル等が正常に機能することを確認すること。
3.耐圧を超える圧をかけないこと。［耐圧を超える圧をかけた場合、薬液等が漏出したり、構成品が外れたりする可能性がある。］
4.薬液等が流れる方向にハンドルが操作されていることを確認すること。

【使用上の注意】

重要な基本的注意

1.使用前に、システム内を生理食塩液でフラッシュする際、閉塞、液体漏れ及び空気の混入等の異常がないことを確認すること。
2.システム内に空気が無いことを確認すること。空気がある場合は、完全に抜き取ること。
3.使用中は本品の破損、接続部のゆるみ及び薬液等の漏れ等について、定期的に確認すること。
4.ひび割れが確認された場合は、直ちに新しい製品と交換すること。

不具合・有害事象

重大な不具合

・漏れ
・接続不良
・破損

重大な有害事象

・塞栓（空気、組織、血栓症）
・薬剤等に対するアレルギー症状
・感染症

【保管方法及び有効期間等】

保管方法

水濡れに注意し、直射日光、高温多湿及び衝撃等を避けて保管すること。

有効期間

製品ラベルに表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

［製造販売業者］
スーガン株式会社
TEL: 06-6354-6181
［製造業者］
三矢メディカル株式会社

ご使用に際し、ご不明な点などありましたら、発売元までお問い合わせください。

［発売元］
信頼をかたちに
シーマン株式会社
大阪市北区東天満 1 丁目 12 番 10 号
http://www.sheen-man.co.jp
TEL. (06)-6354-7702　FAX. (06)-6354-7114