

# MDT エックス線プロテクター

## \*【形状、構造及び原理等】

患者、術者、又は他の人員の体の一部を医療又は歯科における放射線被曝から保護するための衣類であり、前掛状、コート状、エプロン状、頸部及び甲状腺を覆う衿状などの様々な種類がある。本品は一般に薄い1枚の鉛又は鉛と同等の材料を覆う外部カバーで構成される。

## 1. 種類

本品は、用途により使い分けられるために、34種類の形状・サイズがある。

モデル	胸囲	長さ
Front aprons Small	90cm 以上	100cm
Front aprons Medium	100cm 以上	100cm
Front aprons Large	110cm 以上	100cm
Coat aprons Male Small	90cm 以上	100cm
Coat aprons Male Medium	100cm 以上	100cm
Coat aprons Male Large	110cm 以上	100cm
Coat aprons Male X-Large	115cm 以上	105cm
Coat aprons Female Small	85cm 以上	100cm
Coat aprons Female Medium	90cm 以上	100cm
Coat aprons Female Large	95cm 以上	100cm
Coat aprons Female X-Large	100cm 以上	105cm
Vest & Kilt aprons Male Small	90cm 以上	57cm+59cm
Vest & Kilt aprons Male Medium	100cm 以上	62cm+64cm
Vest & Kilt aprons Male Large	110cm 以上	65cm+67cm
Vest & Kilt aprons Male X-Large	115cm 以上	68cm+70cm
Vest & Kilt aprons Female Small	85cm 以上	51cm+55cm
Vest & Kilt aprons Female Medium	90cm 以上	55cm+58cm
Vest & Kilt aprons Female Large	95cm 以上	56cm+61cm
Vest & Kilt aprons Female X-Large	100cm 以上	57cm+63cm

モデル	幅	高さ
Head protection XS/S	55/56cm	10cm
Head protection M	57/59cm	10cm
Head protection L/XL	59/61cm	10cm
Head protection XXL	62/63cm	10cm
Total headcap	30cm	35cm
Thyroid protectors TV-2	64cm	14cm
Thyroid protectors TM-3	64cm	14cm
Thyroid protectors VIPE	51cm	10cm
Thyroid protectors TS-4	52cm	11.5cm
Shoulder protection DSP-1	46cm	39cm
LLP leg part	39.5cm	50.5cm
LLP foot part	32.5cm	20.5cm
Patient apron Small	35cm	30cm
Patient apron Medium	40cm	35cm
Patient apron Large	45cm	40cm

## <オプション品>

Thyroid protectors 用カバー

- ・TH cover for TM-3
- ・TH cover for VIPE
- ・TH cover for TS-4


固定用ベルト

- ・Comfort belt S/M
- ・Comfort belt L/XL
- ・Comfort belt XXL

ハンガーラック

- ・Strage racks MAR-M5
- ・Strage racks MAR-M10

## 2. 外観

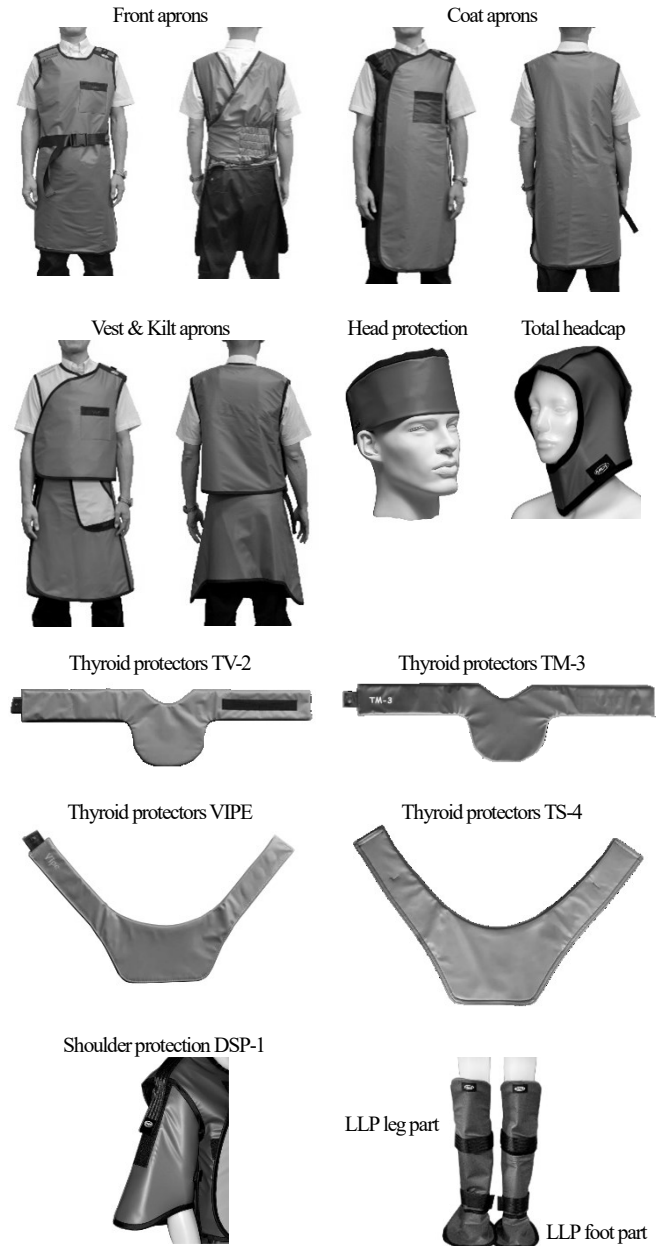

## 3. 原材料

- プロテクター : ポリウレタン、ポリエステル、ナイロン、鉛  
ベルト : ポリエステル、ポリカーボネート

**【使用目的又は効果】**

本品は、診断や治療のための医科/歯科処置における不必要な放射線被曝から患者、術者、又は他の人員の体の特定部分を保護するために使用する。

**【使用方法等】**

本品の着用は身体の大きさに適合するものを使用すること。  
取扱説明書を参考に正しく着用すること。

**【使用上の注意】****<重要な基本的注意事項>**

- ・ 防護具に損傷の認められたものは使用しないこと。[正常な X 線遮蔽性能が保たれていない可能性がある]
- ・ 衝突、転倒などによる衝撃が加わった場合は、直ちに使用を中止し、点検すること。[内部遮蔽材が損傷している可能性がある]
- ・ 本製品は、汗や水等で湿ったとき、摩擦により色落ちし、他の衣料に色に移る可能性がある。
- ・ 使用状況、使用頻度により、内部の遮蔽材が脱落、ひび割れを起こす可能性がある。着用時は視覚・触覚検査により、異常の有無を確認するとともに、異常が発見された場合は、直ちに使用を中止すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

専用に設計されたハンガー及びラックに掛けて保管してください。  
有効期間の定めなし

**【保守・点検に係る事項】**

70%イソプロピルアルコールを浸した清潔な布で、表面を清掃してください。

**【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】**

<製造販売業者>

スター・プロダクト株式会社  
電話:03-3812-6005

<製造業者>

MDT X-RAY B.V.  
オランダ