*2026 年 10 月（第 2 版）
2025 年 10 月（第 1 版）

承認番号：23000BZX00252000

機械器具 12　理学診療用器具
高度管理医療機器　体外衝撃波疼痛治療装置　71029000
特定保守管理医療機器／設置管理医療機器　**デュオリスＳＤ１　ウルトラ**

【警告】
〈使用方法〉
・治療領域をあらかじめ決定し、ハンドピースを正確に配置すること［十分な治療効果が得られない可能性があるため］

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1.　悪性腫瘍のある部位に使用しないこと［腫瘍に影響を及ぼす可能性があるため］。
2.　妊婦の腹部に照射しないこと［胎児に悪影響を及ぼす可能性があるため］

【形状・構造及び原理等】
1.　構成
(1) 本体
(2) ハンドピース
(3) スタンドオフ（Ⅰ及びⅡの計2種類）
(4) タブレット

2.　各部の名称
(1) 本体


＜全面＞



＜側面＞



＜背面＞

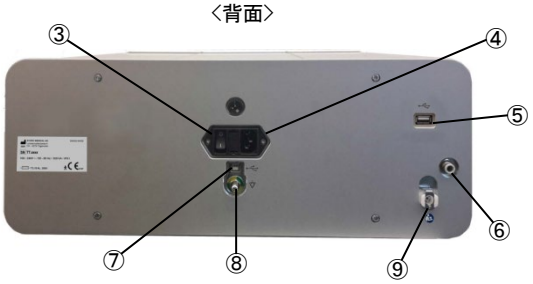


(2) ハンドピース(SEPIA)


＜全体図＞



＜治療ヘッド拡大図＞

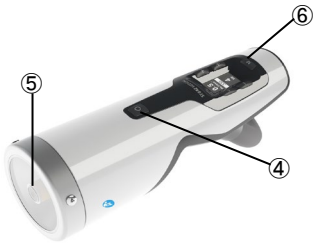

＜ハンドピース操作画面＞

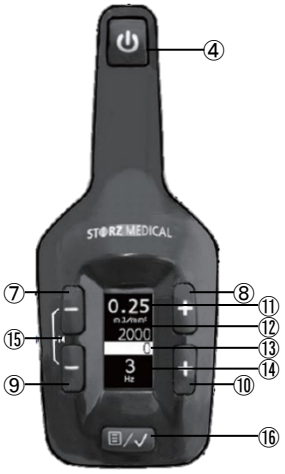

(3) スタンドオフ

1)スタンドオフⅠ　　2)スタンドオフⅡ




3) 締め具




<スタンドオフ装着時>



(4) デュオリス ＳＤ１ ウルトラ専用タブレット(オプション品)

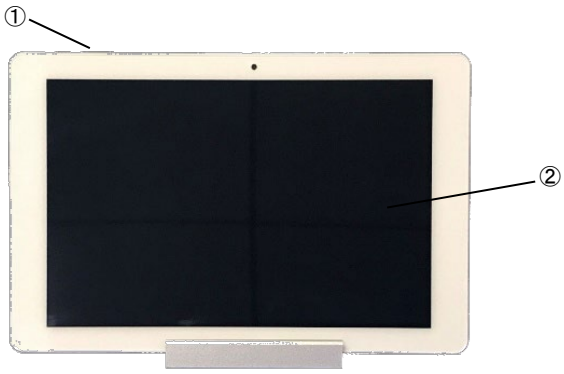

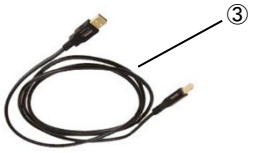

3. 各部の名称及び機能

(1) 本体

	名　称	機　能
①	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽﾎﾙﾀﾞｰ	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽを保持する
②	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽｺﾈｸﾀ（本体側）	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽを接続する
③	主電源ｽｲｯﾁ	主電源をｵﾝ･ｵﾌする
④	主電源ｺﾈｸﾀ	主電源ｹｰﾌﾞﾙを接続する
⑤	USBｺﾈｸﾀ（ｿﾌﾄｳｪｱのｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ専用）	ｿﾌﾄｳｪｱのｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ時にのみ、USBﾒﾓﾘｽﾃｨｯｸを接続する
⑥	通気ﾊﾞﾙﾌﾞ	水回路に不具合が生じた際に水を本体外に逃がすﾊﾞﾙﾌﾞ
⑦	USBｺﾈｸﾀ（ﾀﾌﾞﾚｯﾄ専用）	ﾃﾞｭｵﾘｽSD1　ｳﾙﾄﾗ専用ﾀﾌﾞﾚｯﾄを接続する
⑧	等電位化ｺﾈｸﾀ	等電位化ｹｰﾌﾞﾙを接続する
⑨	水ﾎｰｽｺﾈｸﾀ	給水用ｳｫｰﾀｰﾊﾞｯｸの水ﾎｰｽを接続する

(2) ハンドピース

	名　称	機　能
①	治療ﾍｯﾄﾞ	電磁誘導方式にて衝撃波を発生させる
②	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽｺﾈｸﾀ	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽを本体へ接続する
③	ﾛｯｷﾝｸﾞｽｸﾘｭｰ	ﾊﾝﾄﾞﾋﾟｰｽｺﾈｸﾀを固定する
④	照射ﾎﾞﾀﾝ	衝撃波の照射を行い、ｵﾝ/ｵﾌする
⑤	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ膜	患者の体に衝撃波を伝達する締め具とﾈｼﾞ固定部分によって固定されており、許可された特別な道具を使用した上でのみ、解体することができる
⑥	表示・操作画面	機器の操作を行い、作動状況を表示する
⑦	ｴﾈﾙｷﾞｰﾚﾍﾞﾙ減少ﾎﾞﾀﾝ	ｴﾈﾙｷﾞｰ束密度を減少させる
⑧	ｴﾈﾙｷﾞｰﾚﾍﾞﾙ増加ﾎﾞﾀﾝ	ｴﾈﾙｷﾞｰ束密度を増加させる
⑨	衝撃波照射頻度減少ﾎﾞﾀﾝ	衝撃波照射頻度を減少させる(1 Hz 単位)
⑩	衝撃波照射頻度増加ﾎﾞﾀﾝ	衝撃波照射頻度を増加させる(1 Hz 単位)
⑪	ｴﾈﾙｷﾞｰﾚﾍﾞﾙ表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	設定されたｴﾈﾙｷﾞｰ束密度を表示する
⑫	設定衝撃波照射数ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	設定された衝撃波照射数を表示する
⑬	実衝撃波照射数表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	現在の衝撃波照射数を表示する
⑭	衝撃波頻度表示ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ	設定された衝撃波照射頻度を表示する
⑮	衝撃波回数表示ﾘｾｯﾄ(⑦＋⑨同時押し)	衝撃波回数をﾘｾｯﾄする
⑯	ﾒﾆｭｰ切替ﾎﾞﾀﾝ	ﾒｲﾝ画面に切り替える


(3) スタンドオフ(Ⅰ及びⅡの計2種類)

	名　称	機　能
①	ｽﾀﾝﾄﾞｵﾌ	患者の体に衝撃波を与える
②	締め具	ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ膜を固定する

(4) デュオリス ＳＤ１ ウルトラ専用タブレット（オプション品）

	名　称	機　能
①	電源ﾎﾞﾀﾝ	電源のｵﾝ/ｵﾌを切り替える
②	ﾀｯﾁｽｸﾘｰﾝ	機器の設定や操作を行い、 作動状況を表示する ・衝撃波ｴﾈﾙｷﾞｰの設定 ・衝撃波照射数の設定 ・衝撃波照射ﾓｰﾄﾞの設定 ・実衝撃波照射数の表示 ・総照射ｴﾈﾙｷﾞｰの表示
③	接続ｹｰﾌﾞﾙ	ﾀﾌﾞﾚｯﾄと本体を接続する

4. 発生源図

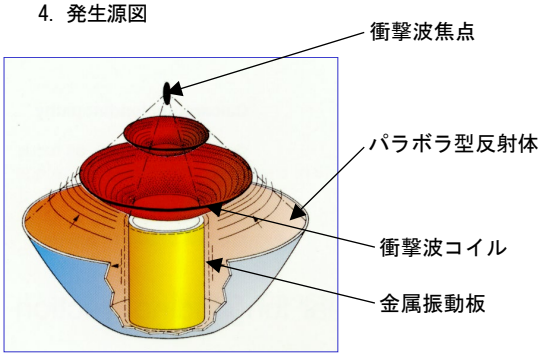

5. 作動・動作原理

衝撃波発生源は電磁誘導方式技術を用いて衝撃波を発生するものである。電気エネルギーのパルスを円筒型のコイルに流すと強い磁場が形成され、続いてコイル周囲の金属振動板に電磁誘導により別の磁界が発生する。これらの磁界が反発することにより、金属振動板にたわみが起こり、隣接する水中に圧力波を発生させる。発生源より水平方向へ発生した衝撃波はステンレス鋼製のパラボラ型反射体で収束され（上図）、水を充填した治療ヘッドから、カップリング膜、スタンドオフ、汎用のジェルを通して患者の皮膚へと伝播される。

6. 電気的定格

・電源電圧：100V
・周 波 数：50/60Hz
・電源入力：300VA
・電撃に対する保護の形式：ｸﾗｽⅠ機器
・電撃に対する保護の程度：B 形装着部

7. 衝撃波発生器の仕様

衝撃波発生方式：電磁誘導式

＊ 8. ハンドピース及びタブレットの設定パラメータ

・設定エネルギーレベル：0.01～0.35 mJ/mm^2
・最大衝撃波照射頻度：4 Hz（SEPIA ハンドピース）

【使用目的又は効果】

1. 使用目的

本品は、保存療法を 6ヶ月以上受けても功を奏さない難治性の足底腱膜炎患者に対する除痛のために使用される。圧痛を認める部位に、体外より衝撃波を非侵襲的に照射し、疼痛の除去・緩和治療を行う。

【使用方法等】

SEPIAハンドピースは、難治性の足底腱膜炎患者に対し使用され、スタンドオフは、Ⅰ及びⅡを使用する。

＜使用前＞

1. ハンドピースを本体右側のハンドピースコネクタに接続し、ロッキングスクリューを回して固定する。
2. ハンドピースホルダーにハンドピースを置く。
3. 電源コードをコンセントに入れ、主電源ケーブルを主電源コネクタに接続する。
4. 本体背面の主電源スイッチをオンにする。

＜タブレット(オプション品)を接続する場合＞

1. 本体背面のUSBコネクタ(タブレット接続用)に接続ケーブルを介して、専用タブレットを接続する。
2. タブレットの上面にある電源ボタンを押す。

＜安全性の確認＞

1. ハンドピースに気泡が混入していないかを確認する。気泡が混入している場合には、照射ボタンを右側にして、ハンドピースホルダー内に下向きに収め、10 分ほど待つ。
2. ハンドピースのカップリング膜全面にカップリングオイルを塗る。
3. 使用するスタンドオフをハンドピースにのせ、締め具で確実に固定する。
4. 衝撃波照射ボタンを押すよう促すメッセージが表示されるので、ハンドピースの照射ボタンを押して照射テストを行う。
5. ハンドピース操作画面またはタブレット(オプション品)にて、設定パラメータを確認する。必要に応じて、エネルギーレベルや衝撃波照射頻度を変更する。

＜使用中＞

1. 患者の衝撃波入射部位に汎用のジェルを塗り、治療部にハンドピースを押し当てて、照射ボタンを押す。
2. 照射ボタンを再度押すか、予め設定した衝撃波数に達すると照射が終了する。照射を続行する場合は、再度、照射ボタンを押す。
3. 続けて治療を行う場合には衝撃波回数表示リセットボタンを押して、照射衝撃波数をリセットする。
4. タブレットのタッチスクリーン又はハンドピース操作画面により、刺激頻度、刺激強度及び刺激回数の設定を行う。

＜使用後＞

1. タブレットを接続している場合、タブレット及び本体の主電源スイッチをオフにする。タブレットを接続していない場合、本体の主電源スイッチをオフにする。
2. スタンドオフをはずし、ハンドピースやスタンドオフから塗布した汎用のジェルやオイルを払拭する。
3. ハンドピースを取り外す。
4. 本品のハンドピース治療ヘッド内のコイルは必要に応じて交換することができる。

＜保管・管理方法＞

1. 石鹸水や刺激の少ない洗浄剤で機器を清拭し、保管する。
2. ハンドピースは表面消毒剤・洗浄剤で消毒し、保管する(使用できる洗浄剤・消毒剤の種類については取扱説明書を参照)。
3. 水回路の水は 6 ヶ月毎に交換する。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

1. 本品は、電磁両立性（ＥＭＣ）規格 EN60601-1-2 に準拠しており、標準的な医療設備において有害な干渉に対し適度な防御が行なえるように設計されているが、本品はラジオ波エネルギーを発生、使用、放射することがあり、指示に従って設置しなければ、近傍の他の機器に有害な障害を発生させる恐れがある。また、特定の設置状態なら干渉性がないという保証はない。本品の電源オン／オフによって確認することもできるが、本品が他の機器に有害な障害を発生させている場合は、以下の方法で干渉を是正させること。
   ・干渉を受けている機器の方向又は位置を変える。
   ・機器間の距離を空ける。
   ・本品の電源を、干渉を受けている機器が接続されているコンセントと異なるコンセントあるいは回線に接続する。

2. 使用に際しては、以下の事項に留意すること。
(1) 可燃性麻酔ガスと空気・酸素・窒素が混在する爆発の恐れがある場所で、絶対に本品を使用しないこと。
(2) EN60601 に準拠していない医療機器を本品に接続する場合には、当該機器を患者治療フィールド外に設置すること。
(3) 本品に装備されている電位等化コネクタは、各地域の規則に従って正しく接続すること。
(4) 設置面が十分に本品の重量に耐えられるかを確認すること。

3. 本品の使用中は、次の事項に注意すること。
(1) 本体に覆いをかけないこと。
(2) 装置本体及びハンドピース内部に液体が入らないように注意すること。

4. 本品の使用後は次の事項に注意すること。
(1) 使用後は、毎回ハンドピースを必ず消毒すること。
(2) 高電圧フィールドで修理作業を行う場合には、必ず製造業者が認定した修理技術者が実施し、修理作業を開始する場合には電源を切ってから、2 分間待った後に行うこと。

5. 本品は他の機器と一緒に設置・保管しないこと。他の機器と一緒に、あるいは他の機器の傍で使用する場合には、試験運転を行い、その際、技術仕様通りの操作が間違いなく行えるかを確認すること。

6. 本品を使用する際は、必ずスタンドオフを装着すること。装着にあたってはスタンドオフが変形しないように皮膚に接触させることに留意する。

＜相互作用＞
併用注意

名称	症状・措置方法	機序・危険因子
血液凝固阻止剤	出血 治療 7 日前より本薬剤を使用しないこと	衝撃波照射領域で、出血の危険が高くなる
植込み型除細動器 ・ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰﾘｰﾄﾞ	誤作動 ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰについてはｼﾝｸﾞﾙﾁｪﾝﾊﾞｰﾓｰﾄﾞに設定することを推奨	衝撃波によりﾍﾟｰｽ ﾒｰｶｰに影響を与え、誤作動が生じる危険がある

＜不具合・有害事象＞
1. 有害事象
－ 腫脹・発赤・血腫
－ 点状出血
－ 疼痛
－ コルチゾン治療を受けた部位での皮膚損傷

＜妊婦、産婦、授乳婦及び小児等への適用＞
1. 妊娠している患者の適応については、【禁忌・禁止】欄を参照のこと。
2. 小児に対する有効性及び安全性は確立されていない。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
保管条件　温度：0～60℃
湿度：5～95%（結露なきこと）
2. 耐用期間
使用耐用年数　　本体：15,000 操作時間
ハンドピース：500 万発
自己認証（当社データ）による
＊使用耐用年数は、保守点検及び必要に応じた修理・部品交換を行うことによって性能を維持できる期間を言う。
3. 交換部品のうち重要部品

部品名	交換頻度
衝撃波発生源ｺｲﾙ	200 万発ごと
ｽﾀﾝﾄﾞｵﾌ	硬化、変色等劣化時 最低、12 ヶ月ごと
水回路内の水	6 ヶ月ごと

【保守・点検に係る事項】
1. 使用者による保守点検事項
(1) 機能チェック
装置設置後、次に示す機能チェックを行うこと。
・装置本体及びハンドピースに破損がないこと。
・本品を起動させる
・エネルギーレベルを 0.2mJ/㎟に設定する。
・操作パネルのパラメータ画面の実衝撃波照射数をリセットする。
・照射頻度 4Hz で照射を行う。
・治療照射数カウンタに照射数が正しく表示されていることを確認する。

2. 日常のお手入れ
本品を衛生的に効率良く使用するために、下記の手順で定期的に清掃を行うこと。
(1) 装置本体のお手入れ
制御ユニットの外側を湿った布で拭く。必要に応じて、石鹸水や刺激の少ない洗浄剤を使用すること。
(2) ハンドピースのお手入れ
ハンドピースは各治療の後に必ず、十分に清掃、消毒を行うこと。
・スタンドオフを外す。
・ハンドピース及びスタンドオフから汎用のジェルや残ったオイルを払拭する。
・表面消毒剤でハンドピースを清拭する。

3. カップリング膜に植物性洗剤や植物性オイルを塗らないこと。
洗浄剤や消毒剤に対するカップリング膜の耐性は、使用する溶剤の成分によって異なるため、下記の一覧表の成分を一つでも含む洗浄剤や消毒剤は絶対に使用しないこと。

－ アニリン
－ ジメチルホルムアミド
－ 酢酸エチル
－ ジクロロメタン
－ N メチルピロリドン
－ 20%硝酸溶液
－ 20%塩酸溶液
－ 20%硫酸溶液
－ トリクロロエチレン
－ テトラヒドロフラン
－ トルエン

4. 専門業者による保守点検
製造販売元が認定した修理技術者による保守点検を下記のとおり実施する。
(1) 保守点検頻度　：　年 1 回以上
(2) 点 検 項 目　：　当社点検チェックシートに基づく

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者：
ストルツメディカル・ジャパン株式会社
〒272-0025 千葉県市川市大和田 1-14-1
電話：047-369-6443　FAX：047-369-6445

外国製造業者：
ストルツメディカル社　スイス
Storz Medical AG

サイバーセキュリティに関する情報請求先：
ストルツメディカル・ジャパン株式会社
サイバーセキュリティ担当
〒272-0025 千葉県市川市大和田 1-14-1
電話：047-369-6448　FAX：047-369-6445