

*2017年12月（第5版）
2015年7月（第4版）（新記載要領に基づく改訂）

機械器具 6 呼吸補助器
管理医療機器 呼吸回路用ガス供給用チューブ 70569000
酸素供給システム（酸素供給チューブ）

再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・再使用禁止

<使用方法>


- ・酸素供給以外の目的で使用しないこと
- ・本品を使用している近くでは火気厳禁とすること。[爆発や火災の原因となるため]

【形状・構造及び原理等】

本製品は下記の種類があります。

タイプ：酸素供給チューブ（7'）・2.1m

酸素供給チューブ（10'）・3.0m

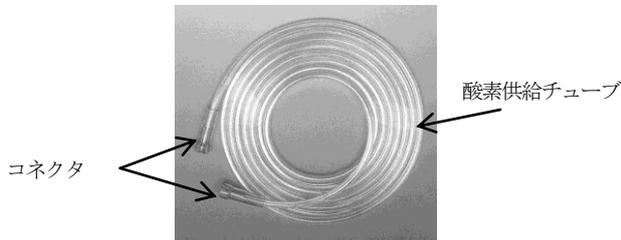

酸素供給チューブ	ポリ塩化ビニル
コネクタ	ポリ塩化ビニル

本品は、ポリ塩化ビニルを使用している（可塑剤はフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを不使用）。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

[製造販売元] 泉工医科貿易株式会社

*[製造元] ソルターラプス社
Salter Labs
アメリカ合衆国

[お問合せ先] 泉工医科工業株式会社 商品企画
TEL 03-3812-3254 FAX 03-3815-7011

***【使用目的又は効果】**

本品は、未滅菌品である。

（本品は酸素療法を行う際に、酸素又は濃縮酸素を供給する回路を構成する器具です。）

***【使用方法等】**

本品は単回使用製品であるので、1 回限りの使用で使い捨て、再使用しない。

用途に合わせて長さを選べます。搬送用、病室での使用に合わせてご使用下さい。チューブの内部はクローパルルーメンでキンクしにくい形状です。

***【使用上の注意】**

<その他の注意>

- ・本品を火気のあるところで使用しないで下さい。
- ・本品を使用する前に必ず正常に機能するか確かめてから使用して下さい。万が一、酸素が流れない、漏れがある場合は使用をすぐにやめてください。

***【保管方法及び有効期間等】**

<保管の条件>

- ・水のかからない場所に保管して下さい。
- ・気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分を含んだ空気などにより悪影響の生ずるおそれのない場所に保管して下さい。
- ・傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意して下さい。
- ・化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないで下さい。