

機械器具(46) 医療用絞断器
管理医療機器 単回使用デルマトーム用刃 (35134000)
Humeca コードレスデルマトーム用刃

再使用禁止


【禁忌・禁止】
再使用禁止。

製 造 業 者:ヒューメカ社
Humeca B.V.
国名:オランダ

【形状・構造及び原理等】

1. 形状・構造等

形状(代表例)

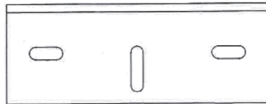

原材料:ステンレス鋼

2. 原理

本品は、デルマトームに取り付けて皮膚移植組織を採取するために用いる刃である。

【使用目的又は効果】

デルマトームに取り付け、皮膚移植組織を採取するために使用する。

【使用方法等】

併用するデルマトームに適切なサイズの刃を取り付けて、皮膚移植用の皮膚移植組織を採取する。

<組み合わせて使用する医療機器>

販売名	届出番号
Humeca コードレスデルマトーム	13B1X00089041002

【使用上の注意】

1. 重要な基本的注意

- (1) 本品の刃先は鋭利なため、取り扱いに注意すること。
- (2) 機器が故障するおそれがあるため本品は弊社が指定した製品以外に装着し使用しないこと。([使用方法等]の<組み合わせて使用する医療機器>の項参照)

2. 不具合・有害事象

- (1) その他の不具合
・破損

【保管方法及び有効期間等】

1. 保管の条件

高温、多湿、水濡れ、及び直射日光を避けて保管すること。

2. 有効期間

本品の外箱の表示ラベルに記載。[自己認証による。]

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者:センチュリーメディカル株式会社

電話番号:03-3491-2064

FAX 番号:03-3491-1857