＊2024年9月（第2版）
2022年12月（第1版）

医療機器届出番号13B2X00129000001

医療用品 04 整形用品
一般医療機器　液体包帯（JMDN：33584000）


# オラプラ液体包帯口腔用

再使用禁止

**【禁忌・禁止】**
再使用禁止

**【形状・構造及び原理等】**

**1.形状**

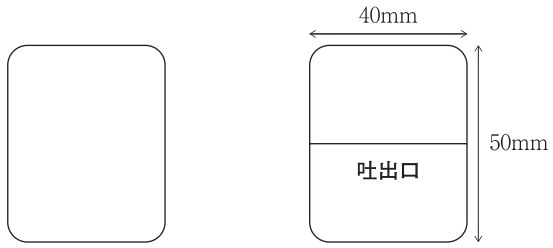


分包品1包：1回分

**2.製品概要**

本品は、白色から淡黄色の微小粒子が分散した軟膏で、口腔内粘膜に塗布すると唾液などの水分と反応して被膜を形成し、表面の保護を行う口腔内液体包帯である。

**3.成分**

ゲル化炭化水素、アルギン酸ナトリウム、カルボキシビニルポリマー、乳酸アルミニウム


**【使用目的】**

口腔内粘膜の傷口保護を目的として使用する包帯剤である。

**【使用方法等】**

1回につき分包品1包から本品を適量取り出し、口腔内の患部に塗布する。総使用量は1日最大3回分（3包）までとする。

1.容器の吐出口の記載がある面を綿棒等に向け、下図のように容器をVの字に折り曲げて本品を取り出す。

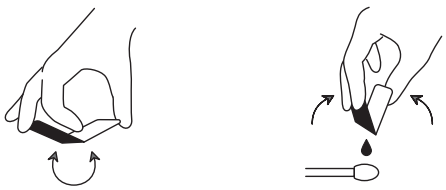

2.綿棒等にのせた本品を、口腔内の患部に塗布する。

**＜使用方法等に関連する使用上の注意＞**

・本品の塗布前に、口すすぎ・手洗い等を行い、患部・手指等を清潔にすること。
・本品は口腔内で時間が経つと自然に溶けてなくなるため、無理にはがさないこと。
・本品が手指等に付着して固まった場合は、水につけて柔らかくして落とすこと。
・分包品開封後、余った本品は廃棄すること。
・30日を超えて継続使用しないこと。

**【使用上の注意】**

**1.使用注意（次の患者には慎重に適用すること）**

薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人

**2.重要な基本的注意**

（1）小児に使用させる場合は、保護者の指導・監督のもとに使用させること。
（2）症状の悪化や異常が見られた場合は使用を中止し、医師に相談すること。

**【保管方法及び有効期間等】**

**1.保管方法**

室温保存
※直射日光の当たらない涼しいところで保管すること。小児の手の届かない場所に保管すること。

**2.有効期間**

4年（自己認証による）
使用期限は外箱に記載

**＊【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**

**製造販売元**
富士フイルム富山化学株式会社

**発売元**
株式会社モリタ
［お問い合わせ先］
問合せ窓口：株式会社モリタ　お客様相談センター
電話番号：0800-222-8020（無料）