本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、この添付文書をよく読んでからご使用ください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

＊＊2017年4月改訂（第4版）
＊2015年7月改訂（第3版）

認証番号 226ADBZX00116000

アメジストキズうるおいパッド

医療用品 4 整形用品　管理医療機器　家庭用創傷パッド
JMDNコード：71025000

再使用禁止

＊＊

⚠使用上の注意

⃠してはいけないこと　次の事項を守らないと現在の症状が悪化したり、治癒が遅れたりする可能性があります。

① 次の部位には使用しないでください。
(1) 感染が見られる傷。(例：発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、悪臭などの異常が認められる傷)
(2) 深い刺し傷や、筋肉・骨・腱が見えるような深い傷。
(3) ガラス・木片・砂・ほこり・衣類の繊維など異物が入り込んだ傷。
(4) 動物等に咬まれた傷。
(5) にきび、湿疹、虫ささされ、皮膚炎などの症状およびそれらをかきむしった傷。
(6) 目の周辺や粘膜。
(7) 怪我をしてから時間が経った傷および、かさぶたがすでにできている傷。
(8) 出血を伴う熱傷(やけど)、患部が白や黒に変色して感覚が無い重度の熱傷の可能性がある傷。
② 傷に塗布する軟膏・クリーム等の殺菌・消毒剤を本品と併用しないでください。使用した場合は水道水等で残さないようによく洗浄してください。(不必要な消毒は傷の治りを遅くすることがあります。)
③ 引っ張った状態で貼付すると皮膚障害(発赤、発疹、痒み、水疱、表皮の剥離など)やはがれの原因となる恐れがあります。
④ 本品を切って使用しないでください。
⑤ 個包装を開封してそのままにしておいた本品および、一度使用した本品の再使用はしないでください。
⑥ 2歳以下の乳幼児には使用しないでください。
⑦ 本品は皮膚の表面に使用する製品なので口に入れないでください。

相談すること　ご相談・診療の際は、この添付文書を持参ください。

① 次の人は本品使用前に医師または、薬剤師に相談すること。
(1) 糖尿病や血行障害の治療を受けている人。
(2) 絆創膏等によりかぶれやすい人や、アレルギー体質の人。
(3) 強い倦怠感を感じたり、発熱を感じたりするなど全身の状態がよくない人。
② 次の場合は使用を直ちに中止し、医師の診療を受けてください。
(1) 本品の使用により傷の悪化、化膿、感染(例：発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、悪臭などの異常が認められる傷)、傷の治りが悪い等の症状があらわれた場合。
(2) 数日間使用しても傷の治癒や改善がみられない場合または、悪化した場合。


【その他の注意】

① 本品は滅菌済みで、包装の破損等がない限り無菌性は保証されますが、包装が破損または汚損が認められたときは使用しないでください。
② 本品は強いこすれや、過度の発汗、運動による隙間の発生、水仕事、入浴またはプールなどで皮膚がふやけた場合には剥がれやすくなることがあります。
③ 患部の状態や個人の体質によっては、治癒後色素沈着や傷跡が残る場合があります。
④ 本品は開封後、直ちに使用してください。

【原理】

ハイドロコロイド素材は創傷からの体液(滲出液)を吸収・保持し、その部分がゲル状に白くふくらみ治癒に適した湿潤環境を整えます。体液(滲出液)は細胞の成長や再生を促す因子＝「傷を治す成分」を含み傷の治癒に重要な役割を果たしています。
注：ハイドロコロイド素材は、水分を吸収すると色が白く変わってふくらみますが、製品の異常ではありません。また、本品を貼付した部分が発汗した場合、水分を吸収してハイドロコロイドが白くなることがあります。

〈イメージ図〉

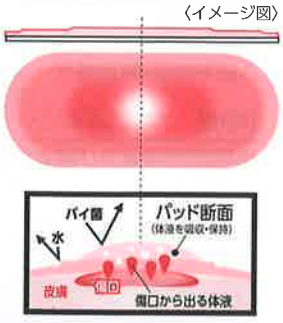


【構成】

本品は吸収層であるハイドロコロイドパッドと背面の剥離紙から構成され、滅菌紙で個包装されています。

＊【使用目的または効果】
軽度の切り傷、すり傷、刺し傷、かき傷、あかぎれ、さかむけ、靴ずれ等の創傷および、軽度の熱傷の“保護”、“湿潤環境の維持”、“治癒の促進”、“痛みの軽減”を図る。

＊＊【使用方法等】本品は通常の救急絆創膏とは異なりますので、用法を確認して正しくご使用ください。
・3歳以上の幼児・小児に使用させる場合は保護者の監督のもと使用してください。
・貼付前に傷およびその周囲の皮膚を水道水で洗浄し、水気をよく拭き取って清潔にしてください。
・貼付前に適用部位の止血を行ってください。
・傷より大きいサイズの製品を使用してください。

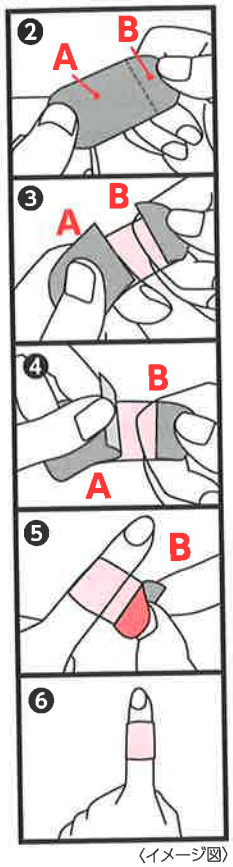

〈イメージ図〉

❶ 個包装のあけ口(OPEN)をつかんでゆっくりと開封してください。
※本品を両手で約1分間温めると貼り付けた時に、皮膚へのなじみがよくなります。
❷ 剥離紙を上面にし、両手でお持ちください。
※大きい方を剥離紙A、もう一方(小さい方)を剥離紙Bとする。
❸ 本品を左右に軽く引っ張り、剥離紙を製品から浮かせるように押し上げてください。
❹ 剥離紙Aを粘着部分に触れないようにつかみ、ゆっくりとはがしてください。
❺ 本品の中央に傷口があたるように貼り付け剥離紙Bをはがしてください。
❻ 本品の端をしっかり皮膚に密着させ、全体をなじませるように手で押さえてください。
※本品を傷にあてた後、傷や傷口のまわりに、均一に、そして確実に密着するように、本品を上から手のひらで約1分間押さえて温めてください。

貼付後しばらくすると傷口からにじみ出てくる体液(滲出液)を本品が吸収・保持し、その部分がゲル化して白くふくらみます。傷が治るにしたがい体液の分泌が減っていくため貼り替えるたびに白いふくらみは小さくなります。

・体液(浸出液)が多く、貼り付けた本品から漏れたり、汚れたりした場合は、本品をはがし、傷を水道水などでよく洗浄してから新しいものに貼り替えて、傷口を清潔に保ってください。
・指などに貼り付ける際はきつく巻かないように注意してください。
・貼付中は毎日傷の状態を観察し、感染(例:発赤、膿の滲出、発熱、腫れ、悪臭など)が認められる場合は直ちに使用を中止し、医師に相談して適切な治療を受けてください。
・ハイドロコロイドが体液(滲出液)を吸収しきれない状態が続くと、浸軟(ふやけ)を起こす場合があります。浸軟した状態で本品をはがすと表皮剥離を起こす場合があります。本品の端まで白くなった場合はすみやかに新しいものに貼り替えてください。最長5日間の連続貼付が可能ですが感染の症状が認められた場合は直ちに使用を中止してください。
・製品にくぼみやムラがみられることがありますが、製造過程で生じるもので品質上問題ありません。
・茶色っぽい小さな点は原料由来のもので品質上問題ありません。

【はがし方】
はがすときは、まわりの皮膚および傷口への負担を軽くするために皮膚が持ち上がらないように押さえ、毛の流れに沿ってゆっくりと本品を伸ばしながらはがしてください。
はがれにくい場合は、温水を皮膚と本品との隙間に流し込むようにするとはがれやすくなります。

【保管方法及び有効期間等】
1.保管方法　直射日光を避け、湿気の少ない涼しい場所で保管してください。
乳幼児・小児の手の届かないところに保管してください。
2.使用期限/製造番号　個箱の底面に記載(西暦年月/製造日コード表示)
使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【規格】　サイズおよび入り枚数は個箱に記載

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売元　大衛株式会社
〒534-0021　大阪府大阪市都島区都島本通 2-3-3
【お客様相談窓口】 **TEL. 06-6921-7373**
(土、日、祝日を除く 9:00 ～ 17:00 まで)