


機械器具 1 手術台及び治療台
一般医療機器 手術台アクセサリ JMDNコード : 70469000

消毒盤台門型M

*【禁忌・禁止】

〈使用方法〉
当社及びタカラベルモント製の高さ 32mm×板厚 9mm のサイドレールを使用する製品で、サイドレール寸法 530～570mm 以外の台には、取り付けて使用しないこと。[安全性が保証できないため]

*【形状・構造及び原理等】

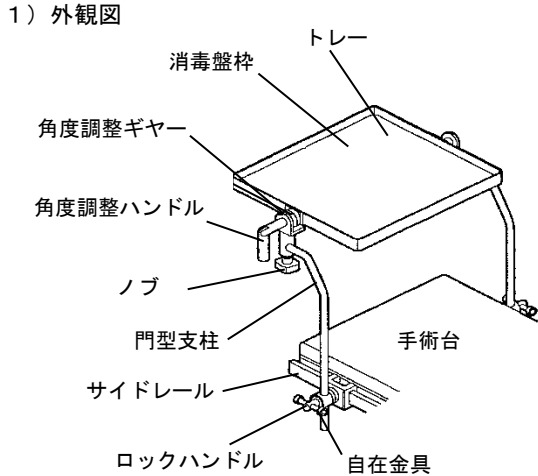

2) 機器の仕様

- ①自在金具のロックハンドル操作により、門型支柱を 370mm の範囲で昇降させることができます。
- ②ノブ操作により、消毒盤枠の固定及び脱着させることができます。
- ③角度調節ハンドル操作により、消毒盤枠を水平より各 30° 回転させることができます。

〈動作保証条件〉
下記の条件にて使用すること。(ただし、結露しないこと)
周囲温度 10～40℃ 相対湿度 30～75% 気圧 700～1060hPa

【使用目的又は効果】

本機は、手術台に取り付け、手術用具置き台として使用する。

*【使用方法等】

〈使用方法〉
機器の詳細な使用方法是付属の取扱説明書を使用前に必ず読むこと。

*【使用上の注意】

- 〈重要な基本的注意〉
- ①ノブや各ハンドルが確実に固定され、角度調節ギヤーが確実に噛合っているか確認すること。確実に固定されていないまま使用しますと、機器が動いたり、トレーが落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
 - ②トレーに器具等を載せた状態で、ノブやハンドルの操作及び手術台を傾斜させる等の操作をしないこと。トレーに載せた器具等が落下し、思わぬ事故の原因になります。
 - ③各ハンドル部及びノブに意図せず使用者や患者が触れることのないよう注意すること。機器が動いたり、落下するなどの思わぬ事故の原因になります。
 - ④トレー中央部に許容負荷荷重 (40N) 以上の負荷を加えないこと。機器の破損の原因になります。
 - ⑤お手入れは取扱説明書に従って実施すること。

【保管方法及び有効期間等】

〈耐用期間〉
本機の耐用期間は 10 年です。(自己認証 (当社データ) による)
※正規の使用方法、保守点検、消耗品などの交換を行った場合に限る。

*【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「保守点検」の項を使用前に必ずお読みください。

〈使用者による保守点検 (日常点検)〉

頻度	内容
使用前	設置状況の確認
	外観状況の確認
	作動状況の確認
	その他の確認

*〈業者による保守点検〉

業者による保守点検を実施するときは、当社または当社の指定する業者、若しくは修理業者などの適切な有資格者に依頼すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
タカラメディカル株式会社
TEL : 06-6499-3461

本製品には取扱説明書がありますので、必ず確認してください。