2003 年 1 月 14 日作成(様式 4 初版)
2017 年 10 月 18 日第四回改訂

管理文書 No. IN17D001A
製造販売届出番号 13B1X00082600011

類別等：機械器具（50）開創又は開孔用器具
一般医療機器　開創器　13373001

販売名：イノメッド・モジュラー･レトラクター

【警告】
加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】
ステンレススチール

ｱｼｽﾀﾝﾄ ﾌﾘｰ･ｾﾙﾌｰﾘﾃｰﾆﾝｸﾞ･ﾋｯﾌﾟ･ｻｰｼﾞｪﾘｰ･ﾚﾄﾗｸﾀｰ･ｼｽﾃﾑ




ﾁｬﾝﾚｰ ﾀｲﾌﾟ フﾚｰﾑ



ﾁｬﾝﾚｰ ﾀｲﾌﾟ ﾌﾞﾚｰﾄﾞ





ｱﾙｳﾞｨ ﾁｬﾝﾚｰ ｽﾀｲﾙ ﾌﾚｰﾑ＆ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

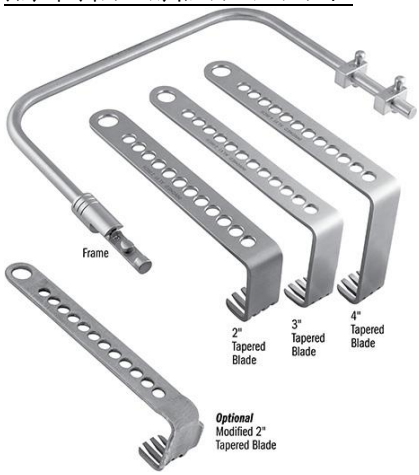


【使用目的又は効果】
組織又は解剖学的部位を分離し、臓器又は組織の露出やアクセスを確保するために用いる。


【使用方法等】
①スタンダード・フレーム使用例

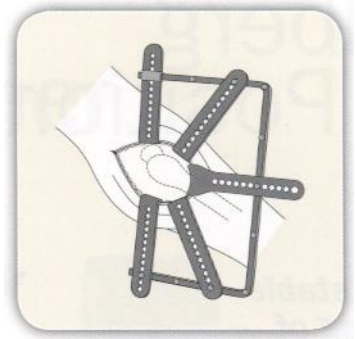

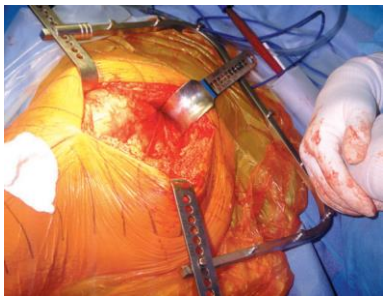

②スクエアー・フレーム使用例

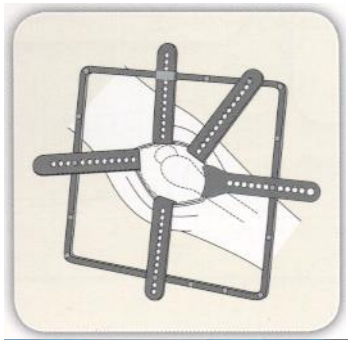

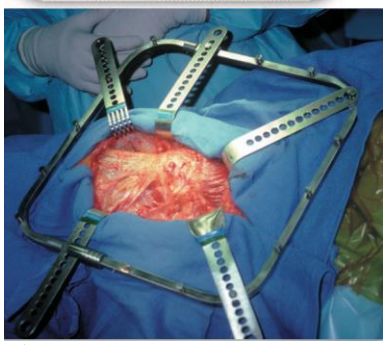

ブレード及びフレームは、開創部位に応じ様々な組み合わせが可能です。

③ウエッジの使用例



【使用上の注意】

- 本システム以外のブレード又はフレームを使用しないで下さい。[互換性が存在しない。]
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】

- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- **使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。**
  - 滅菌方法及び滅菌条件

    真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
    134℃　4 分間以上（推奨）

    その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及等】

タクト医療株式会社
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号　03（5644）8711㈹
URL http://tact-medical.co.jp
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc.（イノメット社）
URL http://www.innomed.net

2004年11月4日作成(様式4初版)
2017年10月18日第四回改訂

管理文書No. IN17D005A
製造販売届出番号 13B1X00082600011

類別等：機械器具（50）開創又は開孔用器具
一般医療機器　開創器　13373001

販売名：イノメッド・モジュラー･レトラクター

【警告】
加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】
ステンレススチール


1. ｺﾙﾍﾞﾙ･ｾﾙﾌﾘﾃｲﾆﾝｸﾞ･ｸﾞﾚﾉｲﾄﾞ･ﾚﾄﾗｸﾀｰ



2. ｺﾙﾍﾞﾙ･ｾﾙﾌﾘﾃｲﾆﾝｸﾞ･ﾚﾄﾗｸﾀｰ



3. ｺﾙﾍﾞﾙ･ｾﾙﾌﾘﾃｲﾆﾝｸﾞ･ﾚﾄﾗｸﾀｰ･ﾌﾞﾚｰﾄﾞ

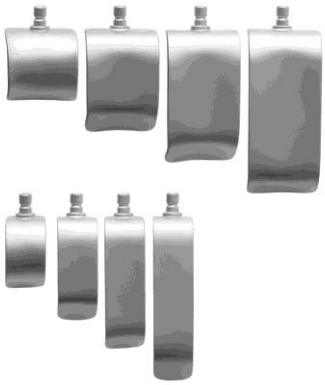

【使用目的又は効果】
組織又は解剖学的部位を分離し、臓器又は組織の露出やアクセスを確保するために用いる。

【使用方法等】
任意のブレードを取り付け、開創部を開く

【使用上の注意】
- 本システム以外のブレードを使用しないで下さい。[互換性が存在しない。]
- 使用前にキズ、割れ、サビ等の異常がないか確認し、異常が認められる場合は使用しないこと。
- 洗浄剤後は、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用しすすぎを行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】
長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。[血液及び体組織の付着を防止するため。]
- **使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。**
  ● 滅菌方法及び滅菌条件
  真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
  132℃　4分間以上（推奨）
  その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
タクト医療株式会社
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町2-16-1
電話番号　03（5644）8711㈹
URL http://tact-medical.co.jp
製造国名：米国
製造業者名：Innomed, Inc.（イノメット社）
URL http://www.innomed.net