類別等：機械器具（50）開創又は開孔用器具
一般医療機器　開創器　13373001


販売名：フィーリング・胸部レトラクター

【禁忌・禁止】
加工・改造は絶対に行わないで下さい。[折損の原因となります]

【形状・構造及び原理等】

1.　組成
チタニウム合金/ステンレススチール

2.　性状・構造
1）メルセデス レトラクター セット

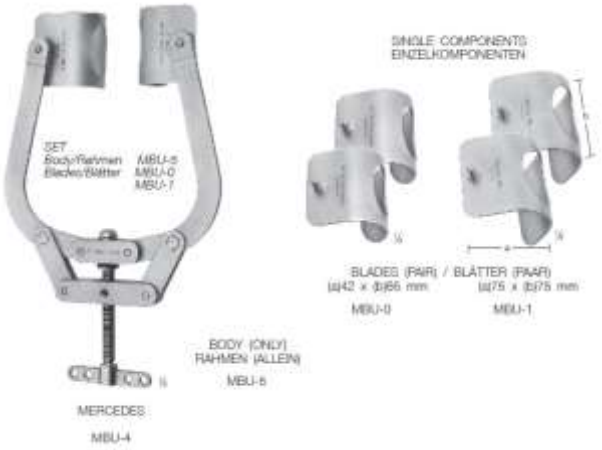

2）IMA レトラクター　ブレード



IMA RETRACTING BLADE
IMA HALTEBLATT


exemplary configuration
Konfigurationsbeispiel

【使用目的又は効果】
組織又は他の解剖学的部位を分離するために用いる手術器具である。

【使用方法等】
メルセデス･IMA レトラクターセット･スターナムレトラクターの使用方法
1.　胸部の開創部にブレードや附属部品を組み合わせた本体フレームを設置します。
2.　創の展開が必要な場合に、本体のつまみを回してブレード開いていきます。

【使用上の注意】
- 使用中は丁寧に扱い、**投げたり落としたりしないで下さい。可動部位（ネジ部）は、潤滑油等を使用して動きを確認して下さい。**
- 血液等汚れのついた製品は使用後速やかに洗浄してください。又、隙間に詰まった組織片は、使用後は必ず取り除いてください。
- 洗浄剤は必ず医療用の洗浄剤をご使用ください。又、水道水はなるべく使わず、蒸留水又はイオン交換水を使用し洗浄、滅菌を行って下さい。[成分に塩素、ヨウ素等が含まれていると、サビやシミの原因となります。]
- 洗浄時に、金属ウール、金属タワシ等を使用しないでください。[表面に傷が生じサビや腐食の原因になります。]
- 異なる金属とは一緒に洗浄しないでください。[電解沈着の原因となります。]

【保管方法及び有効期間等】
長期間保管する場合は、高温・多湿を避け保管する。

【保守・点検に係る事項】
- 洗浄及び保管前に、接合部の緩みがないか確認してください。
- 洗浄後、速やかに乾燥させ保管すること。[サビやシミの防止のため]
- 保管前には、医療用防錆潤滑剤を使用ください。潤滑剤は洗浄により除去されますので、保存前には毎回潤滑剤を使用してください。
- 使用に先立ち、オートクレーブ又はエチレンオキサイドガスにより滅菌して下さい。
  ● 滅菌方法及び滅菌条件
  真空脱気プリバキューム高圧蒸気滅菌
  134℃　5 分間以上（推奨）
  乾燥時間：１０分間
  その他の滅菌方法・条件に関しては、各施設にて採用している方法（エチレン・オキサイド滅菌・ホルマリン滅菌）に準じて下さい。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
タクト医療株式会社
〒103-0025　東京都中央区日本橋茅場町 2-16-1
電話番号　03（5644）8711㈹
URL http://tact-medical.co.jp
製造国名：独国
製造業者名：FEHLING INSTRUMENTS GMBH（フィーリング社）