2025年 4 月改訂（第4版）
*2020年10月改訂

一般医療機器	
届出番号	27B1X00150000002
JMDNコード	70196000

機械器具47. 注射針及び穿刺針
薬液用両刃針


バックスジェクトⅡハイフロー

BAXJECT II High-Flow

再使用禁止

【禁忌・禁止】
1. 再使用禁止
2. 再滅菌禁止

【形状・構造及び原理等】

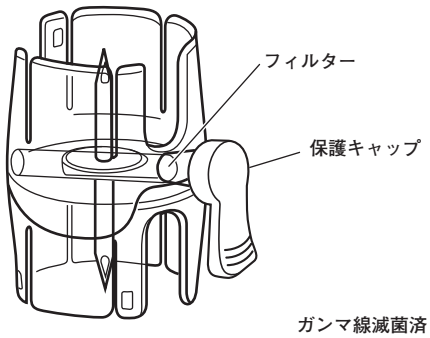


ガンマ線滅菌済


【使用目的又は効果】

両端が針状の形状であり、ゴム栓等で密封された薬液容器等に装着し、複数の薬液等を混合するために用いる。


【使用方法等】

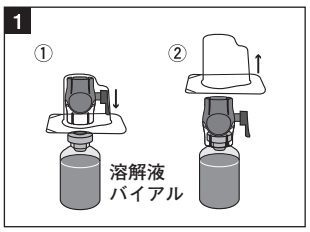


1. 本品のシールをはがし、ケースに入れたまま、消毒済みの溶解液バイアルのゴム栓中央に垂直に刺す。
2. ケースを取りはずす。

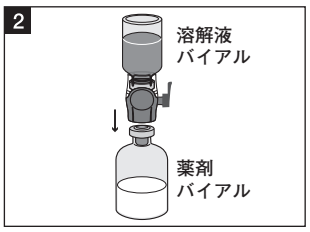

3. 溶解液バイアルに本品を確実に固定した後、バイアルを逆さまにして、消毒済みの薬剤バイアルのゴム栓中央に垂直に刺す。
4. バイアルを上下に連結したままの状態で泡をたてないようにゆるやかに揺り動かして溶解させる。

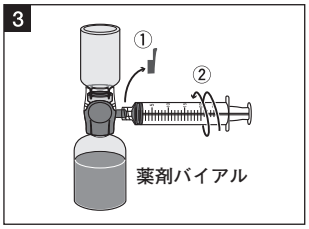

5. 保護キャップをはずす。
6. 注射筒を本品に接続する。

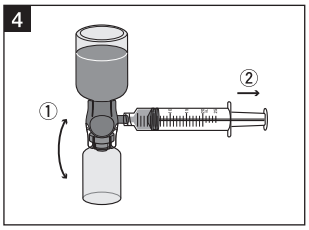

7. バイアルを上下に反転させ、薬剤バイアルを上にした状態で注射筒を引き薬液を注射筒に移行させる。
8. 薬液がすべて注射筒内に移行したら、注射筒を本品からはずす。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

使用にあたり、以下の内容で患者に指導を行うこと。
1. 使用前、包装に破損や本品に異常がある場合は使用しないこと。
2. 針先部分が手や衣服等に触れた場合は使用しないこと。
3. 必ず先に溶解液バイアルに刺すこと。
4. 斜めに刺入するとゴム栓の小片が溶液中に落下することがあるため垂直に刺すこと。

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

使用にあたり、以下の内容で患者に指導を行うこと。
1. 本品を使用する前に、使用する医薬品の添付文書を必ず読むこと。
2. 包装を開封後、すぐに使用すること。
3. 使用後は感染予防に留意し、安全な方法で処分すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】*

製造販売業者（輸入元）：
武田薬品工業株式会社
〒540-8645 大阪市中央区道修町四丁目1番1号
TEL：06-6204-2111

製造業者：
バクスターヘルスケア社（米国）
Baxter Healthcare Corporation（United States of America）