** 2016年3月1日(第五版)新法対応によるもの
* 2012年6月1日(第四版)

認証番号：219AIBZX00113000


機械器具05　麻酔器並びに麻酔器用呼吸嚢及びガス吸収かん
管理医療機器　再使用可能な麻酔用呼吸回路バッグ　37709000

アコマ麻酔用バッグ

【警告】
滅菌・消毒をおこなうこと。
[相互感染を防止するために実施すること。]
本品は天然ゴム製品です。使用に当たっては
【使用上の注意】を参照すること。

【禁忌・禁止】
過去にアナフィラキシー症状様の経験がある医療関係者及び患者への使用は禁止。

【形状・構造及び原理等】

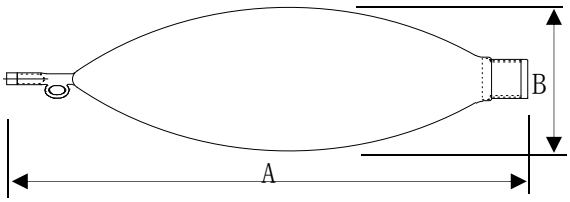

シリーズ別サイズ表

●口元は22mm-10%です

シリーズ	番号	容量(L)	マーク	A (mm)	B (mm)
ｱｺﾏ麻酔用ﾊﾞｯｸﾞ0.5L	AA0522	0.5	ACOMA	215±10%	90±10%
ｱｺﾏ麻酔用ﾊﾞｯｸﾞ1L	AA1022	1	ACOMA	280±10%	93±10%
ｱｺﾏ麻酔用ﾊﾞｯｸﾞ2L	AA2022	2	ACOMA	320±10%	110±10%
ｱｺﾏ麻酔用ﾊﾞｯｸﾞ3L	AA3022	3	ACOMA	385±10%	125±10%
ｱｺﾏ麻酔用ﾊﾞｯｸﾞ4L	AA4022	4	ACOMA	415±10%	140±10%
ｱｺﾏ麻酔用ﾊﾞｯｸﾞ5L	AA5022	5	ACOMA	430±10%	157±10%

原材料：天然ゴム

【使用目的又は効果】
呼吸回路の設計により回路の吸気側又は呼気側に接続して使用し、呼吸回路中にあって呼吸ガスを保存すること。

【使用方法等】
(1) 患者の身体的条件や臨床的判断を考慮し、患者にあわせて本品を選択する。
(2) 本品を呼吸回路の吸気又は呼気リムに取り付ける。
(3) 本品を加圧する。患者の肺容積を考慮して加圧する。

【使用上の注意】
使用注意：（次の患者には慎重に適用すること）
(1) 天然ゴムは、かゆみ、発赤、じん麻疹、むくみ、発熱、呼吸困難、血圧低下、ショックなどのアレルギー性症状をまれに起こすことがある。このような症状を起こした場合には、直ちに使用を中止し、医師に相談すること。
(2) 天然ゴムと接触する機会の多い方々は天然ゴムアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、使用に関しては注意すること。

併用医療用具
下記の製品とは併用しない。
(1) 十分な接続が維持できない製品。
(2) 接続により閉塞をおこす製品。
(3) 離脱が困難な製品。

使用方法に関連する使用上の注意
取付け・取外しは、単純首を持って行いバッグ本体を引張らない。

【保管方法及び有効期間等】
1. 保管方法
(1) 高温多湿を避けて保管する。
(2) 直射日光を避け、通気性の良い場所に保管する。
(3) 水に濡れないように保管する。
(4) 蛍光灯下やオゾンを発生する機器の周辺等に保管しない。
(5) 過度な重みがかからないように配慮する。
2. 使用期限
本品の使用期限は５年を推奨します。ただし劣化や破損が認められる場合は、医療用廃棄物として処分してください。

【保守・点検に係わる事項】
1. 清掃方法（洗浄方法）
(1) 使用後はよく水洗いをし、ストッパーを外して水を抜く。
(2) 脱水し乾燥させる。なお、乾燥の際にはリングを使用し、他の製品等と接触しないようにぶら下げる。
2. 消毒方法
消毒薬は、消毒薬メーカーの推奨する使用方法により利用すること。
3. 滅菌方法
(1) 洗浄方法に示すとおり洗浄および乾燥をおこなう。
(2) 滅菌はEOG滅菌とする。
(3) 滅菌パックに入れて滅菌すること。
(4) 金属や他の滅菌物と直接ふれないようにすること。
4. 保守・点検に係わる注意事項
(1) 紫外線滅菌、オートクレーブ滅菌はおこなわない。
(2) 油、油脂、ガソリン、キシレン等の有機溶剤と接触させない。

***【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】**
製造販売元
田中ゴム株式会社
電話番号
048-797-5681

販 売 元
アコマ医科工業株式会社
電話番号
03-3811-4151