900343680
2-52　アルコン™　硝子体プローブ　硝子体プローブ用イリゲーションスリーブ
2018年4月作成（第1版）
医療機器承認番号：21600BZY00690000


機械器具　29　電気手術器
管理医療機器　硝子体切除ユニットカッタハンドピース　JMDNコード：34125000

アルコン™　硝子体プローブ
硝子体プローブ用イリゲーションスリーブ

再使用禁止

【禁忌・禁止】
＜使用方法＞
1. 本製品は、使用1回限りの製品である。一度開封した製品の再滅菌、再使用はしないこと。
2. 本製品は、**アルコン**™眼科用手術装置及び構成品以外には使用しないこと。[「相互作用」の項参照]

【形状・構造及び原理等】
本製品は、**アルコン**眼科用手術装置に接続して使用する硝子体プローブに被せる同軸型灌流スリーブである。([組み合わせて使用する医療機器]の項参照)

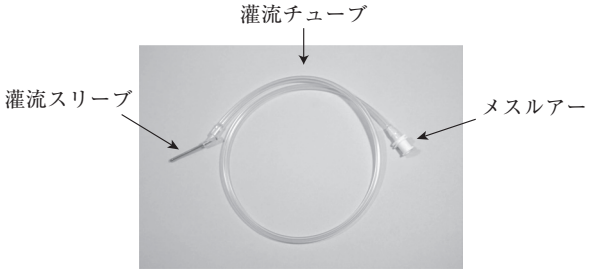

本製品は、ポリ塩化ビニル（可塑剤：フタル酸ジ-2-エチルヘキシル）を使用している。

【使用目的又は効果】
白内障手術及び硝子体手術において、白内障・硝子体手術装置に接続し、硝子体等眼内組織の切除に使用する。

【使用方法等】
本製品の灌流スリーブを硝子体プローブのニードルに被せ、メスルアーを手術装置に接続されている灌流用チューブに接続して使用する。

〈使用方法等に関連する使用上の注意〉
1. 本製品を使用中に問題が生じた場合には、装置取扱説明書の「トラブルシューティング」等を参照すること。また、問題が解決するまで使用を中止すること。
2. 本製品を使用する前に必ず正常に作動するか、又は異常がないかを確認すること。

【使用上の注意】
〈重要な基本的注意〉
1. 本製品を使用する際には、装置の調節を必要とする場合があるため、使用する手術装置が適切に設定されていることを確認すること。
2. 装置取扱説明書の「セットアップと点検」等に従って術前の点検を行うこと。
3. ポリ塩化ビニルの可塑剤としてフタル酸ジ-2-エチルヘキシルを使用している製品は、併用する医薬品によっては、可塑剤が溶出するおそれがあるため（特に脂溶性医薬品では、溶出するおそれが高い）使用する薬剤、患者等に注意すること。

[組み合わせて使用する医療機器]
本製品は、販売名「アルコン　硝子体プローブ」の20ゲージ（800cpmカットレート）のプローブと併用して使用できる。

〈相互作用〉（他の医薬品、医療機器等との併用に関すること）
〈併用禁忌〉（併用しないこと）
本製品は、**アルコン**眼科用手術装置及び構成品以外の機械には使用しないこと。[弊社製以外の機械で使用するとシステムの性能に影響を与え、患者に危害を与えるおそれがある。]

【保管方法及び有効期間等】
〈保管方法〉
高温、多湿、直射日光、水濡れを避けて保管すること。
〈有効期間・使用の期限（耐用期間）〉
包装の使用期限の欄に表示

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
[製造販売元]
日本アルコン株式会社

[お問い合わせ窓口]
日本アルコン株式会社
電話番号：0120-825-266（学術情報グループ）

[製造業者]
Alcon Laboratories, Inc.　アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照下さい

©2018, 2021 Alcon Inc.

Alcon
21.03I-2-52-2DK