
2008年5月17日(新様式第2版) 製販許可番号の変更による改訂	器具器械 22 検眼用器具 検眼鏡診断セット	医療機器製造販売届出番号 13B3X10062000053

製品番号:2001　　販売名称: **アルプケイツー 検耳鏡**　　一般医療機器 JMDN:70095000

【形状・構造等】 ＊右図参照



検耳鏡セット図

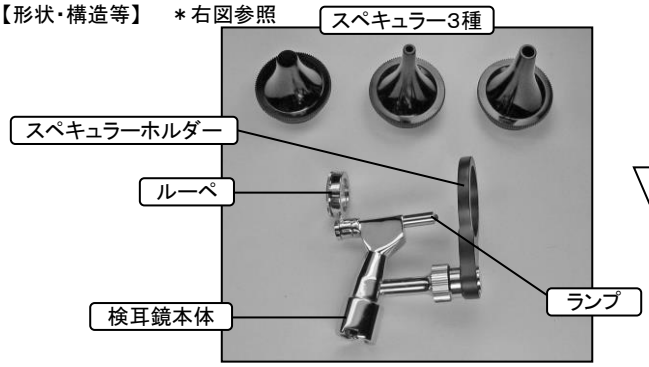

＊セット全長:約 220mm
＊セット重量:約 400g(乾電池を含む)



＊ハンドル部:33φ×145mm

【性能・使用目的】

1. 性能
　・検耳鏡:黄銅JIS H 3250／クロムメッキ
　　＊スペキュラー:ABS樹脂
　　筒先径 7φ×21mm
　　5φ×32mm
　　3φ×32mm
　　＊ルーペ:1.8倍
　　＊ランプ:3V3W
　・ハンドル部:アルミ筒、ABS樹脂グリップ
　　＊バッテリー:単2乾電池 1.5V 2本

2. 使用目的
　ランプ光照射による内耳の観察・診断

【使用方法】

1. ハンドル部のキャップをはずして乾電池をセットする。
2. 電球を取り付ける。
3. スペキュラーのサイズを選びスペキュラーホルダーに取り付ける。
4. 検耳鏡本体をハンドルに押し回しながら取り付ける。
5. スイッチを ON にして電球の点灯を確認する。
6. ルーペの位置を合わせて診察する。
7. 診断終了後はスイッチを OFF にし消灯を確認する。

【使用上の注意】

1. 本体は分解しないでください。
2. 検耳鏡本体の取付は、しっかりと確実に行ってください。
3. スイッチを入れる際は ON の位置まで回してください。
4. スペキュラーは適切な選択をしてください。
5. 乾電池は電極を正しくセットし、キャップはしっかり締めてください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は内耳の診察以外の目的には使用しないで下さい。
2. 本器は精密光学機器です。
　本器を落としたり、乱暴 な取り扱いはしないでください。
3. 長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 医療用具ですので汚れは清潔な乾布で拭き取る等、衛生上の管理をしてください。
3. 他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。
　修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。
4. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】
田中産業株式会社　東京都荒川区荒川 6－26－5
TEL: 03－3892－4481 FAX: 03－3892－4450

【アフターサービス等の問合せ先】
田中産業株式会社　東京都文京区本郷 3－16－3
TEL: 03－3814－7181 FAX: 03－3814－7177