製品番号:5001


販売名称: **アルプケイツー ハロゲン診断フルセット**

一般医療機器 JMDN:70095000

日本製

＊検耳鏡の添付文書

【形状・構造等】 ＊右図参照

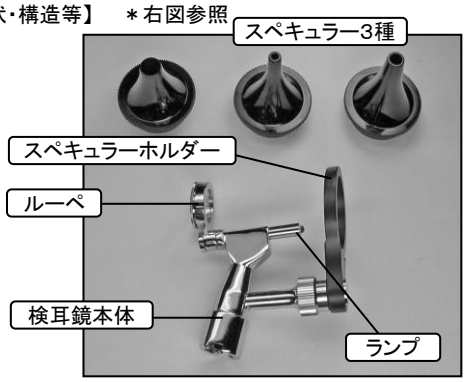



＊ハンドル部:33φ×145mm

検耳鏡セット図



＊セット全長:約 220mm
＊セット重量:約 400g(乾電池を含む)

【性能・使用目的】

1. 性能
   ・検耳鏡:黄銅JIS H 3250／クロムメッキ
      ＊スペキュラー:ABS樹脂
         筒先径 7φ×21mm
            5φ×32mm
            3φ×32mm
      ＊ルーペ:1. 8倍
      ＊ランプ:3V3W
   ・ハンドル部:アルミ筒、ABS樹脂グリップ
      ＊バッテリー:単2乾電池 1. 5V 2本

2. 使用目的
   ランプ光照射による内耳の観察・診断

【使用方法】

1. ハンドル部のキャップをはずして乾電池をセットする。
2. 電球を取り付ける。
3. スペキュラーのサイズを選びスペキュラーホルダーに取り付ける。
4. 検耳鏡本体をハンドルに押し回しながら取り付ける。
5. スイッチを ON にして電球の点灯を確認する。
6. ルーペの位置を合わせて診察する。
7. 使用後はスイッチを OFF にし消灯を確認する。

【使用上の注意】

1. 本体は分解しないでください。
2. 検耳鏡本体の取付は、しっかりと確実に行ってください。
3. スイッチを入れる際は ON の位置まで回してください。
4. スペキュラーは適切な選択をしてください。
5. 乾電池は電極を正しくセットし、キャップはしっかり締めてください。

＊ブレード及びミラーの添付文書

【形状・構造等】 ＊右図参照



＊ブレード及びミラーは図のようにハンドルに取り付ける

【性能・使用目的】

1. 性能
   ・ブレード:ABS樹脂
      :幅18mm×全長120mm
   ・ミラー:黄銅JIS 3250 クロムメッキ
      :全長130mm ミラー径 18mm

＊ハンドルは検耳鏡／検眼鏡と共用

2. 使用目的
   ランプ光照射による口腔内の観察・診断

【使用方法】

1. ハンドル部のキャップをはずして乾電池をセットする。
2. ブレード又はミラーをハンドルに押し回しながら取り付ける。
3. スイッチを ON にして電球の点灯を確認する。
4. ブレード又はミラーにより口腔内を診察する。
5. 使用後はスイッチを OFF にし消灯を確認する。

【使用上の注意】

1. ミラーやハンドル等は分解しないでください。
2. ブレード又はミラーの取付は、しっかりと確実に行ってください。
3. スイッチを入れる際は ON の位置まで回してください。
4. 乾電池は電極を正しくセットし、キャップはしっかり締めてください。

製品番号:5001

＊検眼鏡の添付文書

日本製

【形状・構造等】 ＊右図参照





＊ハンドル部:33φ×145mm

検眼鏡セット図



＊セット全長:約 220mm
＊セット重量:約 370 g(乾電池を含む)

【性能・使用目的】

1. 性能

・検眼鏡:ABS樹脂、ポリカーボネード

＊レコスレンズ
0～＋ 9D まで1D間隔
0～－10D まで1D間隔
他に－12D、－15D

＊補助レンズ
－10D、－20D、＋20D

＊目盛ディスク
普通検査孔、小孔、無赤フィルター
固視標、スリット

注:上記の詳細は別紙説明書を参照して下さい

・ハンドル部:アルミ筒、ABS樹脂グリップ
＊バッテリー:単2乾電池 1.5V 2本

2. 使用目的
ハロゲン光照射による眼底の観察・診断

【使用方法】

1. ハンドル部のキャップをはずして乾電池をセットする。
2. 検眼鏡本体をハンドルに押し回しながら取り付ける。
3. スイッチを ON にして点灯を確認する。
4. 別紙説明書に従ってレコスレンズ・補助レンズ・目盛ディスクを設定し、眼底を診察する。
5. 使用後はスイッチを OFF にし消灯を確認する。

【使用上の注意】

1. 本体は分解しないでください。
2. 検眼鏡本体の取付は、しっかりと確実に行ってください。
3. スイッチを入れる際は ON の位置まで回してください。
4. 各レンズは正しい位置にセットしてください。
5. 乾電池は電極を正しくセットし、キャップはしっかり締めてください。

【取り扱い上の注意】

1. 本器は内耳又は眼底診察以外の目的には使用しないで下さい。
2. 本器は精密光学機器です。
本器を落としたり、乱暴 な取り扱いはしないでください。
3. 長期間使用しない場合は、乾電池を抜いてください。

【保守・点検等】

1. 保管は高温・多湿・直射日光を避け、常温で適切な管理をしてください。
2. 医療用具ですので汚れは清潔な乾布で拭き取る等、衛生上の管理をしてください。
3. 他社部品の使用は事故・トラブルの原因となる場合があります。
修理や部品の交換等は、当社純正部品を使用してください。
4. 本製品の耐用年数は 3年 です。(自己認証)

【製造業者／製造販売業者】
田中産業株式会社 東京都荒川区荒川 6－26－5
TEL: 03－3892－4481 FAX: 03－3892－4450

【アフターサービス等の問合せ先】
田中産業株式会社 東京都文京区本郷 3－16－3
TEL: 03－3814－7181 FAX: 03－3814－7177