2020年10月9日　（第4版）**
2018年5月15日　（第3版）*
2017年11月24日　（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

製造販売届出番号：13B3X00237000009

器４８注射筒
一般医療機器　　硬膜外位置確認用ロスオブレジスタンス針なし注射筒　ＪＭＤＮ70201001

単回使用

ガラスＬＯＲシリンジ

【警告】
●本品は滅菌しておりません。使用時には必ず滅菌してから使用してください。

【禁忌・禁止】
●再使用禁止

【形状･構造及び原理等】
●本品は硬質硼珪酸ガラス製の外筒、内筒からなり目盛容量、筒先の形状は以下のものがあります。


筒先形状　ISO594 ルアーガラススリップ先
ISO594 ルアーメタルスリップ先
ISO594 ルアーメタルロック先

ISO80369-6 スリップ先
ISO80369-6 ロック先

容量　2,5,10ml

（代表的なガラスシリンジの外観図）

5ｍｌ　ISO594ルアーガラススリップ先注射筒

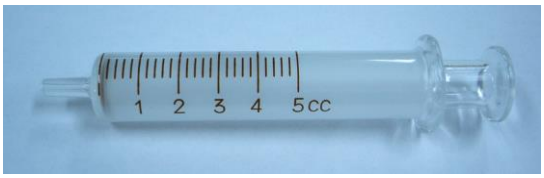

ISO594 ルアーガラススリップ先



ISO80369-6 スリップ先



（材質）
ガラス部分：硼珪酸ガラス
金属　部分：真鍮、ニッケルメッキ／クロムメッキ仕上げ

【使用目的又は効果】
●硬膜外麻酔でロスオブレジスタンス法に使用する。

【使用方法等】
**●ＥＯＧ滅菌またはオートクレーブ滅菌を行った後、使用してください。

＜使用方法に関連する使用上の注意＞
●注射針の取り付けの際針先に無理な力がかからない様に注意してください。
●各接続部に液漏れ等の不具合が認められた場合には使用を取りやめてください。

【使用上の注意】
＜重要な基本的注意＞
●本品に他の製品を接続し使用する場合には、各製品の添付文書等を読んで、その指示に従って使用してください
●本体に衝撃を与えないよう取扱いには十分に注意してください。
●キズ、ひび割れや液漏れ等の異常が認められた場合には速やかに使用を中止してください。

【保管方法及び有効期間等】
●水ぬれに注意し、高温多湿、直射日光のあたる場所は避けて保管してください。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】
製造販売業者
VAN　翼工業株式会社（添付文書の請求先）
〒116-0003　東京都荒川区南千住3-11-3
ＴＥＬ　03-3807-5151
製造業者
翼工業株式会社　（千住第二工場）
〒116-0003　東京都荒川区南千住3-7-3