＊ 2017 年 11 月改訂（第 2 版 新記載要領に基づく改訂、他）　　医療機器承認番号　21300BZZ00067
2013 年 9 月作成


機械器具 74 医薬品注入器
高度管理医療機器　　患者管理無痛法用輸液ポンプ（JMDN コード:35932000）
（注射筒輸液ポンプ（JMDN コード：13217000））

「テルフュージョン®小型シリンジポンプＴＥ-３６１」の付属品

（電源アダプタ　コード番号：ＸＸ-３６１ＡＣ）

【形状・構造及び原理等】

＜構造図＞

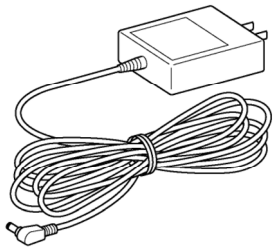

［仕様に係る事項］

使用条件

周囲温度：5～40℃
相対湿度：20～90%RH（ただし、結露なきこと）

【使用目的又は効果】

＜使用目的＞

本品は、本体の電源供給に使用する。なお、本体のテルフュージョン小型シリンジポンプ TE-361 は、シリンジ内の薬液を設定した時間当たりの流量で持続的に注入するために使用する。

【使用方法等】

1. 本体の DC コネクタに本品を接続する。このとき、本体の［AC／電池充電中］ランプが点灯又は点滅することを確認する。
2. 本体の操作手順に沿って注入の開始、停止を行う。

＜使用方法等に関連する使用上の注意＞

(1) 本体は本品を接続して使用し、必ずリチウムイオン充電式バッテリ（以下バッテリ）を装填すること。［バッテリは本品を接続できない場合や移動時等の補助電源であり、装填していないと緊急時又は本品が抜けた場合に使用できなくなる。］
(2) バッテリ使用時に、バッテリ電圧低下警報が発生した場合は速やかに本品を接続するか又は、あらかじめ用意した充電済みバッテリに交換すること。［本体が停止する。］
(3) バッテリ使用時に、24 時間連続使用した場合は本品を接続するか又は、あらかじめ用意した充電済みバッテリに交換すること。［本体が停止する可能性がある。］

【使用上の注意】

＜重要な基本的注意＞

(1) 本品以外の電源アダプタは使用しないこと。［指定外の電源アダプタを使用した場合、本体が故障する可能性がある。］
(2) 本品を接続する際は、本体の DC コネクタなど、機器の主要部分への薬液等によるぬれが無いことを十分に確認すること。また、薬液等のぬれを確認した場合、本品を本体及び AC100V コンセントから抜いた状態、かつ電源を切った状態で速やかに乾いた布等でよく拭き取ること。［本体及び本品は防水構造ではなく、内部の電子部品に影響を与え、装置故障の原因となる。］

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

［保管条件］

周囲温度：-20～45℃
相対湿度：10～95%RH（ただし、結露なきこと）

＜耐用期間＞

耐用期間：6 年（自己認証による）

【保守・点検に係る事項】

［保守・点検上の注意］

本体及び本品を、流水や水没させての洗浄は行わないこと。［本品は防水構造ではないため、破損、故障する可能性がある。］

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製 造 販 売 業 者 ： テルモ株式会社
電　話　番　号 ： 0120-12-8195　テルモ・コールセンター

本体の取扱説明書を必ずご参照ください。

TERUMO はテルモ株式会社の商標です。
テルモ、テルフュージョンはテルモ株式会社の登録商標です。