**2021 年 11 月改訂（第 3 版）
*2017 年 9 月改訂

医療機器承認番号　22500BZX00058

機械器具　12　理学診療用器具
管理医療機器　ＯＣＴ画像診断装置（JMDN コード：70031000）


「ルナウェーブ」の付属品
（光コネクタクリーナ　コード番号：LW-10C）

再使用禁止

*
【禁忌・禁止】
再使用禁止
*<使用方法>
ぬれた手で、本品に触れないこと。［クリーナ部がぬれた状態で清掃すると、装置が故障する可能性がある。］

【形状・構造及び原理等】

<構造図>

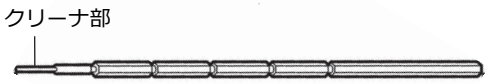


**【使用目的又は効果】


<使用目的>
本品は、ルナウェーブ　モータドライブユニット（以下、MDU という。）のカテーテル接続部内部にある光コネクタを清掃するためのものである。なお、ルナウェーブは、近赤外光を用いて、冠動脈及び下肢動脈における血管内腔及び血管壁表層を画像化し、検査することを目的としている。

【使用方法等】

1. 先端のクリーナ部に手などが触れないように包装パッケージから、取り出す。

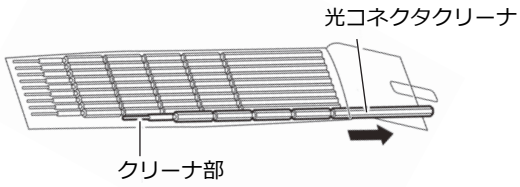

2. クリーナ部を、MDU のカテーテル接続部に挿入し、光コネクタに押しあて同一方向に 3 回転させる。

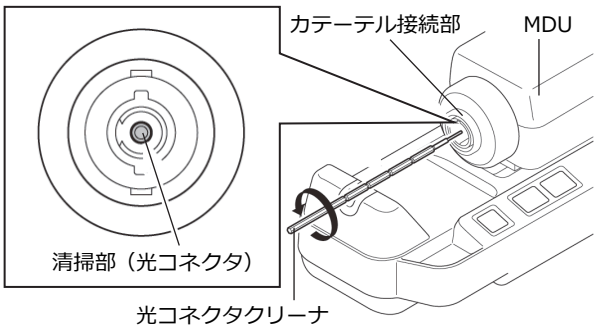

3. クリーニングを終了後、ゆっくりと MDU のカテーテル接続部から取り出す。

本品は次の機種のみで使用可能である。
［適用機種］
ルナウェーブ　（コード番号：LW-10S）

<使用方法等に関連する使用上の注意>
(1) 装置の使用前、使用後に、本品で光コネクタを清掃すること。［画質の低下又は血管描出不能を引き起こし、不適切な画像化につながる可能性がある。］
(2) 本品を使用して光コネクタを清掃する前に、カテーテル接続部を清掃し、汚れや異物を取り除くこと。［異物が咬み込み、装置が故障する可能性がある。］
(3) 本品を利用して、適切に光コネクタを清掃すること。［画質の低下又は血管描出不能を引き起こし、不適切な画像化につながる可能性がある。］
(4) 本品に、アルコールやシンナー等の有機溶剤やポビドンヨードをしみ込ませて使用しないこと。［故障の原因となる。］

【保管方法及び有効期間等】

<保管方法>
水ぬれに注意し、高温多湿を避けて保管すること。
保管条件：周囲温度　-20～60℃
　　相対湿度　10～75%RH（ただし、結露なきこと）

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者：テルモ株式会社
電　話　番　号：0120-12-8195　テルモ・コールセンター

取扱説明書を必ずご参照ください。

TERUMO