** 2024 年 5 月（第 7 版）　　届出番号 26B2X10018000016

＊ 2020 年 11 月（第 6 版）

器 70　歯科用鋳造器

一般医療機器　歯科技工用高周波鋳造器　JMDN　70751000


キャスコム S

【警告】
①高温のリング等を扱うため、断熱手袋を装備して、やけどをしないように注意すること。
②溶融金属を直視すると、視力障害を起こします。溶融確認には遮光板を使用し、防護めがねを着用すること。

【禁忌・禁止】
ルツボ、リングなどの消耗品は弊社のものを使用すること。他社のものを使用すると、故障したり、ケガをする可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

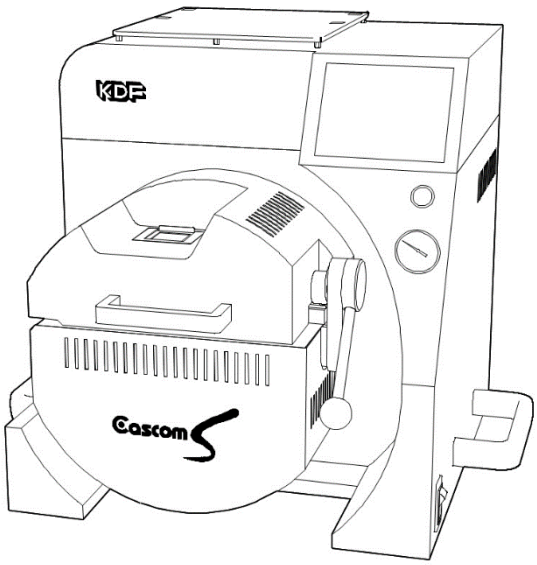

【使用目的又は効果】

高周波により歯科用合金を溶融・鋳造する装置。

【使用方法等】

1）取り付け、設置

付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりした机に設置すること。

2）操作方法または、使用方法

機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

1）熟練したもの以外は機器を使用しないこと。

2）機器を使用する前には次の事項に注意すること。

①アースが完全に接続されていることを確認すること。

②接続されている圧縮空気の圧力は 0.5MPa 以上、1MPa 以下であること。

③アルゴンガスを使用する場合、その圧力は 0.7MPa 以上、0.8MPa 以下であること。

④周囲に燃えやすい物が無いこと。

3）機器の使用中は次の事項に注意すること。

①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。

②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。

③外装温度が上昇するため、体が機器に触れないようにすること。

4）機器の使用後は次の事項に注意すること。

①電源スイッチを切り、機器の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

②アルゴンボンベのバルブを閉めること。

**【保管方法及び有効期間等】

〔耐用期間〕

製造日から、正規の保守点検を行った場合に限り 10 年間とする。

記載の耐用期間は自己認証（当社データ）による。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「日常のお手入れ」の項をお読みください。

1）機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。

2）長い間使用しなかった機器を再使用するときには、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1）製造販売業者

デンケン･ハイデンタル株式会社

＊ TEL. 075-672-2118

2）製造業者

デンケン･ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。

PD-0008K