

歯科材料07 歯科用ワックス 一般医療機器
歯科用キャストイングワックス JMDNコード: 16189000

エイド ロールワックス


【形状・構造等】

- 1) 成分
パラフィンワックス、蜜ロウ、カルナバワックス
- 2) 形状
棒状
φ2.0mm、φ2.5mm、φ3.0mm
φ3.5mm、φ4.0mm、φ5.0mm

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売業者 デンタルエイド株式会社
ホームページ <http://www.dentalaid.co.jp>

輸入元 RECO-DENT INTERNATIONAL CO.,LTD(台湾)

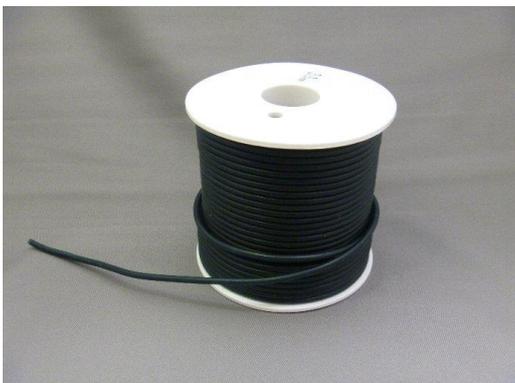

【性能、使用目的、効能または効果】

床、バー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いる。

【品目仕様】

融点: 59±1°C

【操作方法または使用方法等】

細棒状のワックスを炎で加熱し、適度に軟化させたところで、パターンを形成する。

【使用上の注意】

- 1) 使用注意
 - ① 本材は可燃性であるので、使用の際にやけどをしないように注意すること。
 - ② 本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。