

機械器具 11 放射線障害防護用器具


一般医療機器 放射線防護用掛布 JMDN コード：38357000

RADIFENDER プロテクションシート AIR

【形状・構造及び原理等】

人体に掛けて使用する為、放射線防護材を、
軽量の軟質シートとして構成したものである。

＜形状＞

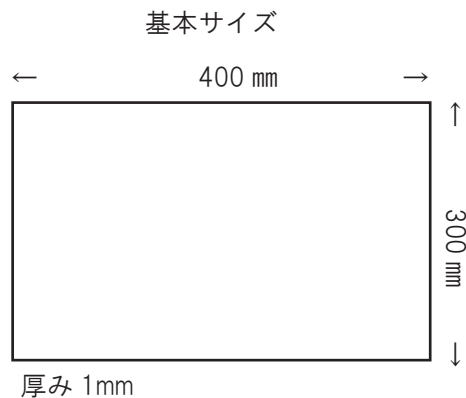

ベース素材：C S M

防護材：ビスマス等

【使用目的又は効果】

医科、歯科等において診断・処置による、
不必要な散乱放射線の被曝から、患者や術者の
、身体の特定位を保護する為に使用する。

JIS T6133-1

「診断用X線に対する防護用具—材料の減弱特性の決定方法」での試験において、鉛当量 0.25 mmPb 以上の遮蔽効果を有する。

【使用方法等】

放射線を使用する検査や処置において、散乱放射線から、身体の保護が必要な部位を遮蔽する。

【保管方法及び有効期間等】

＜保管方法＞

損傷防止の為、衝撃や外圧を避けて保管する事。

＜使用期限＞

本製品表面に亀裂・損傷・劣化が確認されるまで。

【保守・点検に係る事項】

目視等により、製品表面に、損傷、亀裂、劣化等の発生が確認された場合は、使用を中止する事。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者

テクノライフジャパン株式会社

住所

兵庫県神戸市西区宮下一丁目4番3号

電話

078-939-3725