＊２０２４年０４月（第２版）
２０２３年１１月（第１版）


届出番号：13B1X00030000Chr

機械器具（２２）検眼用器具
一般医療機器　自覚屈折測定機能付レフラクト・ケラトメータ（36387040）

レフラクションシステム　Chronos の付属品
あご受け　CRX-1000

【形状・構造及び原理等】

１．構成
本品は、あご受けのみで構成される。
レフラクションシステム Chronos 本体と組み合わせる。

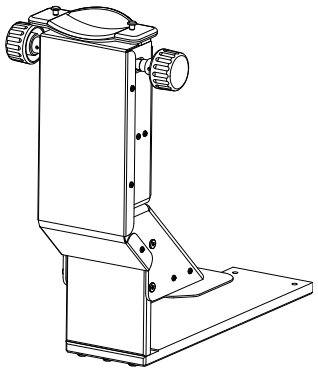

２．体に接触する部分の組成
あご受け：アクリロニトリルブタジエンスチレン樹脂
あご受け紙止めピン:ポリアミド樹脂
あご受け紙：紙
３．寸法　：193(W)×361(D)×373～441(H)mm
４．使用環境
温度：10 ℃～35 ℃
湿度：30%～90%（結露なきこと）
気圧：800hPa～1060hPa

＊【使用目的又は効果】

本品は、Chronos 用電動光学台 CGS-1000（以下、「光学台」）に取り付け、被検者のあごを位置調整するために用いる。

【使用方法等】

＜使用方法＞
１．光学台のテーブルの裏の中央奥のボルト 2 本を取り外す。
２．保持板に付属している固定ボルト 2 本でテーブルに固定する。
３．あご受け部に保持板を組付け、固定ボルト 4 本で固定する。
４．被検者の目線の高さが Chronos 本体部の測定窓の高さになるよう“あご受け上下動ノブ”を回して調節する。

詳細は、本品の「取扱説明書」を参照のこと。

【使用上の注意】

重要な基本的注意
各種付属品の取り付けは確実に行うこと。
［使用中や移動中に落下し負傷する恐れがあります。］
＜その他の注意＞
１．機器を設置するときは次の事項に注意すること。
（１）水のかからない場所に設置すること。
（２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れの無い場所に設置すること。
（３）傾斜、振動、衝撃(運搬時を含む)など安定状態に注意すること。
（４）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に設置しないこと。

廃棄
装置を廃棄する場合は、廃棄、リサイクルに関する自治体の条例に従うこと。

詳細はレフラクションシステム Chronos 本体「取扱説明書」の「安全に関する全般的な情報」及び「安全に使うための表示と図記号」を熟読し、遵守すること。

【保管方法及び有効期間等】

１．保管
温度：-10°C～55°C
湿度：10%～95%（結露なきこと）
気圧：700hPa～1060hPa
２．輸送
温度：-40°C～70°C
湿度：10%～95%
気圧：700hPa～1060hPa
３．保管場所については次の事項に注意すること。
（１）水のかからない場所に保管すること。
（２）気圧、温度、湿度、風通し、日光、ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気などにより悪影響の生ずる恐れの無い場所に保管すること。
（３）傾斜、振動、衝撃（運搬時を含む）など安定状態に注意すること。
（４）化学薬品の保管場所やガスの発生する場所に保管しないこと。

４．耐用期間
正規の保守点検を行った場合に限り、納入されたときから 8 年（自己認証［当社データ］による）

【保守・点検に係る事項】

使用者による保守点検事項

項　目	点検時期	点検内容
点検	使用前	・あご受け部がテーブル部に確実に取り付いていること
クリーニング	汚れたとき	・あご受け部
補給	必要時	・あご受け紙

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者
株式会社　トプコン
ＴＥＬ　０３－３５５８－２５０６

取扱説明書を必ずご参照下さい

1069240-01-B -24042201